

DA-100 Intra Oral Camera Руководство

1. Основная информация

002 Общее введение

003 Спецификация

2. Руководство по монтажу

006 Мультимедиа Встроенный монитор

006 интраоральной камеры

007 Интраоральный держатель камеры

008 Stand

3. Гид пользователя(011–014)

4. Другая информация

015 Устранение

016 Техническое обслуживание

017 Политика Гарантия

Основная информация

параметры

Image датчик: CMOS1/4

Операционная система: Встроенная операционная система

Показать фото:1 Picture/4 Pictures /16 Pictures

Функционирование системы: Remote Control/Key Control

Режим резервного копирования: Backup to USB device automatically

Вместительность хранилища: Max 32G

Формат изображения хранения: JPG

Диапазон фокусировки: 5MM--50MM

потребление: 30W

WIFI Transmission:Yes


Спецификации

Стандартный пакет		
NO	Наименование	QTY
1	Мультимедиа Встроенный монитор	1 Pcs
2	интраоральной камеры	1 Pcs
3	Дистанционное управление	1 Pcs
4	DC адаптер (12V)	1 Pcs
5	DC кабель	1 Pcs
6	Интраоральная камера Кабель	1 Pcs
7	Интраоральный Держатель камеры	1 Pcs
8	кронштейн Интраоральный держатель	1 Pcs
9	камеры	1 Pcs
10	USB Device(8G)	1 Package
	Винт для держателя и кронштейна	


вариант		
NO	Наименование	QYT
1	Алюминиевый сплав	1Set
2	Стенд Стандартный тип	1Set
3	Стенд Simlpe Тип	1Set
4	подставки WIFI приемник	1Pcs

Спецификации


Мультимедиа встроенный монитор

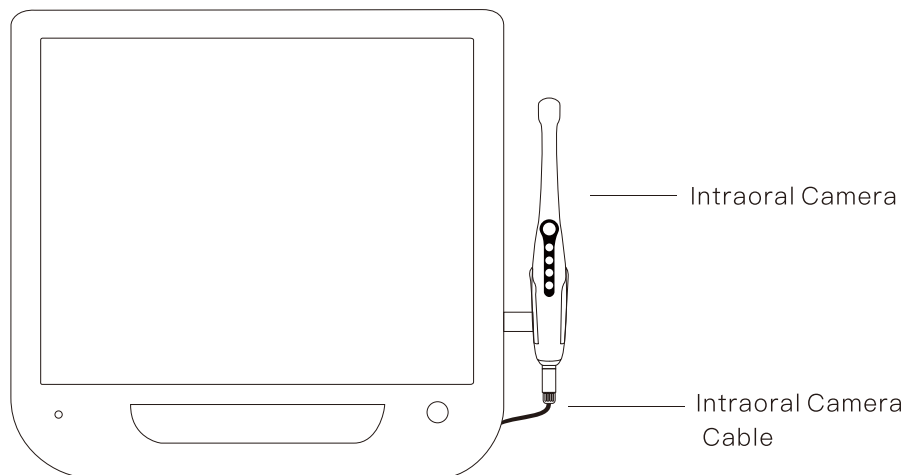

Дистанционное управление

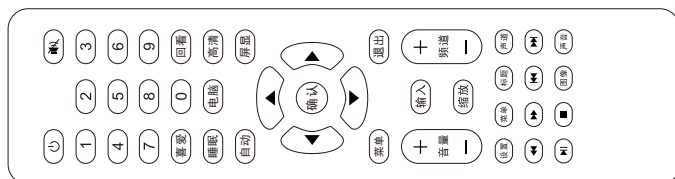

Спецификации

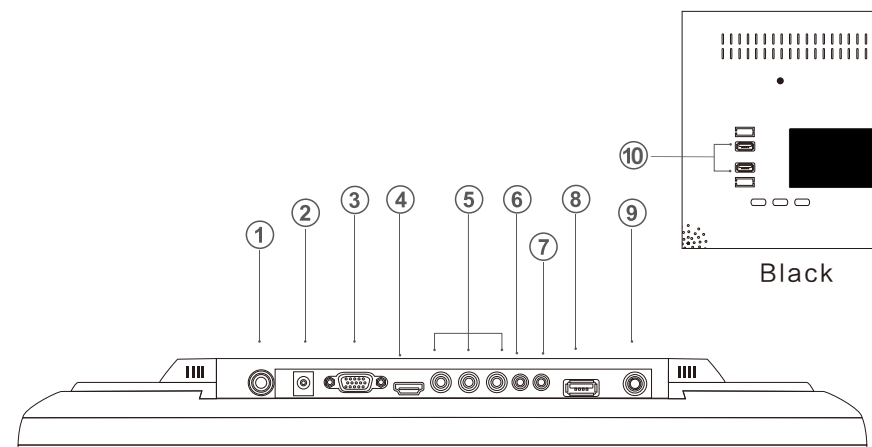


Multimedia Integrated Monitor


- ① Интраоральной камеры Кабель Входной интерфейс
- ② DC Input 12V
- ③ VGA
- ④ HDMI
- ⑤ AV
- ⑥ Аудио ввод
- ⑦ Аудио выход
- ⑧ USB Input(Для воспроизведения Vedio, музыку и изображения)
- ⑨ Антенна или CCTV Входной интерфейс
- ⑩ Выход USB

Инструкция по монтажу

Мультимедиа встроенный монитор

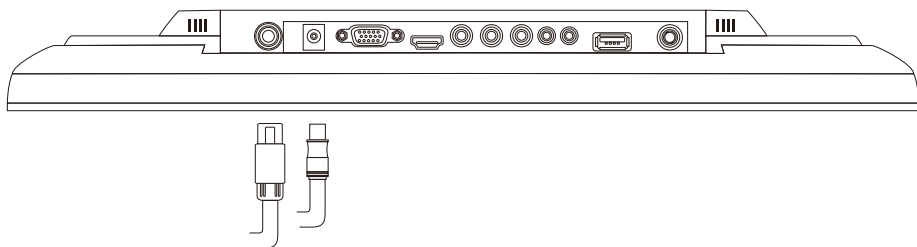


Интрооральная камера

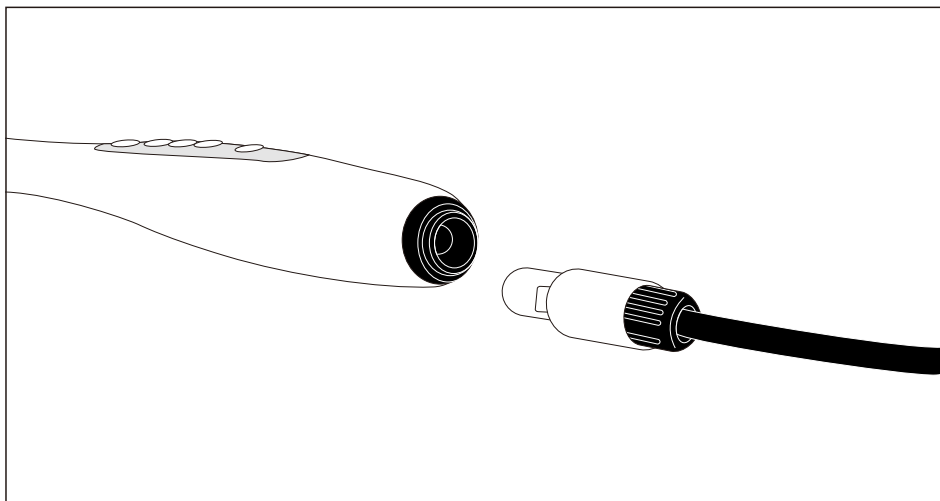


Инструкция по монтажу

Держатель интрооральной камеры

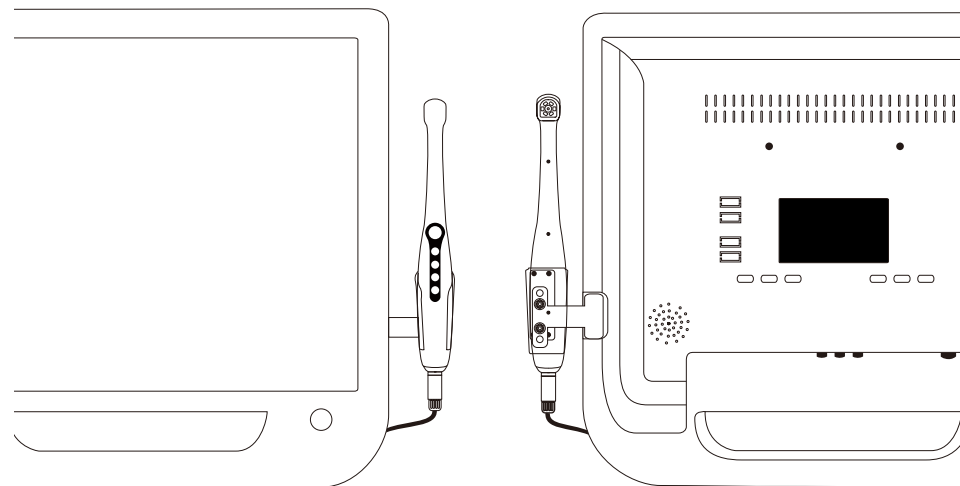


Bracket

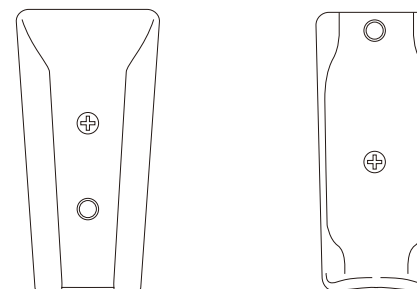


Инструкция по монтажу

Алюминиевый сплав Стенд

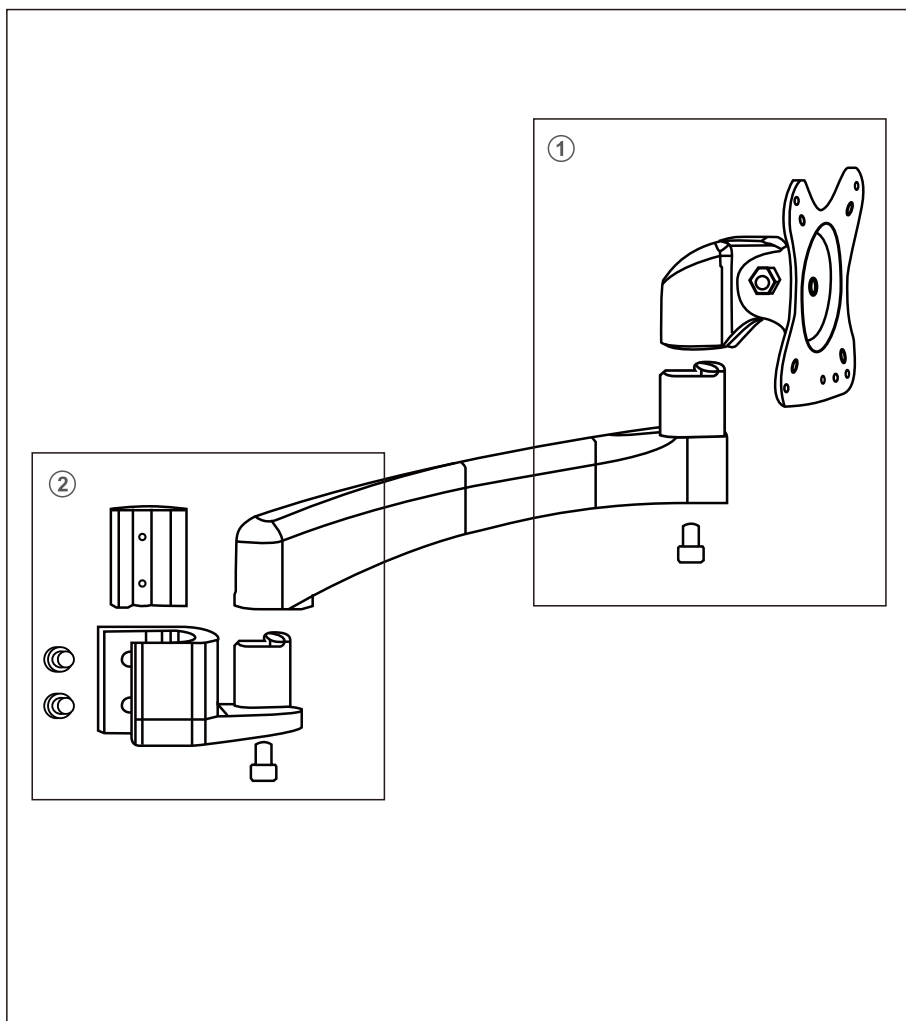


Инструкция по монтажу

Стандартный тип стенда

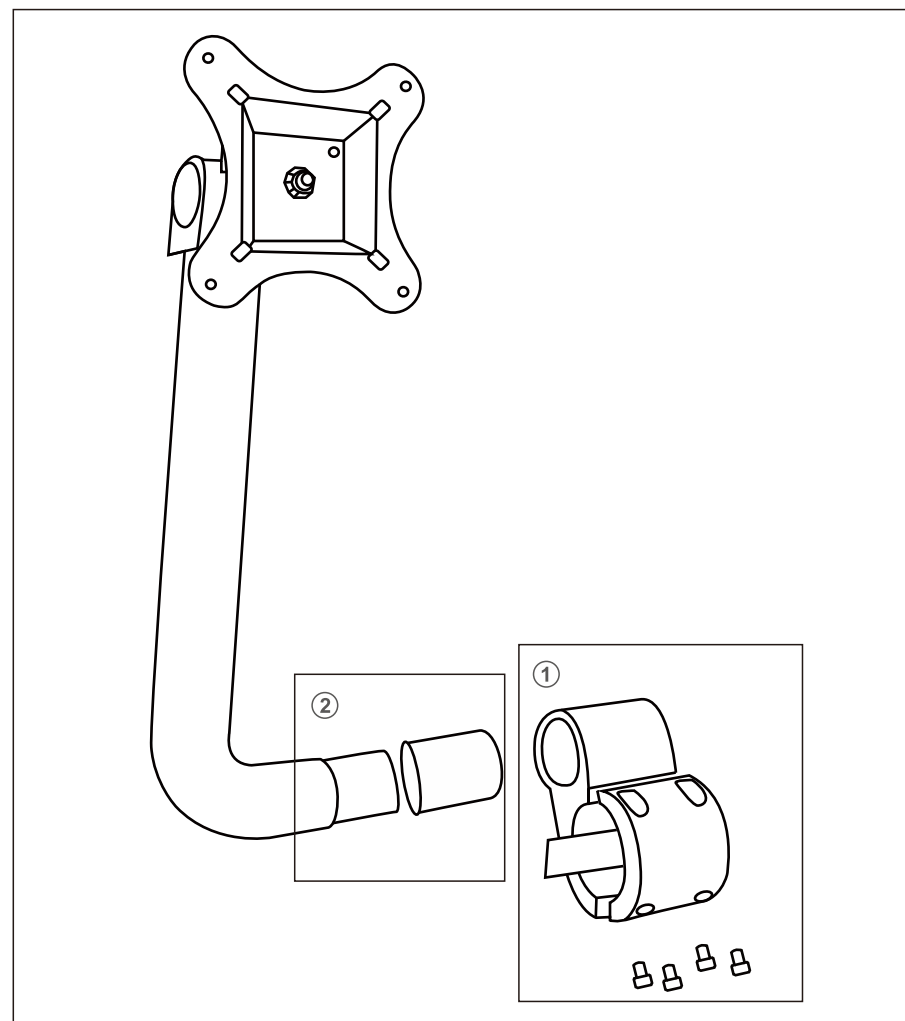


Инструкция по монтажу

Simple Тип Stand

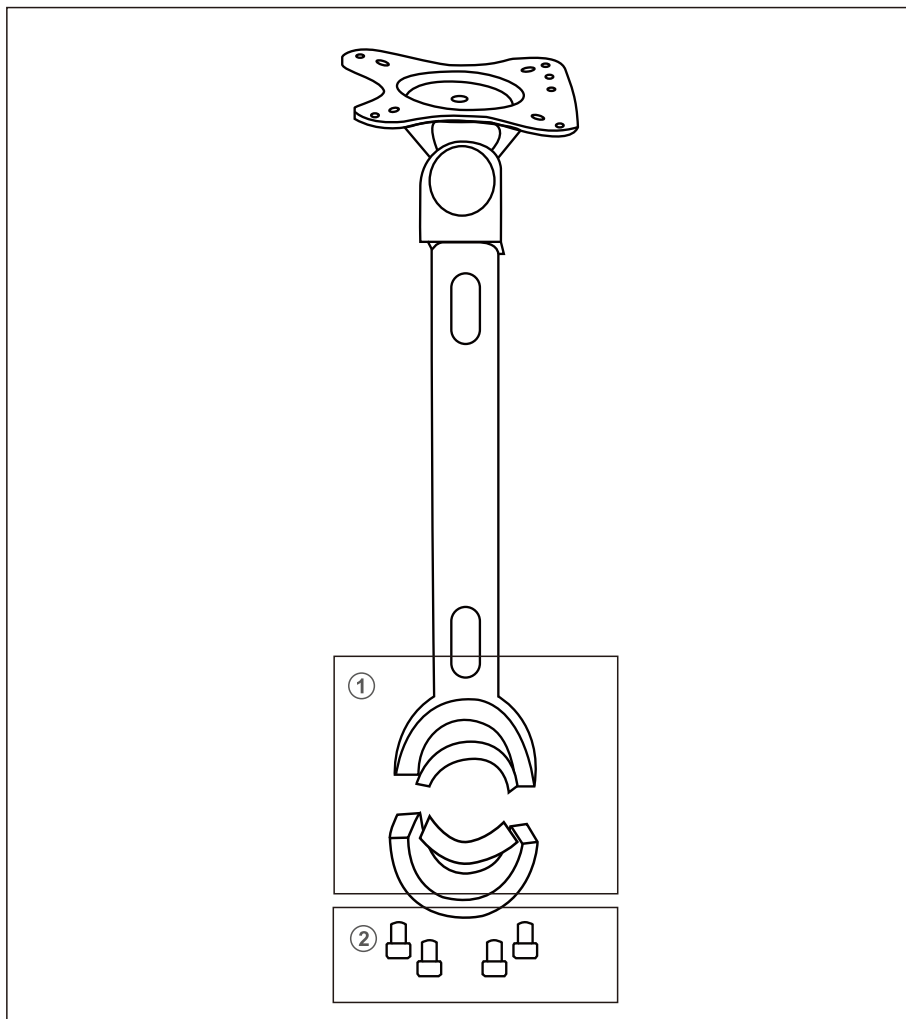

Гид пользователя


Удаленное управление

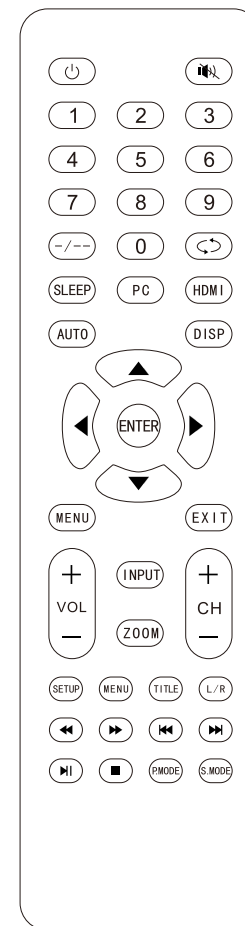


Гид половатя

Включить

Включите главный выключатель питания, а затем нажмите кнопку питания, индикатор питания станет синим.

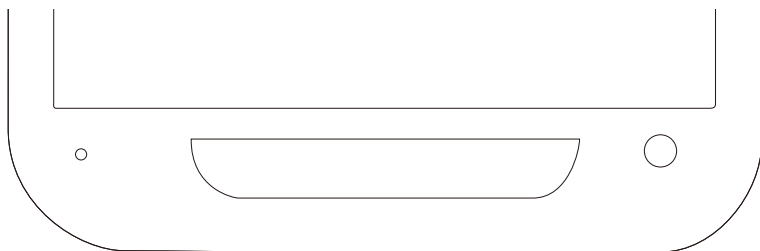

Выбор входного сигнала

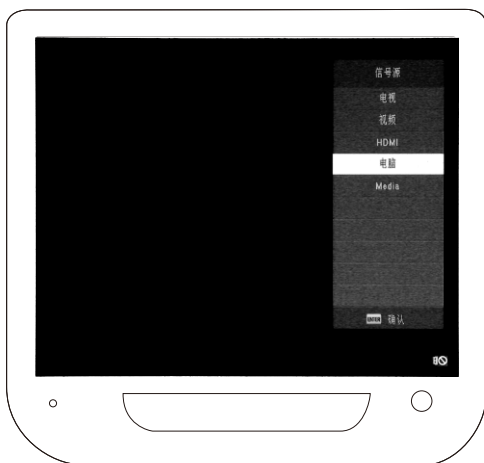

После включения питания нажмите кнопку EN ER. для отображения списка сигналов

Кнопка прокрутки для просмотра списка отключений источник входного сигнала.

Нажмите кнопку ENTER или>для выбора пункта меню источник сигнала.


(1) Когда использует интраоральную камеру...

Система, пожалуйста, выберите COMPUTER.

(2) Во время воспроизведения видео, пожалуйста, выберите режим MULTIMEDIA.

Гид половатя

Основные функции

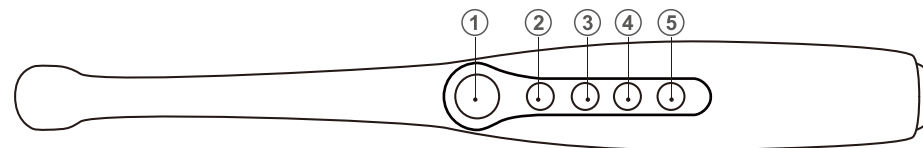

Key Function:

Key 1: ①Захватить ②Сделать фотографию ③Выключите Интраоральную Камеры (длительное нажатие) ④Сохранить изображение

Key 2: ①Переключатель Режим изображения (Single Picture Multi-Picture)

②Отмена Picture (В режиме захвата)

③Переключение в режим 16 фотографий нажмите One More для хранения.

Key 3: ①Переключение в режиме просмотра ②Играть вперед

Key 4: ①Играть назад

Key 5: ①Удаление текущего изображения (Под Режим просмотра)

②Создать QR-код (Под Режим просмотра нажмите Key 1 вместе)

Как пользоваться WIFI-приемником:

1. Мобильный телефон

(1) После съемки с помощью Intra Oral Camera перейдите в режим просмотра.

Коротко нажмите клавишу 1 и клавишу 5 на Intra Oral Camera вместе, чтобы создать



QR-код. (2) Используйте мобильный телефон для подключения сигнала WIFI с тем же именем, которое отображается на мониторе.

(Пароль WIFI: равно как и номер имени WIFI).

(3) По окончании подключения используйте любое приложение сканера для сканирования QR-кода для того, чтобы забрать фотографии осмотра.

2. Компьютер (с модулем WIFI)

(1) Установите приложение Dental Video Capture System (Стоматологическая система видеозахвата)

Проверьте USB-устройство на наличие файла модели "Wireless WIFI model using method  setup_cn", двойной щелчок  начните рассрочку.

Это приложение поддерживает Windows XP, Windows 7, Windows 8 и т.д. (2)

Подключение сигнала WIFI.

Click  чтобы подключить сигнал WIFI с тем же именем, что и монитор.

(Пароль WIFI: равно как и номер имени WIFI). (3) Как

использовать стоматологическую систему видеосъемки

Откройте Зубную систему видеозахвата, создайте информацию о клиенте.

Нажмите кнопку "Меню захвата", чтобы начать проверку в реальном времени вместе с компьютером и монитором.

Поиск и устранение неисправностей

Если у вас есть вопросы о интраоральной камере, сначала обратитесь к этому списку. Если ни один из этих советов по устранению неисправностей не подходит, обратитесь за технической поддержкой к производителю.

Проблема	Поддержка и пояснения
Монитор не включается	Проверьте работу адаптера или нет.
Качество изображения	Пожалуйста, проверьте, есть ли пятно на экране или объективе камеры. Если нет, пожалуйста, свяжитесь с агентом.
Нет даты на USB-устройстве	Проверьте, распознается ли USB-устройство на компьютере.
Черный экран или нет сигнала	Плата преобразователя частоты или печатная плата повреждены.
Изображение не может отображаться полностью или не в нужном положении.	Нажмите кнопку AUTO на пульте дистанционного управления для автоматической настройки экрана.
Нет изображения при использовании Intraoral Camera	Пожалуйста, проверьте, правильно ли он подключен.

Другая информация

Обслуживание

1. Пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством перед использованием данного изделия.
2. Пожалуйста, не открывайте интраоральную камеру без разрешения.
3. Для защиты печатной платы или изделия, пожалуйста, держите разъем сигнала подальше от острых предметов, металла или жидкости.
4. Пожалуйста, держите кабель питания или кабель интраоральной камеры подальше от напряжения.
5. Если интраоральная система не будет использоваться в течение длительного времени, выньте вилку из розетки или выключите питание.
6. Во избежание повреждения изделия используйте адаптер постоянного тока, указанный производителем. Если кабель питания или вилка сломана, прекратите использование и вовремя свяжитесь с агентом.
7. Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Избегайте воздействия чрезмерного тепла, света и воздуха в течение длительного времени. Хранить вдали от сильных кислот, легковоспламеняющихся веществ и взрывчатых веществ. Регулярно очищайте поверхность интраоральной камеры.

Политика гарантированности

Уважаемый клиент:

Спасибо за использование продукта компании Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co. LTD. Для получения более качественного гарантийного обслуживания внимательно прочитайте следующие пункты и храните данную гарантийную карточку надлежащим образом. Этот гарантийный талон следует предоставлять по каждой гарантийной рекламации.

Deal Name		Contact	
Deal Add		Tel	
Customer Name		Contact	
User Add		Tel	
Product Name		Model	
Purchase Date		Part No	
Maintenance Record	Date	Defect or Maintenance Record	

Remark:

1. Пожалуйста, храните внимательно этот гарантийный талон, он будет использоваться для гарантийного обслуживания.
2. _____ Год(ы) гарантии на приобретенное изделие.
3. Следующее исключено из данной гарантии или необходимо взимать плату за материалы или услуги.
 - 1) Гарантийный талон не может быть обеспечена.
 - 2) Дефект или повреждения, вызванные неправильным использованием.
 - 3) Искусственные и ненормальное внешнее воздействие.
 - 4) Дефект или повреждение, вызванное человеком без разрешения производителя.
 - 5) Дефект или повреждения, вызванные стихийными бедствиями или форс-мажорными обстоятельствами.
 - 6) Другое искусственное повреждение.
4. Все права сохранены Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co. LTD

