



Внимание

Фирма HLW Dentalinstruments постоянно стремится к улучшению качества, дизайна и конфигурации своих продуктов. Поэтому оставляет за собой право на изменение производственной программы и обозначения номенклатурных позиций без предварительного уведомления.

С выпуском настоящего каталога все предыдущие издания становятся недействительными.

HLW DENTAL INSTRUMENTS (ХЛВ ДЕНТАЛ ИНСТРУМЕНТС) – это немецкая компания, чьи мощности сосредоточены на производстве стоматологических инструментов. Основной целью компании является создание высококачественного продукта, доступного широкому кругу потребителей.

Основные достоинства:



Инструменты HLW изготавливаются из высокопрочной коррозионно-устойчивой стали, отвечающей современным нормам медицинских инструментов (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003);



HLW Dental Instruments предоставляет гарантию на свои инструменты;



Большая часть щипцов торговой марки HLW имеет поперечно-продольные насечки на рабочей части, что позволяет надежно ухватить удаляемый зуб. А тефлоновая вставка на шарнирном соединении обеспечивает плавный ход;



Облегченные по весу ручки благодаря полой конструкции позволяют снизить нагрузку на руки. А эргономичная форма инструментов снижает риск развития кистевого туннельного синдрома;



Зубчатая поверхность ножниц имеет самозатачивающийся эффект, что увеличивает срок службы инструмента в несколько раз. А новая серия ножниц СуперКат позволяет сделать ультра-тонкий разрез, минимально повреждая мягкие ткани;



Инструменты HLW сделаны с учетом особенностей анатомии человека. Рабочие части инструментов снижают риск возникновения дополнительной травмы;



Широкий ассортимент представленной продукции, богатство форм и вариаций удовлетворит потребности самых взыскательных докторов;

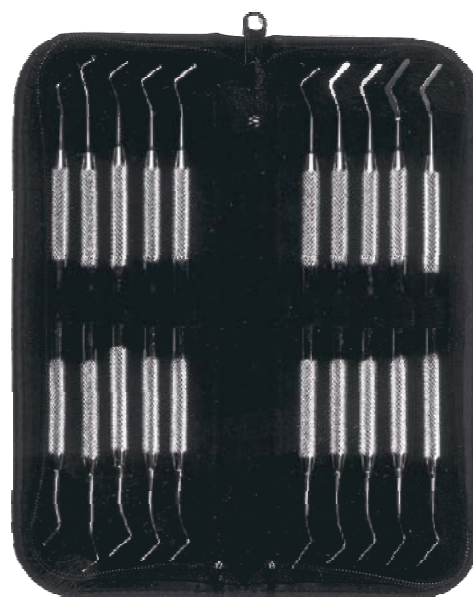


Наши компетентные специалисты помогут вам составить заказ, проконсультируют по возникшим вопросам, определят оптимальный способ доставки. А также организуют выездную презентацию инструментов у вас в клинике.

Содержимое кейсов в стоимость не входит



Размер: 24x19 см
Ref. 10-12



Размер: 16x19 см
Ref. 10-13



Размер: 50x40 см
Ref. 002622*

Важная информация по выбору щипцов:


На следующих страницах Вы можете найти информацию по щипцам для удаления с ручками Стандарт и ручками Анатомическая.

Кроме того, каждые щипцы для удаления имеют два номера Ref., которые означают, что Вы можете выбирать между Ref. 11 Стандартная и Ref. 12 Анатомическая.

Если Вы хотите Стандартную ручку, то


Стандартная

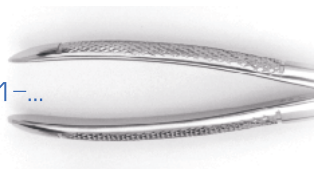Ref. 11–...



или если Вы хотите Анатомическую ручку, то

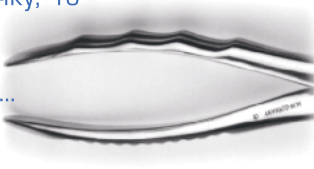Анатомическая Ref. 12–...



Все эти щипцы имеют соединительный элемент, покрытый тефлоном, внутренняя часть щечек имеет зубчатую поверхность.

Внутренняя рабочая поверхность щипцов с поперечными насечками



Important instruction for the order of forceps:

Please find our Extracting-forceps with grain handles (standard) and fingerform handle (anatomic) on the following pages.

Furthermore, we have marked our Extracting-forceps with two article numbers, which means you can choose between grain handle Ref.11–...(standard) and fingerform handle Ref.12–... (anatomic) of each forceps.


All extracting forceps are cross serrated in inside of jaws.



if you want order grain handle (Standard)

Standard

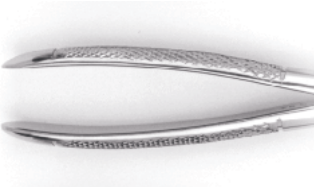
Ref. 11–...



or if you want order fingerform (anatomic)

Anatomic

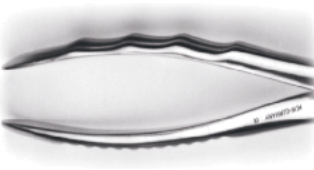Ref. 12–...



All our forceps are set up with teflon disks between the joint and they are serrated

резцы / клыки

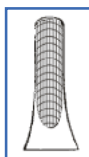
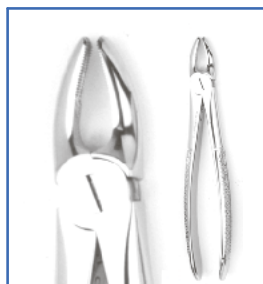


Fig. 1

ручка:

Стандартная Ref. 11-1
Анатомическая Ref. 12-1

резцы / клыки

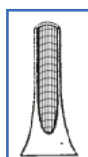
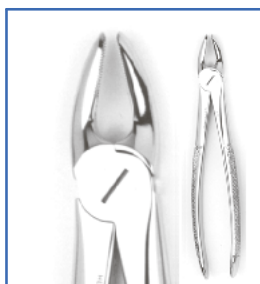


Fig. 2

ручка:

Стандартная Ref. 11-2
Анатомическая Ref. 12-2

премоляры

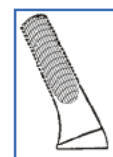


Fig. 7

ручка:

Стандартная Ref. 11-7
Анатомическая Ref. 12-7

моляры правые

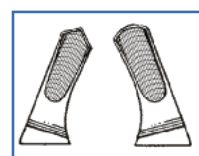


Fig. 17

ручка:

Стандартная Ref. 11-17
Анатомическая Ref. 12-17

моляры левые

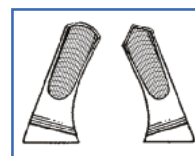


Fig. 18

ручка:

Стандартная Ref. 11-18
Анатомическая Ref. 12-18

корневые

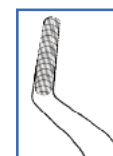
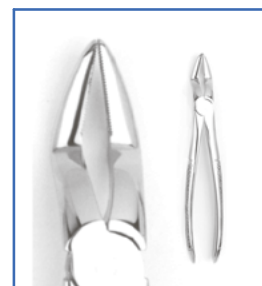


Fig. 51

ручка:

Стандартная Ref. 11-51
Анатомическая Ref. 12-51

корневые

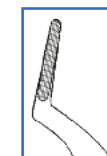


Fig. 51A

ручка:

Стандартная Ref. 11-51A
Анатомическая Ref. 12-51A

для третьих моляров

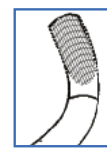
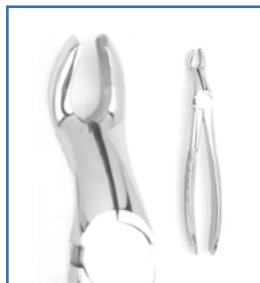


Fig. 67A

ручка:

Стандартная Ref. 11-67A
Анатомическая Ref. 12-67A

корневые

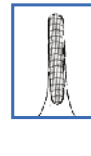


Fig. 29

ручка:

Стандартная Ref. 11-29
Анатомическая Ref. 12-29

корневые



Fig. 29N

ручка:

Стандартная Ref. 11-29N
Анатомическая Ref. 12-29N

корневые

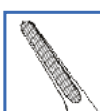


Fig. 30

ручка:

Стандартная Ref. 11-30
Анатомическая Ref. 12-30

моляры правые

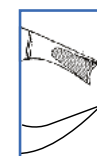


Fig. 89

ручка:

Стандартная Ref. 11-89
Анатомическая Ref. 12-89

моляры левые

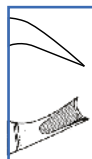


Fig. 90

ручка:

Стандартная Ref. 11-90
Анатомическая Ref. 12-90

корневые



Fig. 501

ручка:

Стандартная Ref. 11-501
Анатомическая Ref. 12-501

корневые



Fig. 51K

ручка:

Стандартная Ref. 11-51K
Анатомическая Ref. 12-51K

корневые

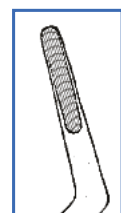


Fig. 51M

ручка:

Стандартная Ref. 11-51M
Анатомическая Ref. 12-51M

верхние универсальные



Fig. 62

ручка

Стандартная Ref. 11-62
Анатомическая Ref. 12-62

для верхних и нижних
фрагментов

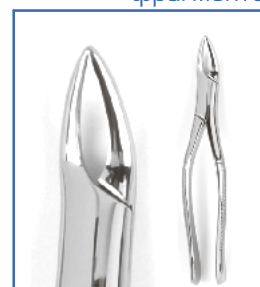


Fig. 69

ручка

Стандартная Ref. 11-69
Анатомическая Ref. 12-69

верхние корневые



Fig. 151

ручка

Стандартная Ref. 11-151
Анатомическая Ref. 12-151

верхние корневые

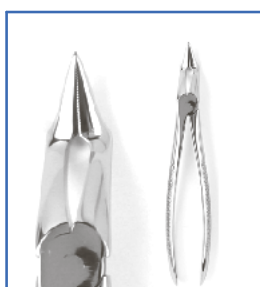


Fig. 152

ручка

Стандартная Ref. 11-152
Анатомическая Ref. 12-152

верхние корневые
ультратонкие



Fig. 49

ручка

Стандартная Ref. 11-49
Анатомическая Ref. 12-49

премоляры



Fig. 13

ручка:

Стандартная Ref. 11-13
Анатомическая Ref. 12-13

корневые



Fig. 33

ручка:

Стандартная Ref. 11-33
Анатомическая Ref. 12-33

моляры



Fig. 22

ручка:

Стандартная Ref. 11-22
Анатомическая Ref. 12-22

моляры



Fig. 73

ручка:

Стандартная Ref. 11-73
Анатомическая Ref. 12-73

корневые



Fig. 74

ручка:

Стандартная Ref. 11-74
Анатомическая Ref. 12-74

корневые

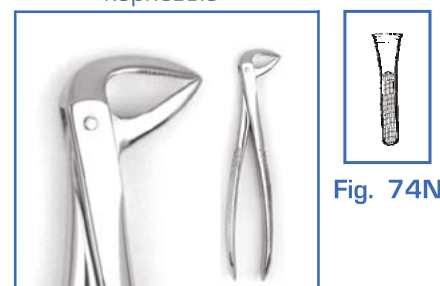


Fig. 74N

ручка:

Стандартная Ref. 11-74N
Анатомическая Ref. 12-74N

премоляры



Fig. 75

ручка:

Стандартная Ref. 11-75
Анатомическая Ref. 12-75

для третьих моляров



Fig. 79

ручка:

Стандартная Ref. 11-79
Анатомическая Ref. 12-79

резцы / клыки



Fig. 4

ручка:

Стандартная Ref. 11-4
Анатомическая Ref. 12-4

корневые

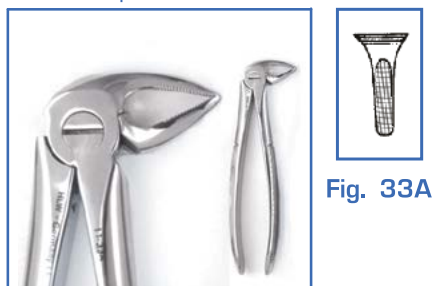


Fig. 33A

ручка:

Стандартная Ref. 11-33A
Анатомическая Ref. 12-33A

корневые



Fig. 33M

ручка:

Стандартная Ref. 11-33M
Анатомическая Ref. 12-33M

моляры правые

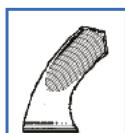


Fig. 23

ручка:

Стандартная Ref. 11-23
Анатомическая Ref. 12-23

моляры левые



Fig. 24

ручка:

Стандартная Ref. 11-24
Анатомическая Ref. 12-24

для корневых фрагментов

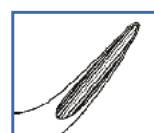
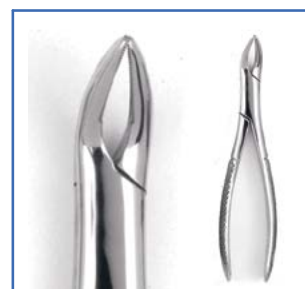


Fig. 502

ручка:

Стандартная Ref. 11-502
Анатомическая Ref. 12-502

моляры

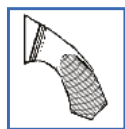


Fig. 21

ручка:

Стандартная Ref. 11-21
Анатомическая Ref. 12-21

премоляры



Fig. 8

ручка:

Стандартная Ref. 11-8
Анатомическая Ref. 12-8

моляры

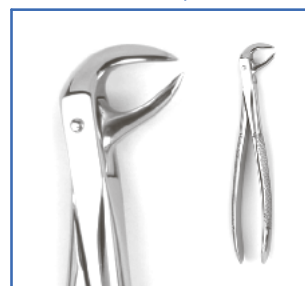


Fig. 86A

ручка:

Стандартная Ref. 11-86A
Анатомическая Ref. 12-86A

моляры



Fig. 86C

ручка:

Стандартная Ref. 11-86C
Анатомическая Ref. 12-86C

нижние корневые

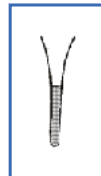
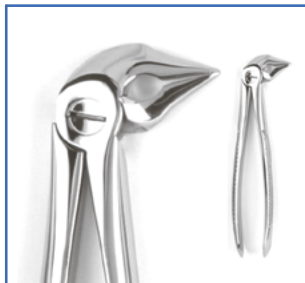


Fig. 136

ручка:

Стандартная Ref. 11-136
Анатомическая Ref. 12-136

нижние корневые

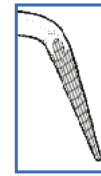


Fig. 145

ручка:

Стандартная Ref. 11-145
Анатомическая Ref. 12-145

нижние корневые



Fig. 45

ручка:

Стандартная Ref. 11-45
Анатомическая Ref. 12-45

нижние корневые

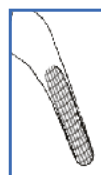


Fig. 31

ручка:

Стандартная Ref. 11-31
Анатомическая Ref. 12-31

корневые ультратонкие



Fig. 46

ручка:

Стандартная Ref. 11-46
Анатомическая Ref. 12-46

для 1-3 нижних моляров
левые

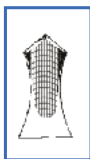


Fig. 122L

ручка:

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-122L
Ref. 12-122L

для 1-3 нижних моляров
правые



Fig. 122R

ручка:

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-122R
Ref. 12-122R

верхние корневые

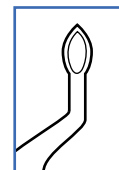


Fig. 153

ручка:

Стандартная Ref. 11-153

нижние моляры левые



Fig. 186L

ручка:

Анатомическая

Ref. 12-186L

нижние моляры правые



Fig. 186R

ручка:

Анатомическая

Ref. 12-186R

нижние корневые

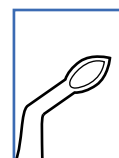


Fig. 146

ручка:

Стандартная

Ref. 11-146

верхние корневые

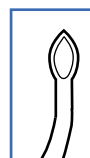
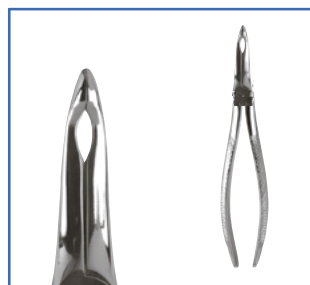


Fig. 149

ручка:

Стандартная

Ref. 11-149

нижние для третьих моляров
для среза коронковой части зуба

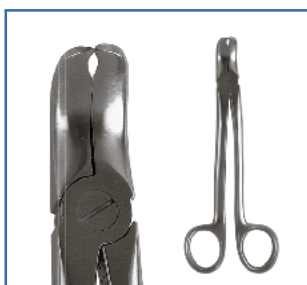


Fig. 120

ручка:

Стандартная

Ref. 12-120

Щипцы для удаления / с глубоким захватом

верхние резцы / клыки

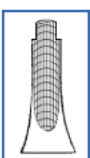
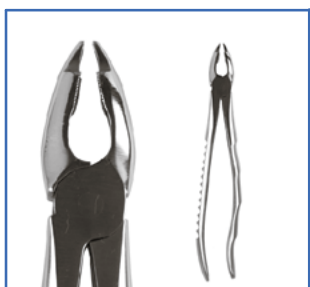


Fig. 34A

ручка:

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-34A
Ref. 12-34A

верхние корневые

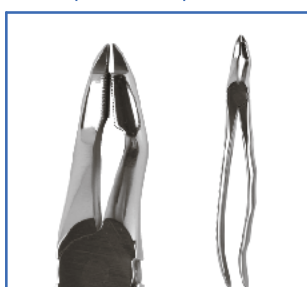


Fig. 331

ручка:

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-331
Ref. 12-331

верхние премоляры

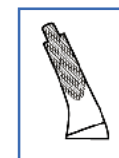


Fig. 35A

ручка:

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-35A
Ref. 12-35A

нижние премоляры

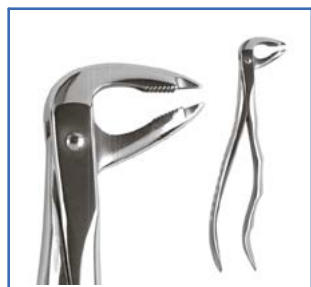


Fig. 336

ручка

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-336
Ref. 12-336

нижние премоляры

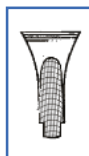
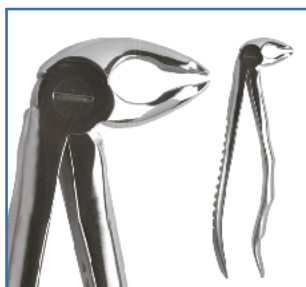


Fig. 36A

ручка

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-36A
Ref. 12-36A

верхние премоляры

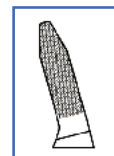


Fig. 7N

ручка

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-7N
Ref. 12-7N

верхние для третьих моляров

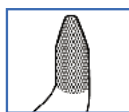
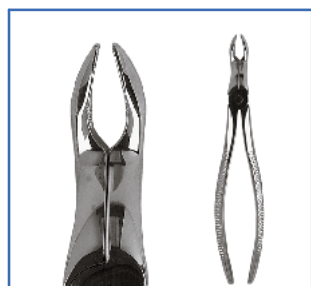


Fig. 67N

ручка

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-67N
Ref. 12-67N

нижние для третьих моляров



Fig. 79N

ручка

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-79N
Ref. 12-79N

Щипцы для удаления / детские / верхние

верхние резцы

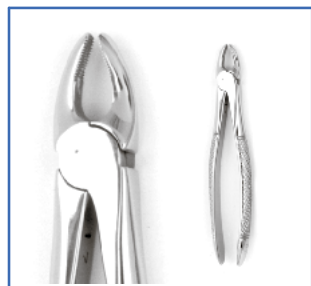


Fig. 37

ручка:

Стандартная Ref. 11-37

верхние корневые

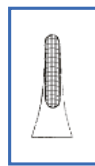
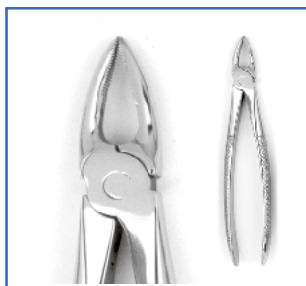


Fig. 29S

ручка:

Стандартная Ref. 11-29S

верхние корневые

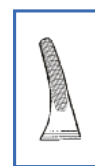


Fig. 30S

ручка:

Стандартная Ref. 11-30S

верхние моляры



Fig. 39

ручка:

Стандартная Ref. 11-39

верхние моляры

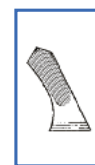


Fig. 39A

ручка:

Стандартная Ref. 11-39A

верхние моляры правые



Fig. 39R

ручка:

Стандартная Ref. 11-39R

верхние моляры левые

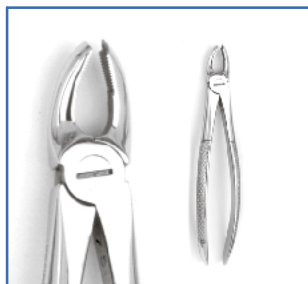


Fig. 39L

ручка

Стандартная

Ref. 11-39L

верхние корневые

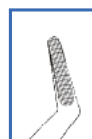
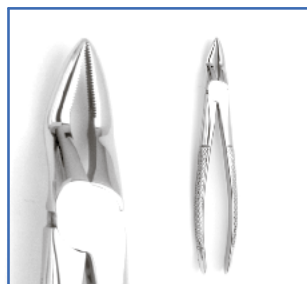


Fig. 51S

ручка

Стандартная

Ref. 11-51S

Щипцы для удаления / детские / нижние

корневые



Fig. 33S

ручка

Стандартная

Ref. 11-33S

нижние премоляры



Fig. 13S

ручка

Стандартная

Ref. 11-13S

нижние моляры

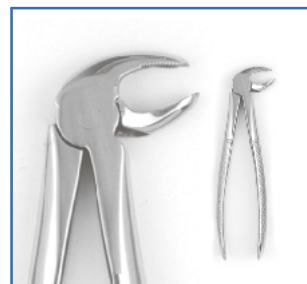


Fig. 22S

ручка

Стандартная

Ref. 11-22S

нижние резцы / клыки

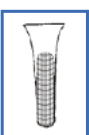
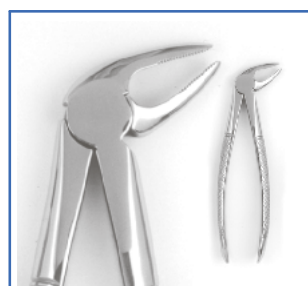


Fig. 38

ручка

Стандартная

Ref. 11-38

нижние моляры

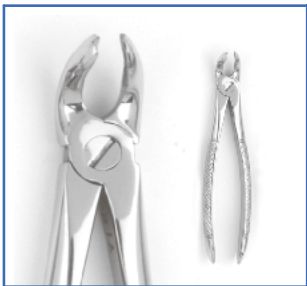


Fig. 40

ручка

Стандартная

Ref. 11-40

верхние корневые

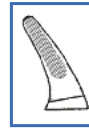
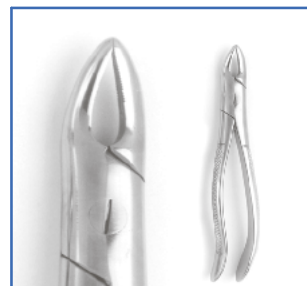


Fig. 76S


ручка

Стандартная

Ref. 11-76S

Благодаря небольшому размеру легко скрыть от маленьких пациентов в ладони

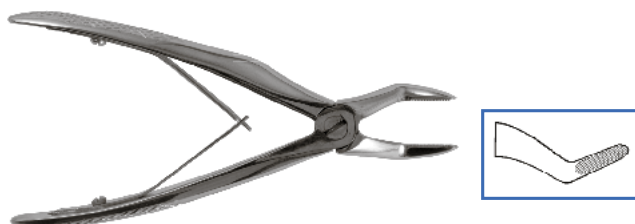Fig. 51SB
(Стандартная)



ручка
верхние
корневые
Стандартная
Анатомическая

Артикул
Order-No.

Ref. 11-51SB
Ref. 12-51SB



ручка
нижние
корневые
Fig. 7 (Стандартная)
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-7B
Ref. 12-7B

Fig. 137
(Стандартная)



ручка
верхние
резцы
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-137B
Ref. 12-137B



ручка
нижние
моляры
Fig. 6 (Стандарт)
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-6B
Ref. 12-6B

Fig. 139
(Стандартная)



ручка
верхние
премоляры
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-139B
Ref. 12-139B



ручка
нижние
резцы
Fig. 5 (Стандартная)
Стандартная
Анатомическая


Ref. 11-5B
Ref. 12-5B

Fig. 3
(Стандартная)



ручка
верхние
моляры
Стандартная
Анатомическая

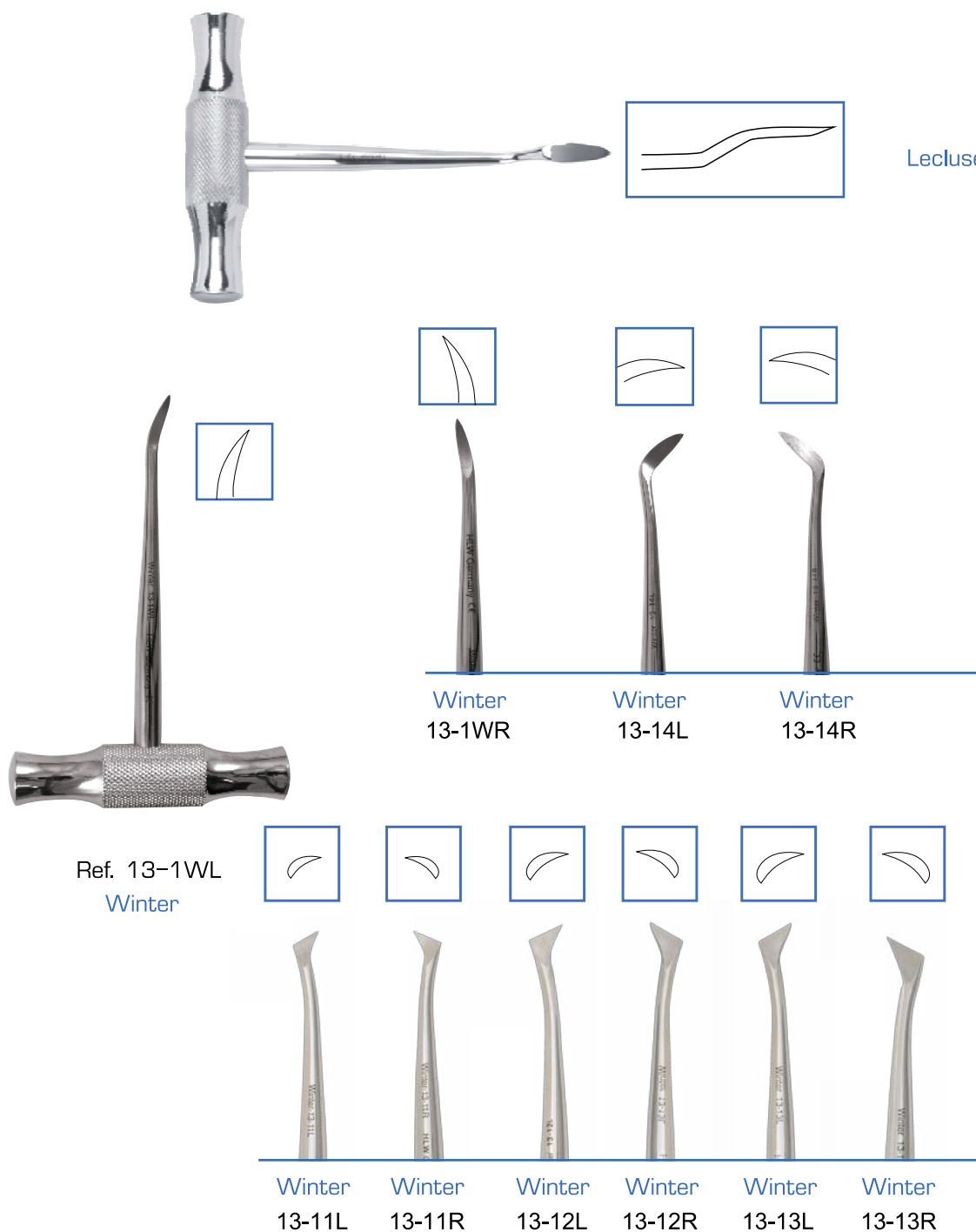Ref. 11-3B
Ref. 12-3B



Lecluse

Артикул
Order-No.





Ref. 13-1

Krallenheber










Ref. 13-10L


















Krallenheber

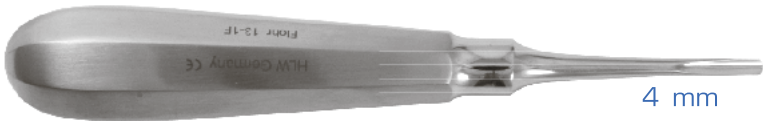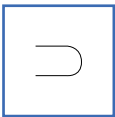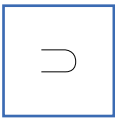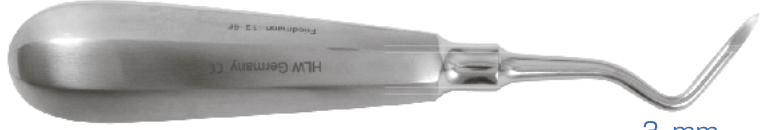Ref. 13-10R

	4 mm		Flohr	Артикул Order-No. Ref. 13-1F
			Flohr	Ref. 13-2F
			Flohr	Ref. 13-3F
	3 mm		Friedmann	Ref. 13-4F
	3 mm		Friedmann	Ref. 13-5F
	3 mm		Friedmann	Ref. 13-6F
	2,5 mm		Heidbrink	Ref. 13-7H
	2,5 mm		Heidbrink	Ref. 13-8H
			Heidbrink	Ref. 13-9H

		Cryer	Артикул Order-No. Ref. 13-27S
		Cryer	Ref. 13-28S
		Cryer	Ref. 13-27
		Cryer	Ref. 13-28
		Cryer	Ref. 13-31
		Cryer	Ref. 13-32
		Pott	Ref. 13-1P
		Pott	Ref. 13-2P

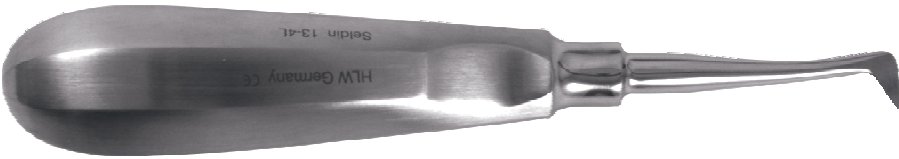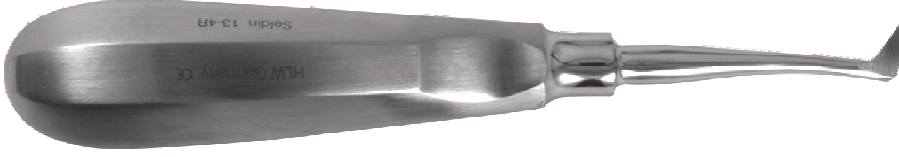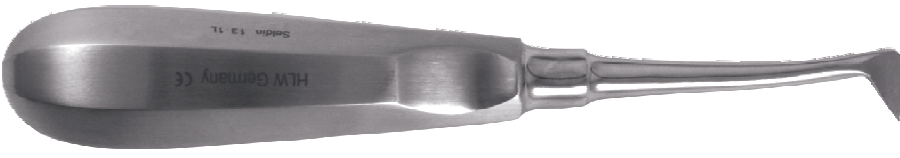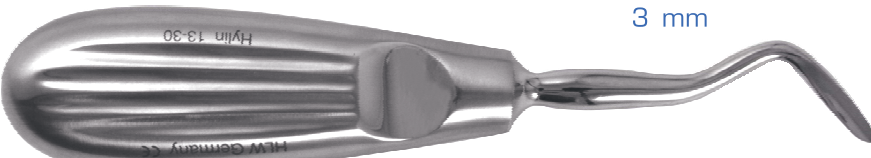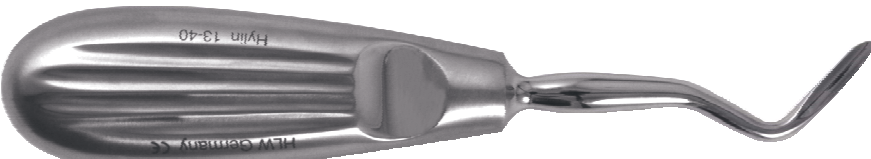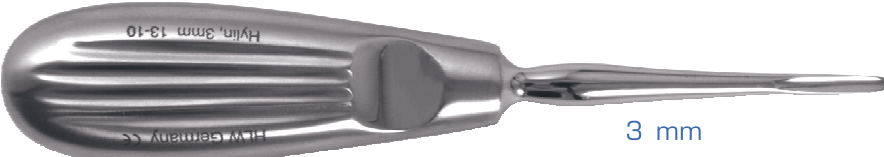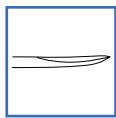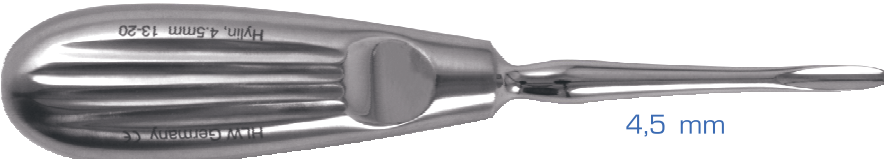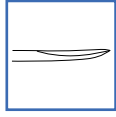
			Артикул Order-No.
		Seldin	Ref. 13-4L
		Seldin	Ref. 13-4R
		Seldin	Ref. 13-1L
		Seldin	Ref. 13-1R
		Hyllin	Ref. 13-30
		Hyllin	Ref. 13-40
		Hyllin	Ref. 13-10
		Hyllin	Ref. 13-20

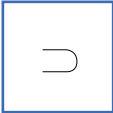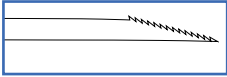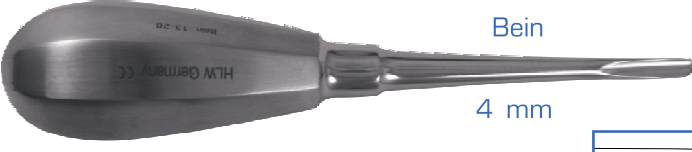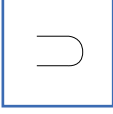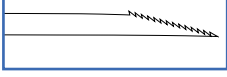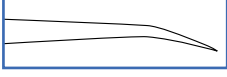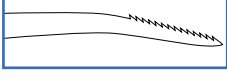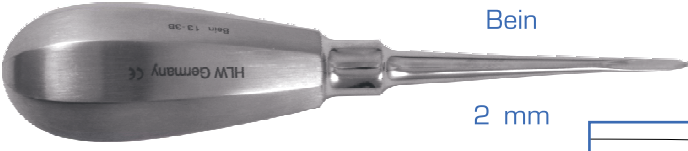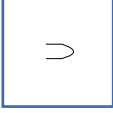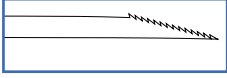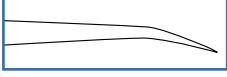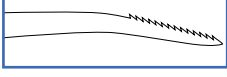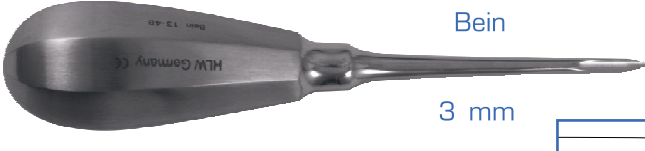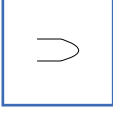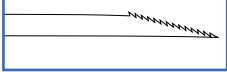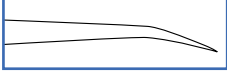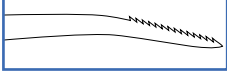 Bein 3 mm		прямой / straight	Артикул Order-No. Ref. 13-1B
		зубчатый / serrated	Ref. 13-1BZ
		изогнутый / curved	Ref. 13-1BC
		зубчатый / serrated	Ref. 13-1BCZ
 Bein 4 mm		прямой / straight	Ref. 13-2B
		зубчатый / serrated	Ref. 13-2BZ
		изогнутый / curved	Ref. 13-2BC
		зубчатый / serrated	Ref. 13-2BCZ
 Bein 2 mm		прямой / straight	Ref. 13-3B
		зубчатый / serrated	Ref. 13-3BZ
		изогнутый / curved	Ref. 13-3BC
		зубчатый / serrated	Ref. 13-3BCZ
 Bein 3 mm		прямой / straight	Ref. 13-4B
		зубчатый / serrated	Ref. 13-4BZ
		изогнутый / curved	Ref. 13-4BC
		зубчатый / serrated	Ref. 13-4BCZ




Bein

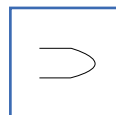4 mm



прямой / straight

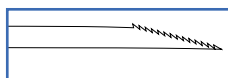Ref. 13-5B




зубчатый / serrated

Ref. 13-5BZ




изогнутый / curved

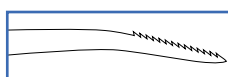Ref. 13-5BC




зубчатый / serrated

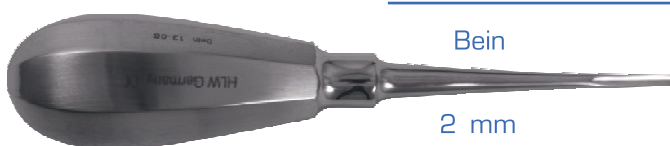Ref. 13-5BCZ




Bein

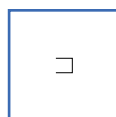2 mm



прямой / straight

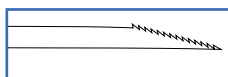Ref. 13-6B




зубчатый / serrated

Ref. 13-6BZ




изогнутый / curved

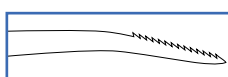Ref. 13-6BC




зубчатый / serrated

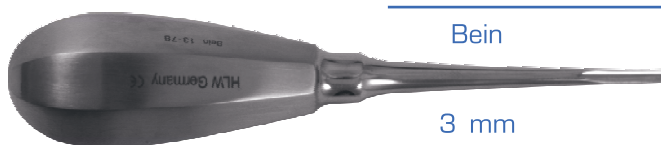Ref. 13-6BCZ




Bein

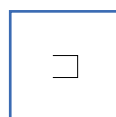3 mm



прямой / straight

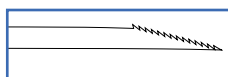Ref. 13-7B




зубчатый / serrated

Ref. 13-7BZ



изогнутый / curved

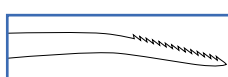Ref. 13-7BC




зубчатый / serrated

Ref. 13-7BCZ




Bein

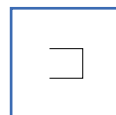4 mm



прямой / straight

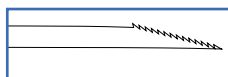Ref. 13-8B




зубчатый / serrated

Ref. 13-8BZ




изогнутый / curved

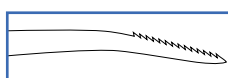Ref. 13-8BC



зубчатый / serrated

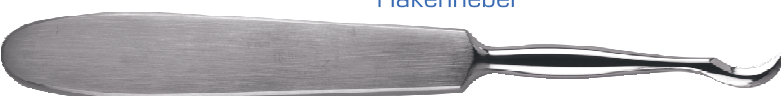Ref. 13-8BCZ




Hakenheber

Ref. 13-35



Байонет дистальный

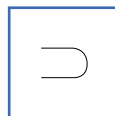4 mm



Артикул
Order-No.

Ref. 13-81



Байонет мезиальный

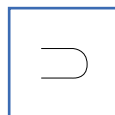4 mm




Ref. 13-82




Байонет

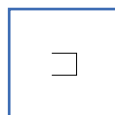3 mm




Bein

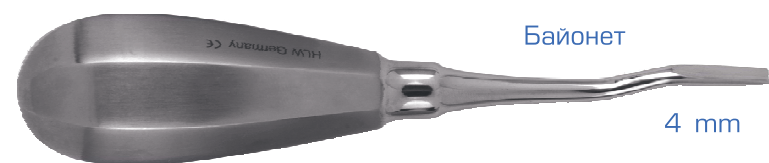Ref. 13-9B




Байонет

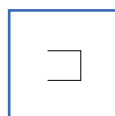4 mm



Bein

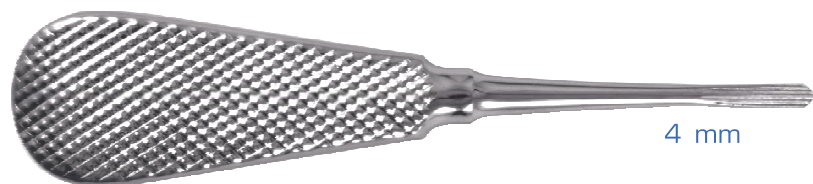
Ref. 13-10B



4 mm

Coleman

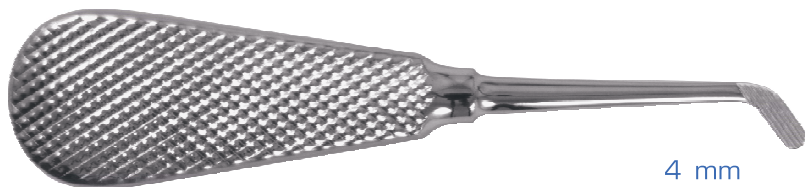
Ref. 13-100



4 mm

London Hospital

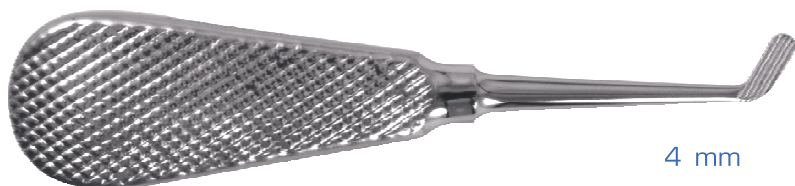
Ref. 13-101




4 mm

London Hospital

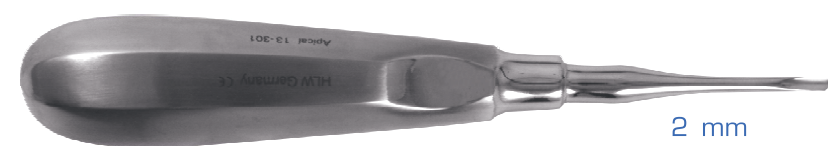Ref. 13-102




2 mm

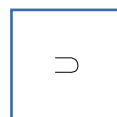


Apical

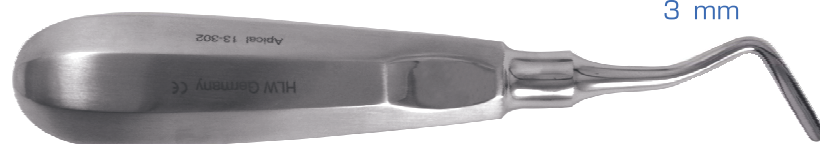Артикул
Order-No.
Ref. 13-301




3 mm

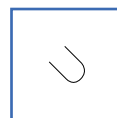


Apical

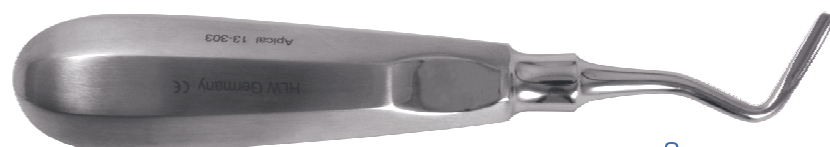Ref. 13-302




3 mm

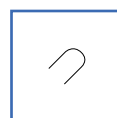


Apical

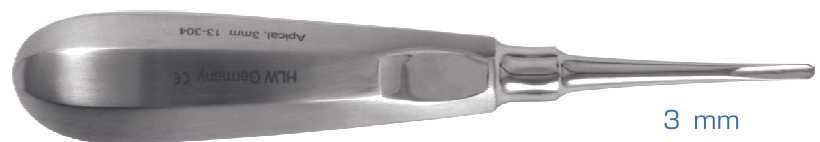Ref. 13-303




3 mm

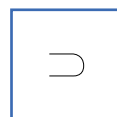


Apical

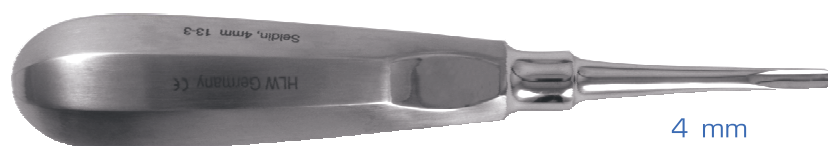Ref. 13-304



4 mm

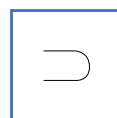


Seldin

Ref. 13-3




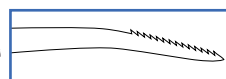4,5 mm



Cryer

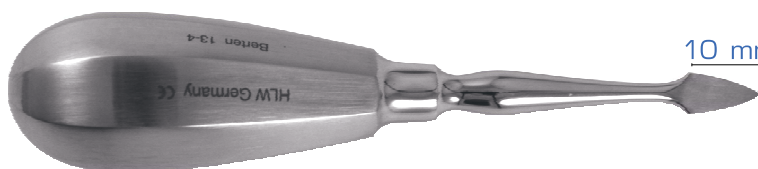Ref. 13-3A



10 mm

5 mm

Berten

Ref. 13-4



3 mm



Kopp

Ref. 13-1K





3 mm



Kopp

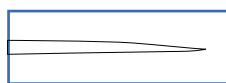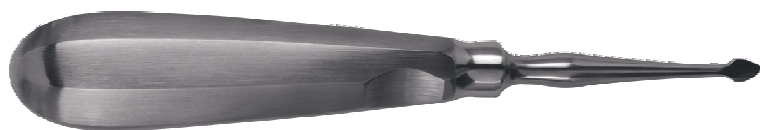
Ref. 13-2K



прямой / straight

Артикул
Order-No.

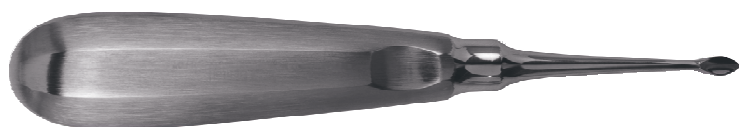Ref. 13-70




изогнутый / curved

Ref. 13-71




байонет

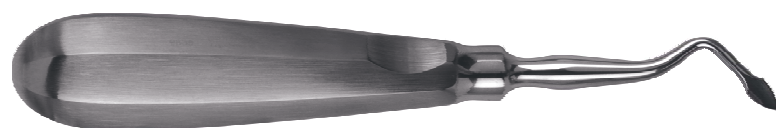Ref. 13-72



левый / left

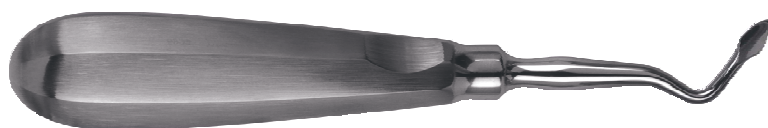Ref. 13-73L



правый / right

Ref. 13-73R

СЕРИЯ МИНИ ЭЛЕВАТОРОВ ДЛЯ АТРАВМАТИЧНОГО УДАЛЕНИЯ



Прямой 2,5мм фронтальный, верхняя челюсть

Ref. 13-1MT



Ref. 13-3MT Прямой 3,0 мм, фронтальный



Ref. 13-5MT Прямой 4,5 мм, фронтальный



Ref. 13-2MT Изогнутый 2,5 мм



Ref. 13-4MT Изогнутый 3,5 мм



Ref. 13-6MT Изогнутый 4,0 мм



Ref. 13-14MT Изогнутый 2,5 мм



Ref. 13-11MT Прямой 3,0 мм, фронтальный



Ref. 13-10RMT Изогнутый правый 3,0 мм



Ref. 13-10LMT Изогнутый, левый 3,0 мм, мезиальный



Ref. 13-8MT Изогнутый 3,0 мм, мезиальный



Ref. 13-9MT Прямой 3,0 мм, фронтальный



Ref. 13-15MT Изогнутый 3,5 мм, дистальный



Ref. 13-17MT Изогнутый 4,5 мм, дистальный



Ref. 13-16MT Прямой 3,0 мм, фронтальный




Ref. 13-18MT Изогнутый 3,0 мм, мезиальный

СЕРИЯ ЭЛЕВАТОРОВ **SYNDESMOTONE** ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРИОДОНТАЛЬНОЙ СВЯЗКИ


Ref. 13-35












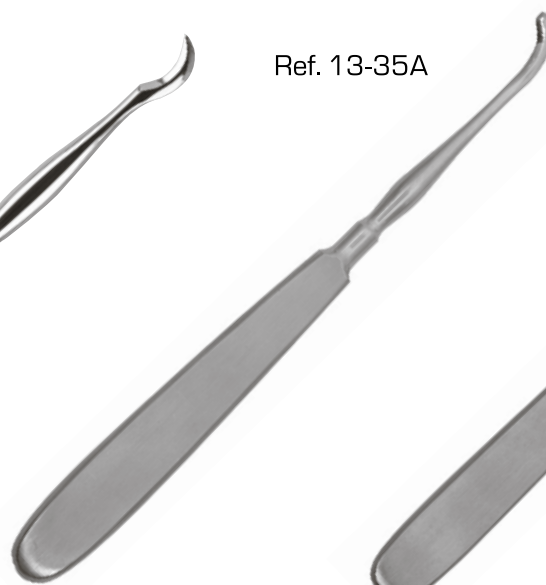Ref. 13-35A












Ref. 13-35B

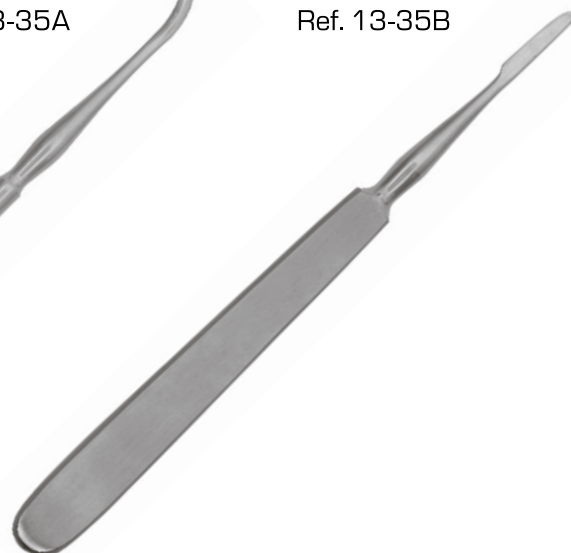

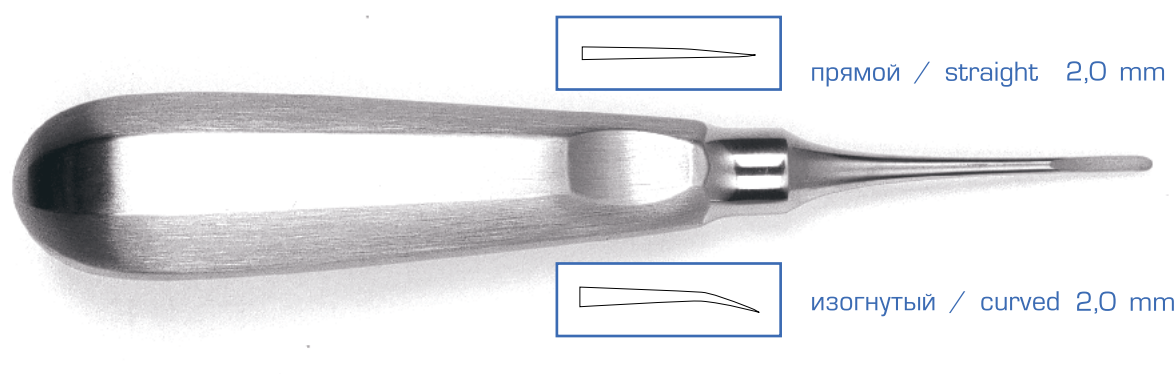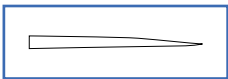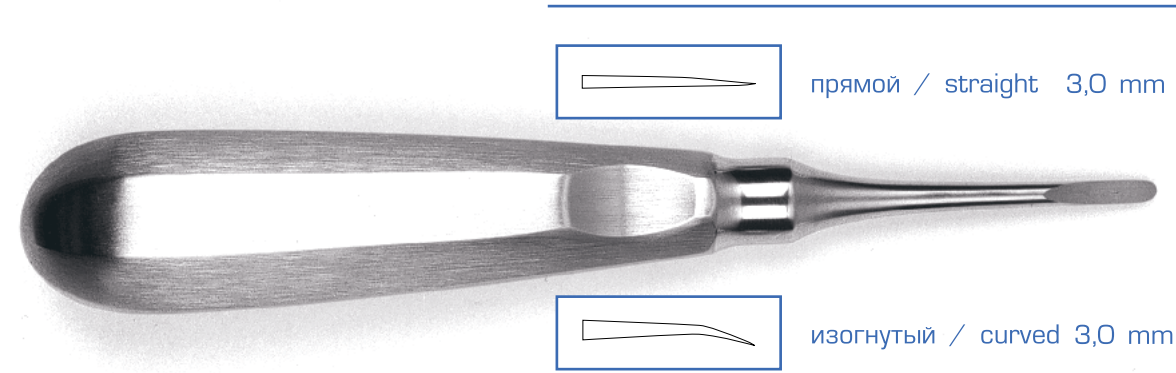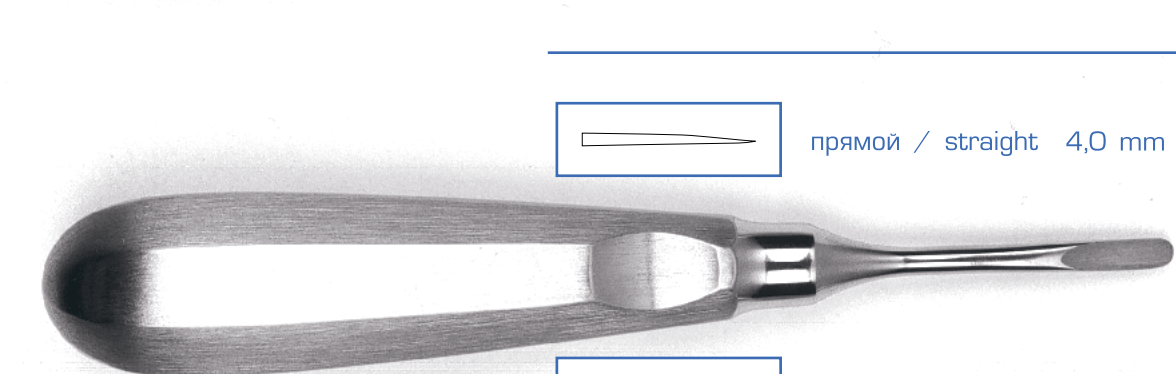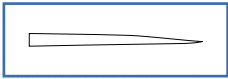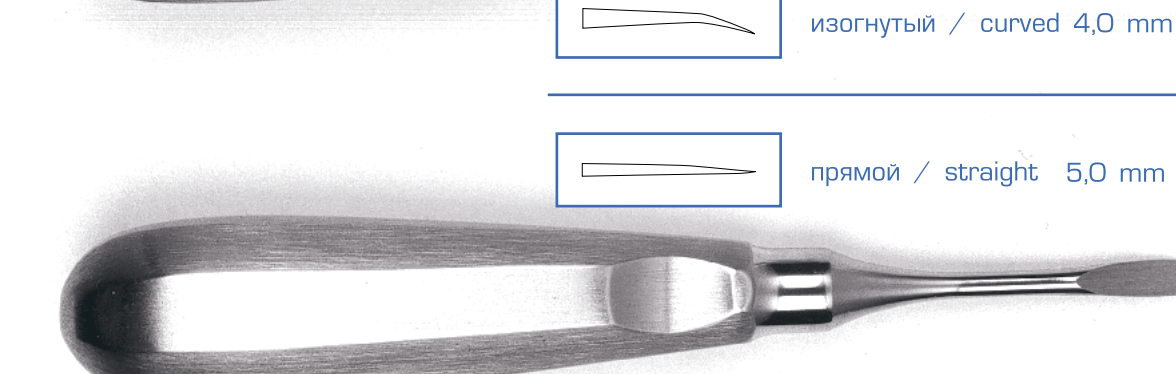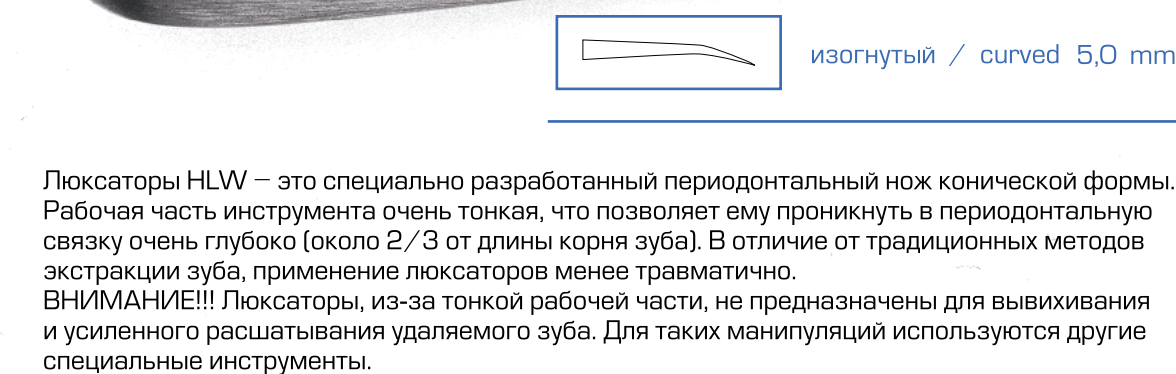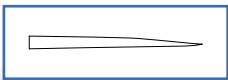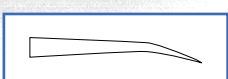		прямой / straight 2,0 mm	Артикул Order-No. Ref. 13-1 LX
		изогнутый / curved 2,0 mm	Ref. 13-5 LX
		прямой / straight 3,0 mm	Ref. 13-2 LX
		изогнутый / curved 3,0 mm	Ref. 13-6 LX
		прямой / straight 4,0 mm	Ref. 13-3 LX
		изогнутый / curved 4,0 mm	Ref. 13-7 LX
		прямой / straight 5,0 mm	Ref. 13-4 LX
		изогнутый / curved 5,0 mm	Ref. 13-8 LX

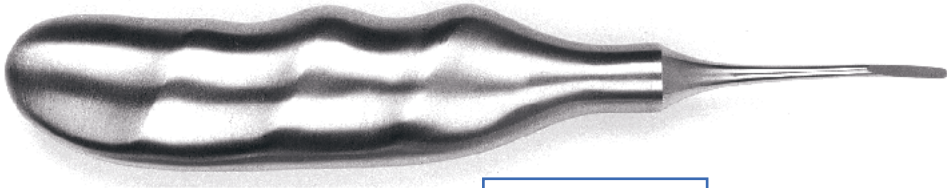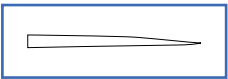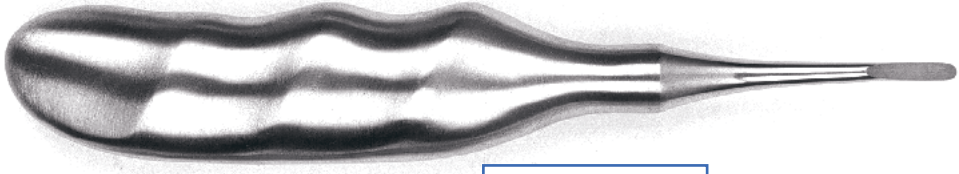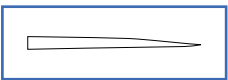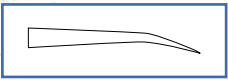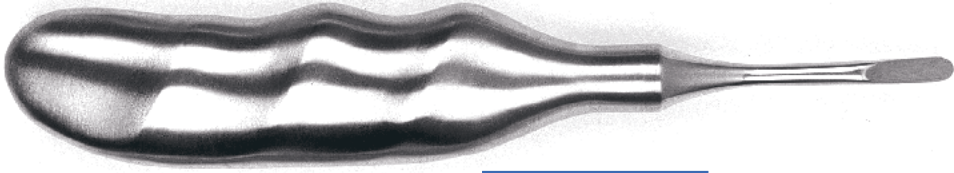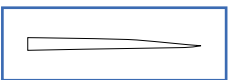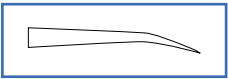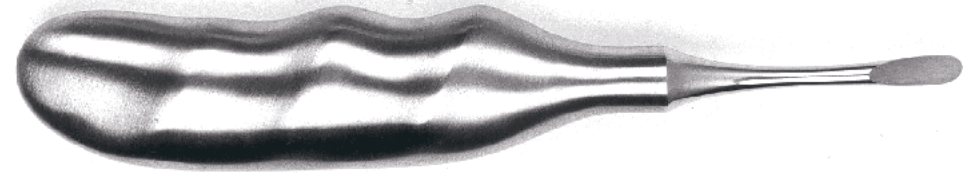Люксаторы HLW – это специально разработанный периодонтальный нож конической формы. Рабочая часть инструмента очень тонкая, что позволяет ему проникнуть в периодонтальную связку очень глубоко (около 2/3 от длины корня зуба). В отличие от традиционных методов экстракции зуба, применение люксаторов менее травматично. **ВНИМАНИЕ!!!** Люксаторы, из-за тонкой рабочей части, не предназначены для вывихивания и усиленного расшатывания удаляемого зуба. Для таких манипуляций используются другие специальные инструменты.

			Артикул Order-No.
		прямой / straight 2,0 mm	Ref. 13-9 LX
		изогнутый / curved 2,0 mm	Ref. 13-13 LX
		прямой / straight 3,0 mm	Ref. 13-10 LX
		изогнутый / curved 3,0 mm	Ref. 13-14 LX
		прямой / straight 4,0 mm	Ref. 13-11 LX
		изогнутый / curved 4,0 mm	Ref. 13-15 LX
		прямой / straight 5,0 mm	Ref. 13-12 LX
		изогнутый / curved 5,0 mm	Ref. 13-16 LX

Люксаторы HLW – это специально разработанный периодонтальный нож конической формы. Рабочая часть инструмента очень тонкая, что позволяет ему проникнуть в периодонтальную связку очень глубоко (около 2/3 от длины корня зуба). В отличие от традиционных методов экстракции зуба, применение люксаторов менее травматично.
ВНИМАНИЕ!!! Люксаторы, из за тонкой рабочей части, не предназначены для вывихивания и усиленного расшатывания удаляемого зуба. Для таких манипуляций используются другие специальные инструменты.

Артикул
Order-No.

Ref. 13-20 LX



Ref. 13-21 LX



Ref. 13-22 LX



Ref. 13-23 LX



Артикул
Order-No.

Ref. 13-25 LX

изогнутый



3,0 mm




удлинённый

Ref. 13-26 LX

изогнутый



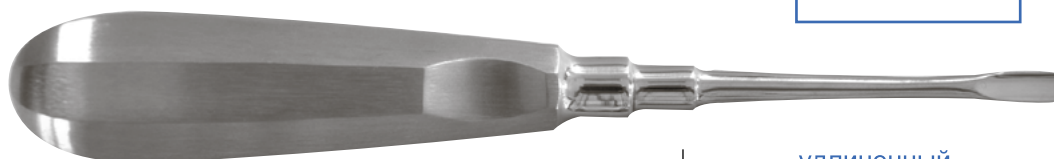5,0 mm



удлинённый

Ref. 13-30 LX

изогнутый кверху




3,0 mm



удлинённый

Ref. 13-31 LX

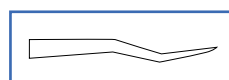с двойным изгибом



3,0 mm



удлинённый

Ref. 13-35 LX

прямой



3,0 mm



удлинённый

Ref. 13-36 LX

прямой



5,0 mm



удлинённый

Кусачки для извлечения костных фрагментов и мелкого инструмента



Stieglitz

13,5 cm
Ref. 13-50 S



Stieglitz

13,5 cm
Ref. 13-60 S



15 cm
Ref. 13-75TC

Элеваторы / для извлечения костных фрагментов (обломков корней)

Heidbrink

Ref. 13-1 H



1,5 mm

Heidbrink

Ref. 13-2 H



2 mm

Heidbrink

Ref. 13-3 H



2,5 mm

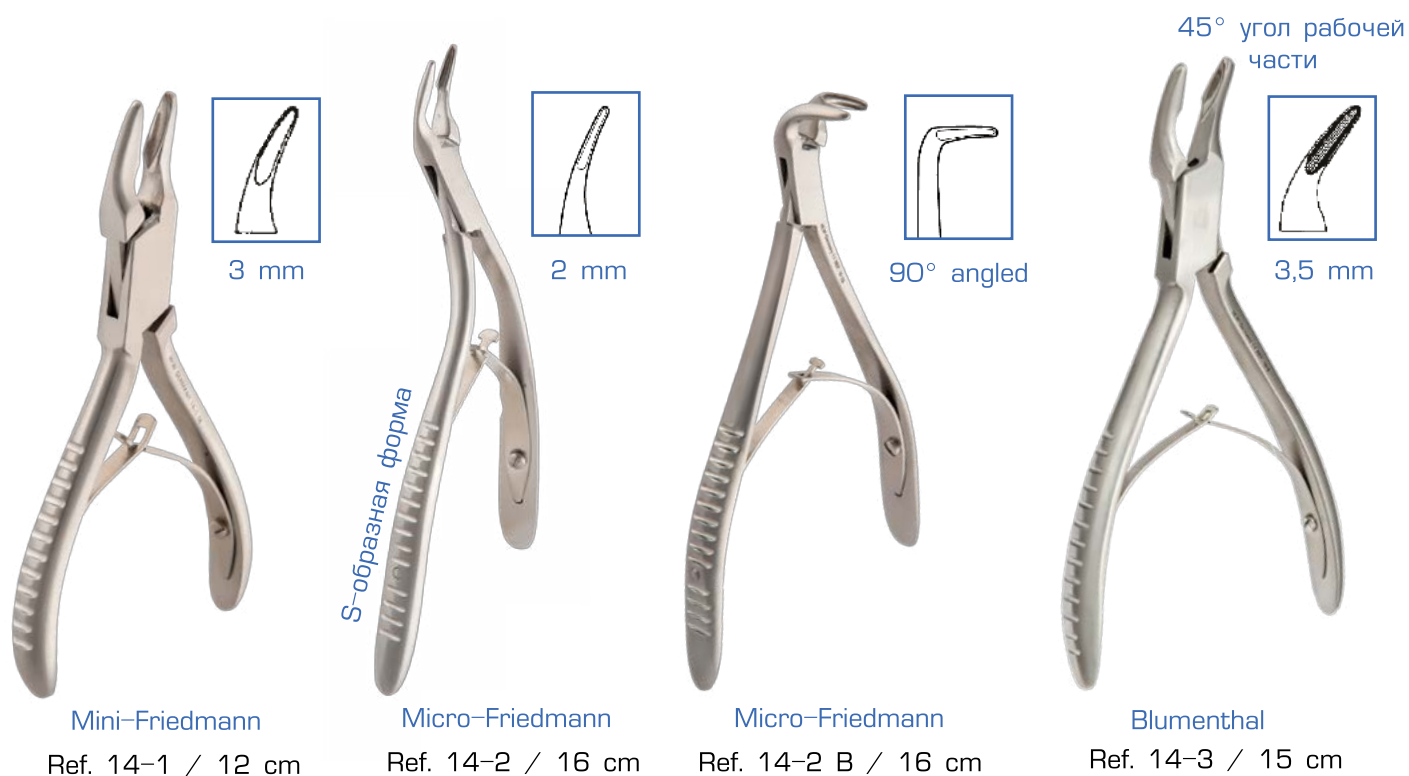
Периотомы



PT01 Код. 26-60



PT02 Код. 26-61






nach BRUENINGS

19 cm

для языка

Артикул
Order-No.

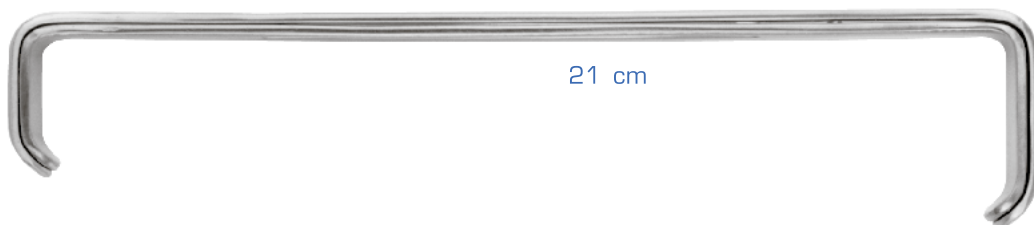Ref. 15-13 A



21 cm

двойной

Ref. 15-14



12 cm

двойной

Ref. 15-14 A



nach SENN

Ref. 15-15



Mini LANGENBECK

16 cm

Ref. 15-15 A



nach LANGENBECK

21 cm

30 x 11 mm
30 x 16 mm

Ref. 15-16
Ref. 15-17



nach MINNESOTA

16 cm

Ref. 15-23

Артикул
Order-No.



Ref. 15-4



14cm

Ref. 15-4A



nach Ivory

20cm

Ref. 15-4B



21 cm

30 x 16 mm

Ref. 15-17 A



21 cm

42 x 11 mm

Ref. 15-17 B



21 cm

60 x 12 mm

Ref. 15-17 C



nach MIDDELDORF

21 cm

для щеки

Ref. 15-18

Артикул
Order-No.



Ref. 15-24




Ref. 15-24A



Ref. 15-26

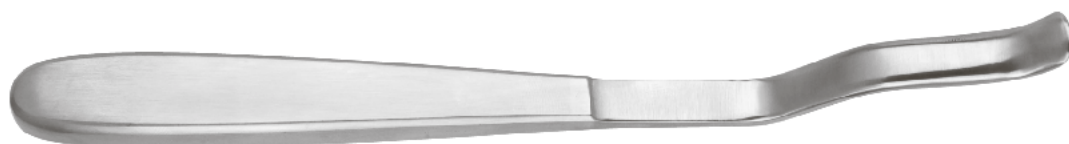16 cm




Ref. 15-27

19 cm



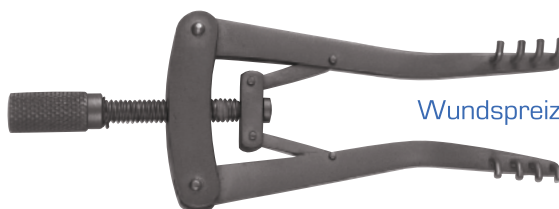Ref. 15-29




Wundspreizer

Ref. 15-28



24 cm

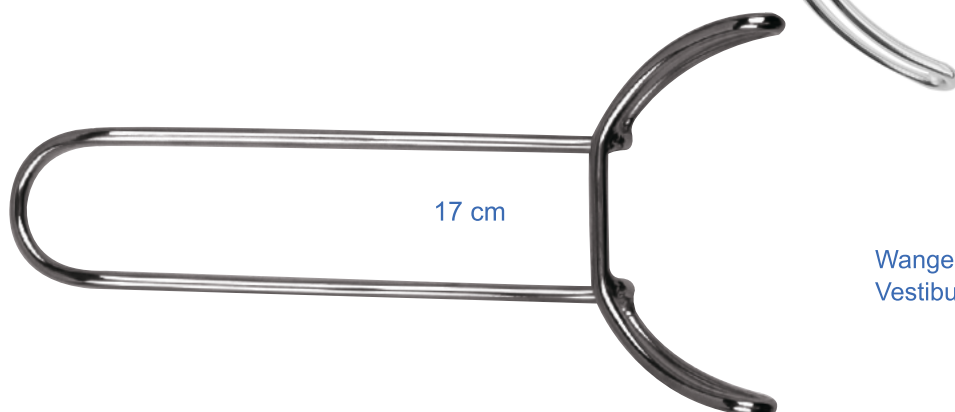
Ref. 15-1



17 cm

Wangenhalter
Vestibulum

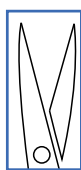Ref. 40-02



прямые
straight



Iris
11,5 cm
зубчатая режущая поверхность
Ref. 19-1



изогнутые
curved



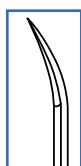
Iris
11,5 cm
зубчатая режущая поверхность
Ref. 19-2



прямые
straight



Stevens
11,5 cm
зубчатая режущая поверхность
Ref. 19-3



изогнутые
curved



Stevens
11,5 cm
зубчатая режущая поверхность
Ref. 19-4



прямые
straight



Goldmann-Fox
12,5 cm
зубчатая режущая поверхность
Ref. 19-5



изогнутые
curved



Goldmann-Fox
12,5 cm
зубчатая режущая поверхность
Ref. 19-6



двойной изгиб
curved



La Grange
11,5 cm
зубчатая поверхность
Ref. 19-7



двойной изгиб
courved



La Grange
13,5 cm
зубчатая поверхность
Ref. 19-8



DEAN
17,5 cm
зубчатая поверхность
Ref. 19-9

для снятия швов
угловые
angeld



Nahtschere
11,5 cm
Ref. 19-13 A

двойные
угловые
double
angeld



Locklin
16 cm
зубчатая поверхность
Ref. 19-10

угловые
angeld



Goldmann-Fox
16 cm
зубчатая поверхность
Ref. 19-11



изогнутые
curved




Joseph
14 cm

Ref. 19-12



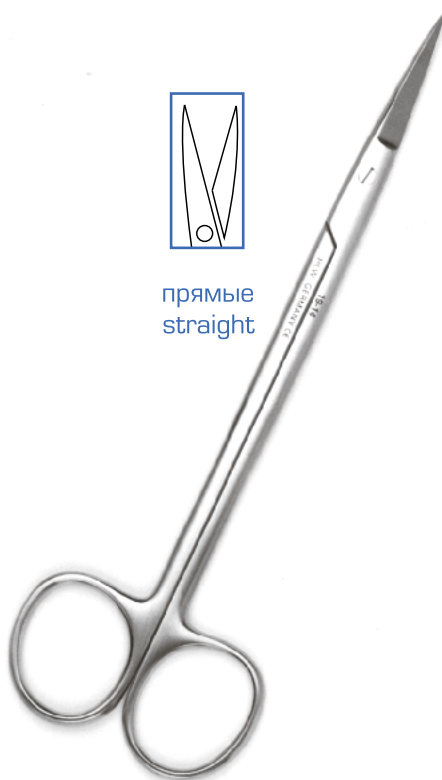
прямые
straight




Kelly
16 cm
зубчатая поверхность
Ref. 19-14



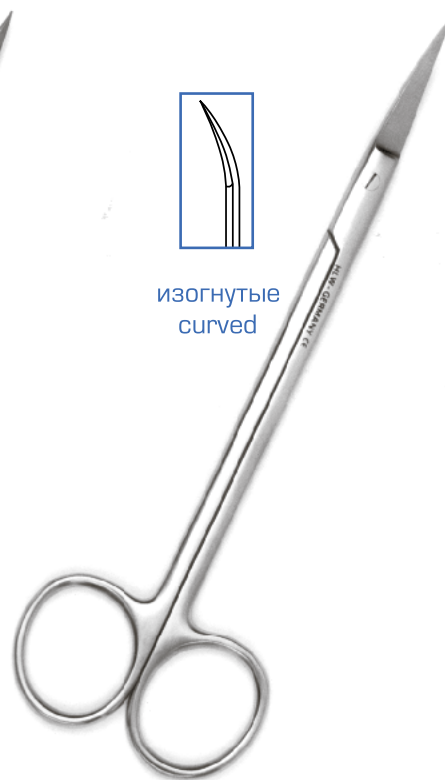изогнутые
curved



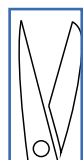Kelly
16 cm
зубчатая поверхность
Ref. 19-15



острый/тупой
sharp/blunt



Хирургические ножницы
14,5 cm
Ref. 19-16



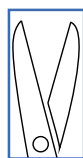
острый/тупой
sharp/sharp



Хирургические ножницы
14,5 cm
Ref. 19-17



Ножницы для снятия
повязок и тейпов
14,5 cm
Ref. 19-27



прямые
straight



Коронковые
10 cm
зубчатая поверхность
Ref. 19-18

гладкая поверхность
Ref. 19-19



изогнутые
curved



Коронковые
10 cm
зубчатая поверхность
Ref. 19-20

гладкая поверхность
Ref. 19-21

угловые
angled



Ножницы
для проволоки
Ref. 19-22



прямые/тупой кончик
gerade/straight



Ножницы для нитей
11,5 cm

Ref. 19-24




изогнутые/тупой кончик
gebogen/curved



Metzenbaum
12 cm

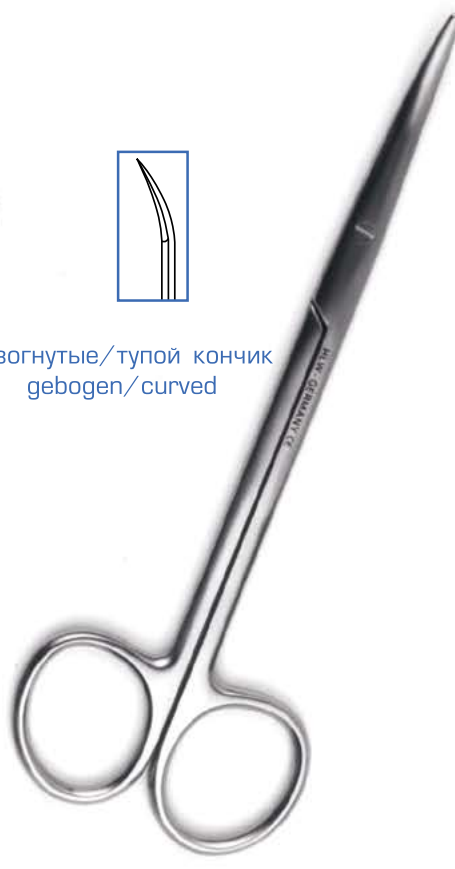Ref. 19-25



Metzenbaum
14,5 cm

Ref. 19-26




двойной изгиб
double curved

зубчатая
поверхность



La Grange Schere TC
11,5 cm

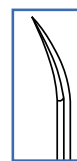Ref. 19-7 TC



изогнутые
curved




Iris - Schere TC
11,5 cm

Ref. 19-1 TC (прямые/straight)
Ref. 19-2 TC (изогнутые/curved)



изогнутые
curved

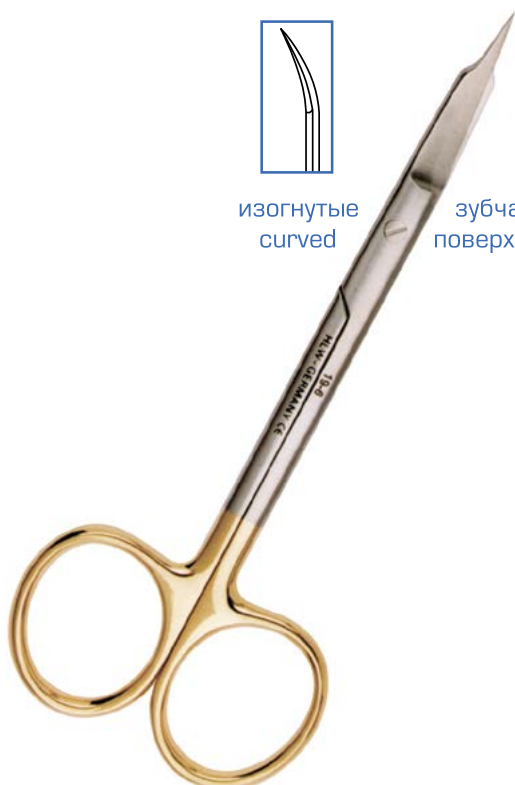зубчатая
поверхность



Goldmann-Fox TC
12,5 cm

Ref. 19-6 TC



изогнутые
curved

зубчатая
поверхность



Kelly TC
16 cm

Ref. 19-15 TC



14 см
изогнутые

Castroviejo-Gomel



Ref. 19-28



14 см
изогнутые

Castroviejo-Gomel TC



Ref. 19-28 TC



14 см
изогнутые

Castroviejo



Ref. 19-23



изогнутые

Castroviejo TC



Ref. 19-23 TC



17 см
изогнутые

Micro Schere TC



Ref. 19-23 B

Плоская, перфорированная ручка



17 см
изогнутые

Micro Schere TC




Ref. 40-48 B

Гладкая, круглая ручка




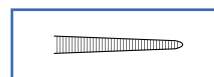Halstead-Mosquito
прямой/straight 12,5 cm




Артикул
Order-No.

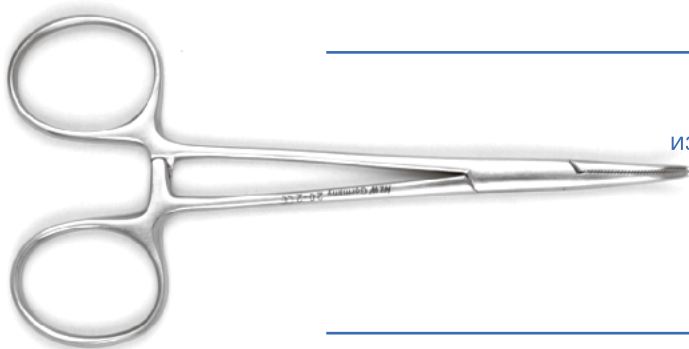Ref. 20-1



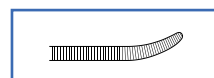Halstead-Mosquito
изогнутый/curved 12,5 cm



Ref. 20-2



Rankin-Crile
прямой/straight 16 cm




Ref. 20-3



Rankin-Crile
изогнутый/curved 16 cm



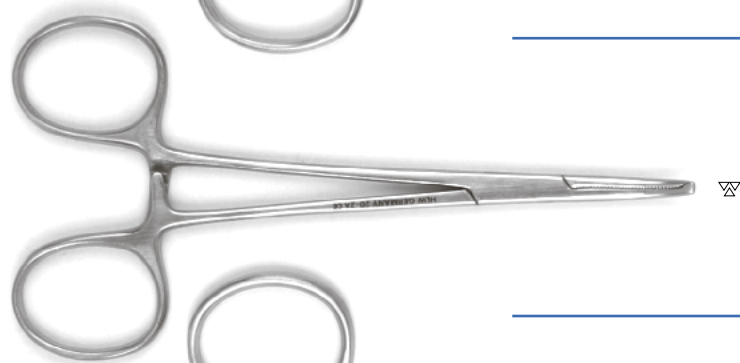
Ref. 20-4



Kocherklemme
изогнутый/curved 12,5 cm



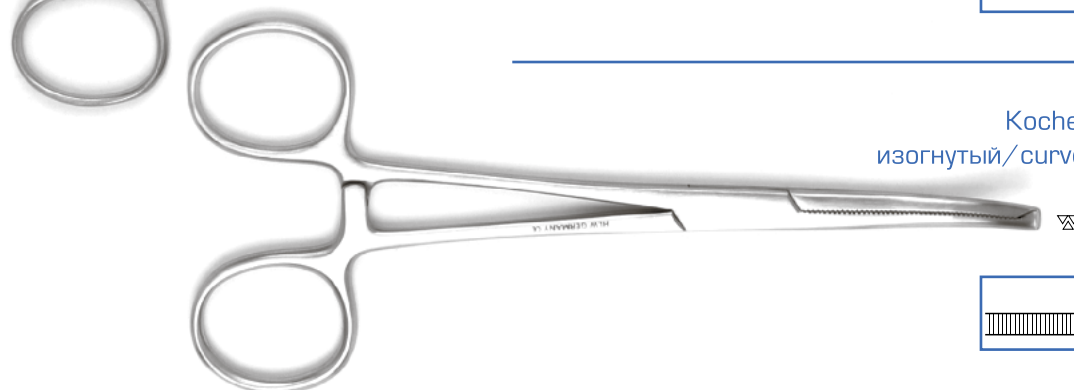Ref. 20-33



Kocherklemme
изогнутый/curved 15 cm



Ref. 20-34



Backhaus
9 cm


Артикул
Order-No.

Ref. 20-5




Backhaus
11 cm

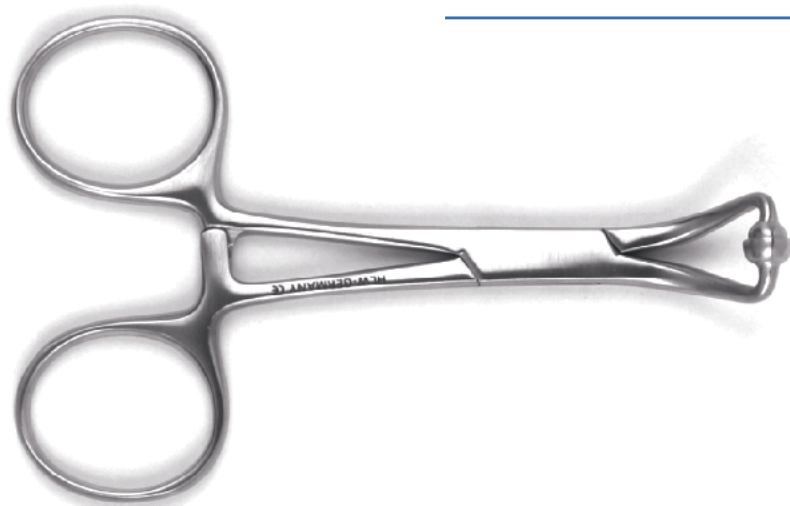Ref. 20-6




Зажим с шариком
9,5 cm

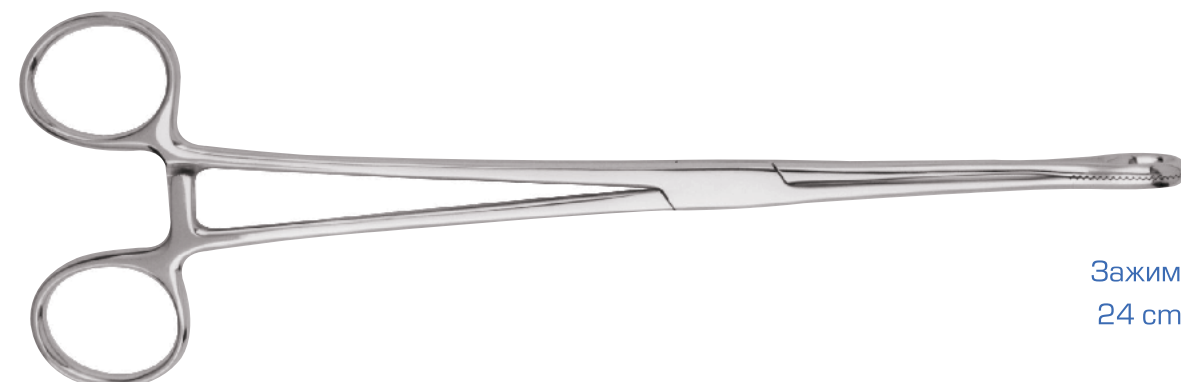Ref. 20-7




Зажим
24 cm

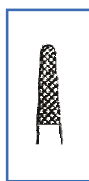Ref. 15-10



Derf
12,5 cm

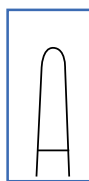Ref. 20-8



гладкий
smooth



Webster
12,5 cm

Ref. 20-8 A



Abbey
14,5 cm

Ref. 20-9





Baumgartner
14,5 cm

Ref. 20-10




Crile-Wood
15 cm

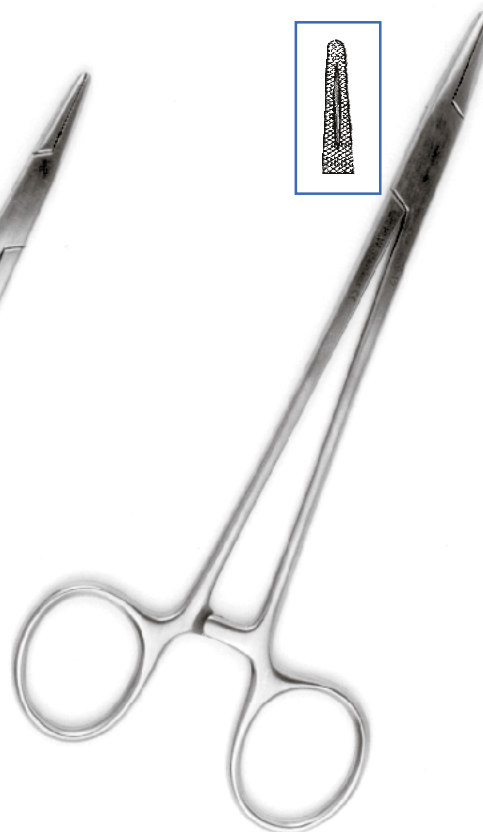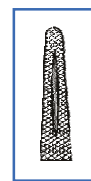Ref. 20-15



Mayo-Hegar
16 cm

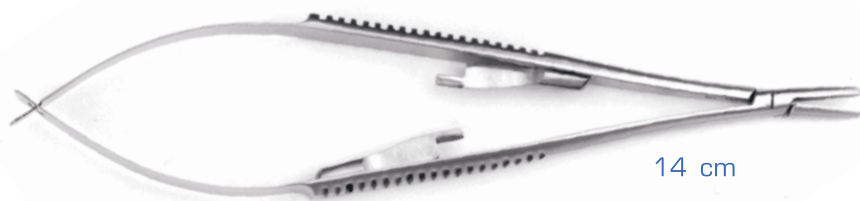Ref. 20-12



14 cm

Castroviejo



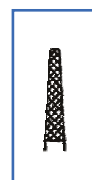
прямой
20-16

Ref.




14 cm

Castroviejo – Gomel TC



прямой
20-19

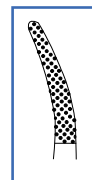


изогнутый
20-17

Ref.




14 cm

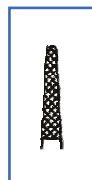Castroviejo TC



прямой

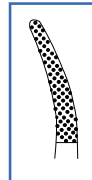

изогнутый

Ref.

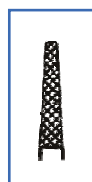
20-28

20-29




18 cm

Castroviejo – Gomel TC



прямой

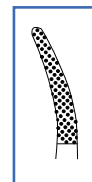

изогнутый

Ref.


20-20

20-18




с алмазным напылением

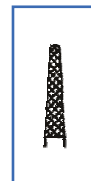Ref. 40-95D




с алмазным напылением

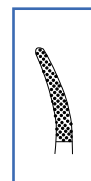Ref. 40-96D




с алмазным напылением

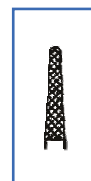Ref. 40-95DS




с твердосплавными вставками

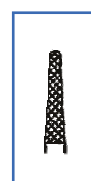Ref. 40-95TC



с твердосплавными вставками

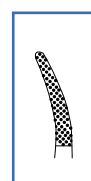Ref. 40-96TC



18 cm



17 cm

Mathieu-Olsen TC




Ref. 20-32



17 cm

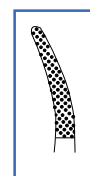Nadelhalter TC




изогнутый

Ref. 20-22B



21 cm

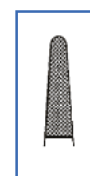Hoesl TC




Ref. 20-31




18 cm

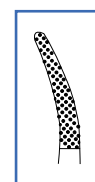Micro-Nadelhalter TC
Гладкая, круглая ручка



изогнутый

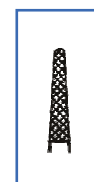Ref. 40-46



прямой

Ref. 40-47



14 cm

Mathieu

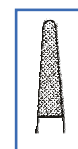


Ref.

20-13




17 cm



Ref.

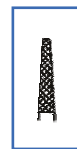20-14



20-14



14 cm

маленькая рабочая
поверхность

Lichtenberg TC



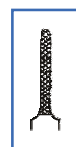
Ref.

20-21



17 cm

маленькая рабочая
поверхность



Ref.

20-22



14 cm

минимально узкая
головка



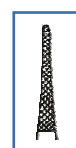
Ref.

20-21a




17 cm

минимально узкая
головка




Ref.

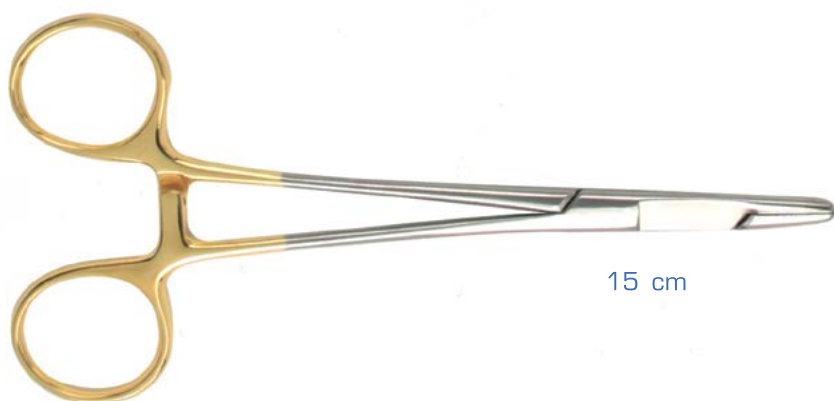20-22a




15 cm

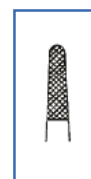Olsen-Hegar TC




прямой

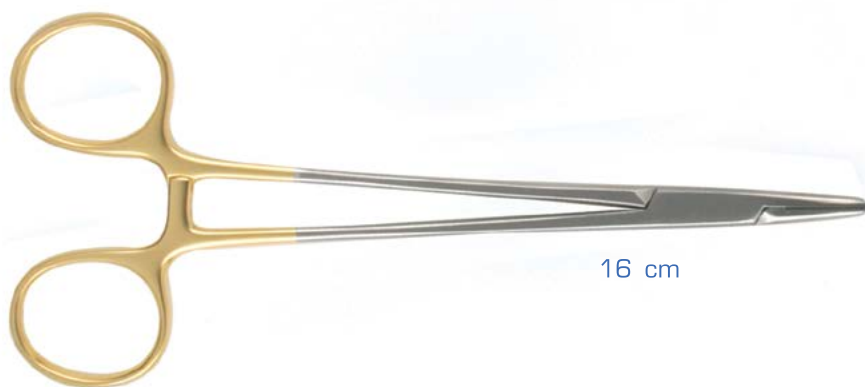Ref. 20-24




16 cm

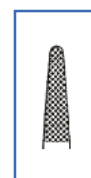Mayo-Hegar TC



прямой

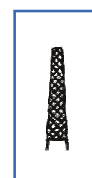Ref. 20-25




микро

20-25a



16 cm

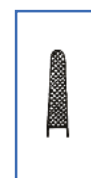Castroviejo-Gomel TC




прямой

Ref. 20-30



18 cm

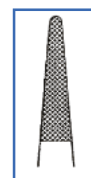Toennis TC



прямой

Ref. 20-23



16 cm

Meriam

Артикул
Order-No.

Ref. 22-1



16 cm

Flagg

Ref. 22-2



15 cm

College


Ref. 22-3



15 cm

College (с зажимом)

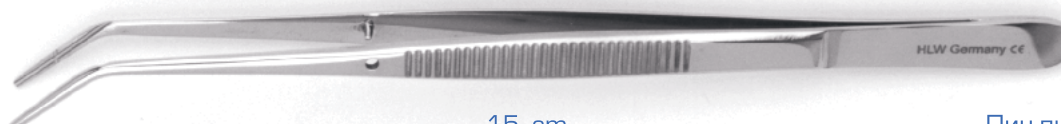Ref. 22-4



15 cm

Пин пинцет


Ref. 22-5



15 cm

Пин пинцет (с зажимом)

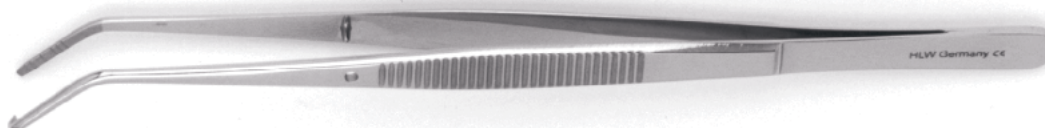
Ref. 22-6



15 cm

Goldman-Fox правый

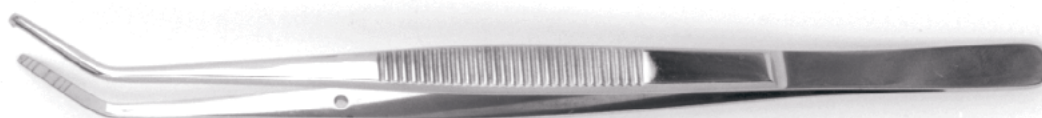Ref. 22-7



15 cm

Goldman-Fox левый

Ref. 22-8



15 cm

Шовный Пинцет

Артикул
Order-No.

Ref. 22-11



15 cm

Шовный Пинцет


Ref. 22-12



15 cm

Шовный пинцет, угловой

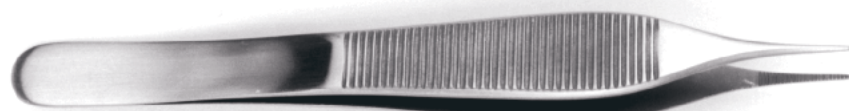Ref. 22-13




12 cm

анатомический

Adson-Pinzette

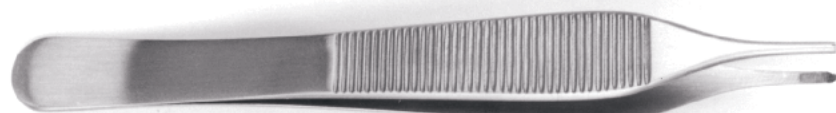Ref. 22-14



12 cm

хирургический

Adson-Pinzette

Ref. 22-15




12 cm

ультратонкий

Micro-Adson-Pinzette

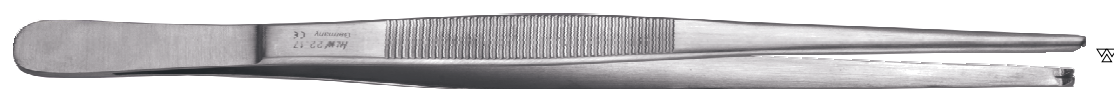Ref. 22-15A



20 cm

хирургический

Артикул
Order-No.

Ref. 22-17



20 cm

анатомический


Ref. 22-18



14 cm

хирургический

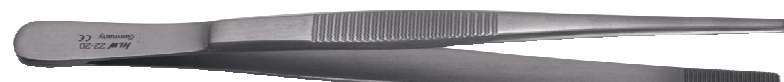Ref. 22-19



14 cm

анатомический

Ref. 22-20



12,5 cm

анатомический Semken

Ref. 22-21



12,5 cm

хирургический Semken


Ref. 22-22



18 cm

анатомический Gerald

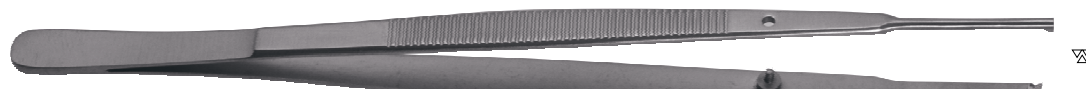Ref. 22-21A



18 cm

хирургический Gerald


Ref. 22-22A



15 cm

Пинцет для артикуляционной бумаги Miller

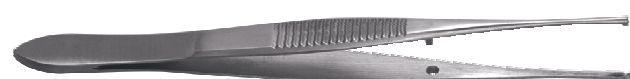Ref. 22-23




11,5 cm

хирургический

Артикул
Order-No.

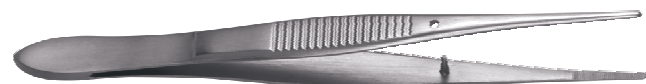Ref. 22-24



11,5 cm

анатомический

Ref. 22-25




15 cm

Пинцет с
усиленной
ручкой

College

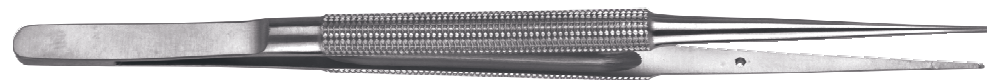Ref. 22-26




18 cm

хирургический
прямой

Микропинцет Gomel

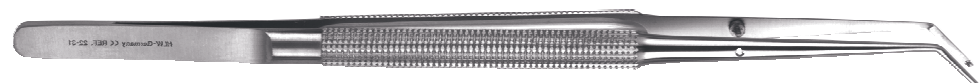Ref. 22-30



18 cm

хирургический
изогнутый

Микропинцет Gomel

Ref. 22-31



18 cm

анатомический
прямой

Микропинцет Gomel

Ref. 22-32



18 cm

анатомический
изогнутый

Микропинцет Gomel

Ref. 22-33



15 cm

атравматичный
прямой

De Bakey

Ref. 22-34



15 cm

атравматичный
изогнутый

De Bakey

Ref. 22-35



Микропинцет

Артикул
Order-No.

Ref. 22-41




Микропинцет

Ref. 22-42



Микропинцет

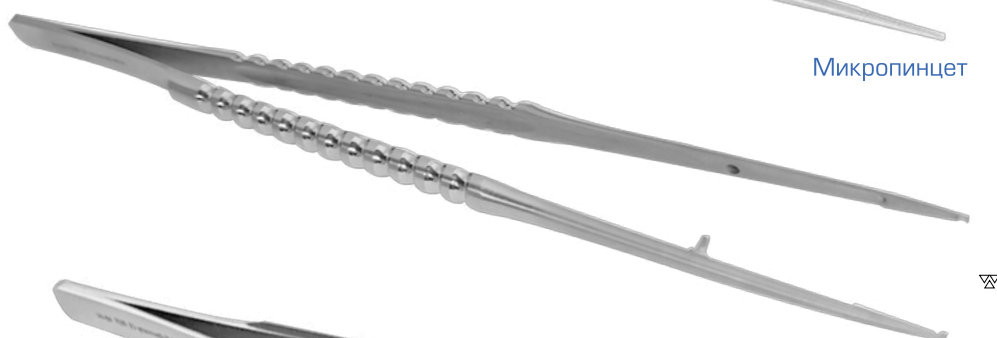Ref. 40-97



Микропинцет

Ref. 40-98



Микропинцет хирургический
Микропинцет анатомический



Ref. 40-44
Ref. 40-44A




Микропинцет хирургический
Микропинцет анатомический



Ref. 40-45
Ref. 40-45A



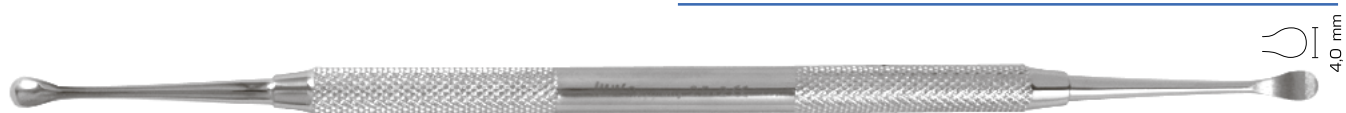Lukas Ref. 25-1



Lukas Ref. 25-2



Lukas Ref. 25-3



Lukas Ref. 25-4



Lukas Ref. 25-5

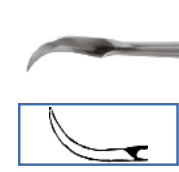
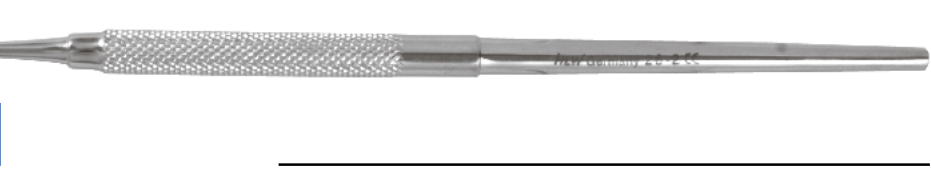
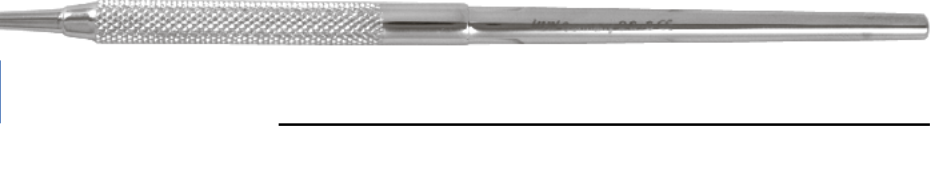
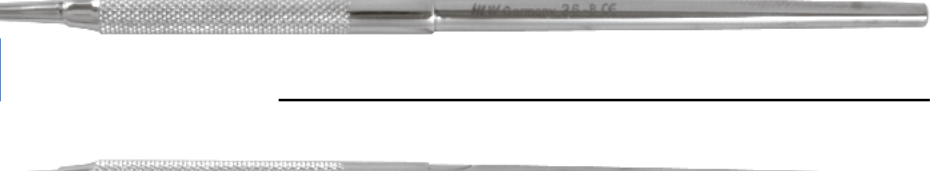
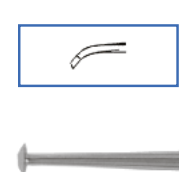
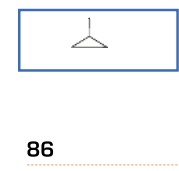


Williger Ref. 25-6



Williger Ref. 25-7



			Артикул Order-No. Ref. 26-1
			Ref. 26-2
			Ref. 26-3
			Ref. 26-4
			Ref. 26-5
			Ref. 26-6
			Ref. 26-7
			Ref. 26-8
			Ref. 26-9
			Ref. 26-10

облегченная, полая ручка Ø 8 mm



Taylor

Fig. T 2/3

Ref. 26-11


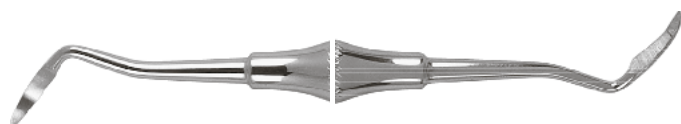


Fig. CI 2/3

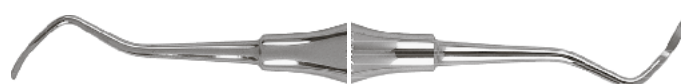
Ref. 26-12



McCall

Fig. 13S/14S

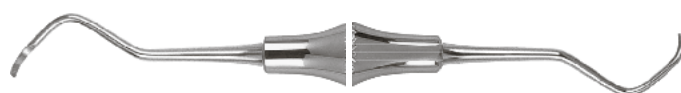
Ref. 26-14



McCall

Fig. 13/14

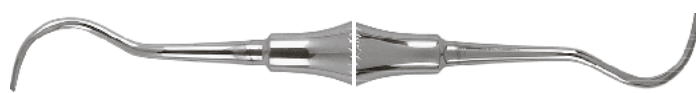
Ref. 26-15



McCall

Fig. 17/18

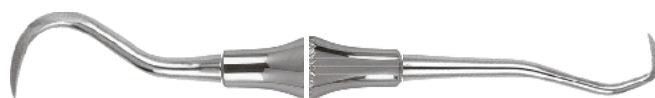
Ref. 26-15A



Towner Jaquette

Fig. 15/30

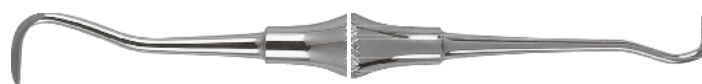Ref. 26-16



Towner Jaquette

Fig. 5/33

Ref. 26-17



Jaquette

Fig. 30/33


Ref. 26-18



Hygenist

H6/H7

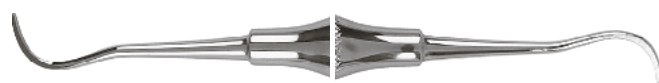Ref. 26-19



Younger Good

7/8


Ref. 26-20



Scaler

204 S

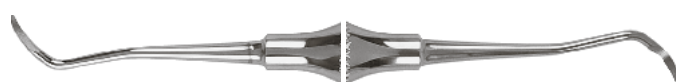
Ref. 26-56



Scaler

204 SD

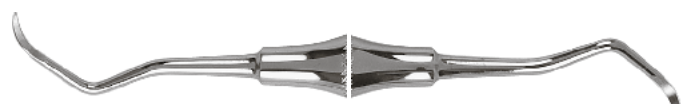Ref. 26-57



Scaler

M 23

Ref. 26-62



Kurette

M 23A

Ref. 26-63

облегченная, полая ручка Ø 8 mm



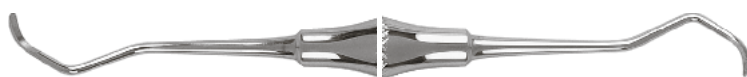
Columbia Fig. 4 R/L Ref. 26-28




Columbia Fig. 2 R/L Ref. 26-29




Columbia Fig. 13/14 Ref. 26-30



Columbia Fig. 411/412 Ref. 26-31

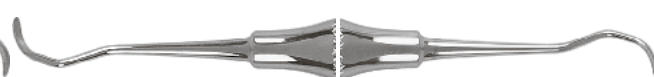

Columbia Fig. 413/414 Ref. 26-32

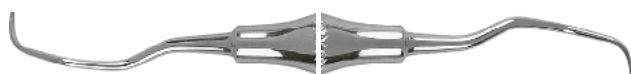

Langer Fig. 1/2 Ref. 26-33



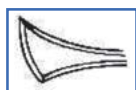
Langer Fig. 5/6 Ref. 26-34



Langer Fig. 3/4 Ref. 26-35



Orban knife Ref. 26-27A



Kirkland Fig. 15/16 Ref. 26-27

ПРИМЕНЕНИЕ КЮРЕТ GRACEY

Форма	Артикул	Область применения
1 / 2	26–36 А или В*	резцы, премоляры
3 / 4	26–37 А или В*	резцы, премоляры
5 / 6	26–38 А или В*	резцы, премоляры; для аппроксимальных поверхностей
7 / 8	26–39 А или В*	премоляры, моляры; для щечных, медиальных и фронтальных поверхностей премоляров и моляров
9 / 10	26–40 А или В*	моляры; для щечных, лингвальных поверхностей моляров
11 / 12	26–41 А или В*	моляры, мезиальная поверхность; для вестибулярных поверхностей резцов и премоляров
13 / 14	26–42 А или В*	моляры, дистальная поверхность; для лингвальных и дистальных поверхностей резцов и премоляров
15 / 16	26–43 А или В*	для лингвальных и дистальных поверхностей резцов и премоляров; лезвие расположено под более острым углом по сравнению с 11 / 12
17 / 18	26–44 А или В*	моляры, дистальная поверхность; лезвие расположено под более острым углом по сравнению с 13 / 14



Высокая эргономичность инструмента обеспечивается повышенным диаметром 10 мм и легкостью ручек благодаря поллой конструкции. Такие инструменты снижают риск развития кистевого туннельного синдрома у врача при длительной работе.

* Инструменты содержащие в артикуле букву «А» имеют классический диагональный ретенционный узор в дистальных третях ручек. С буквой «В» - шороховатый микрорельеф.

круглая, экстра легкая ручка Ø10 mm



Gracey

Fig. 1/2

Ref. 26-36A



Gracey

Fig. 3/4

Ref. 26-37A



Gracey

Fig. 5/6

Ref. 26-38A



Gracey

Fig. 7/8

Ref. 26-39A



Gracey

Fig. 9/10

Ref. 26-40A



Gracey

Fig. 11/12

Ref. 26-41A



Gracey

Fig. 13/14

Ref. 26-42A

круглая, экстра легкая ручка Ø10 mm



Gracey

Fig. 1/2

Ref. 26-36B



Gracey

Fig. 3/4

Ref. 26-37B



Gracey

Fig. 5/6

Ref. 26-38B



Gracey

Fig. 7/8

Ref. 26-39B



Gracey

Fig. 9/10

Ref. 26-40B



Gracey

Fig. 11/12

Ref. 26-41B



Gracey

Fig. 13/14

Ref. 26-42B


Gracey MF = укороченный рабочий кончик; круглая, экстремально легкая ручка $\varnothing 10\text{ mm}$



Gracey MF

Fig. 1/2

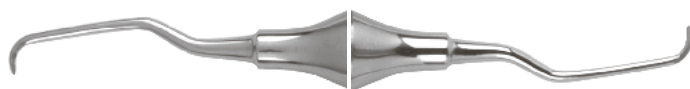
Ref. 26-36B MF



Gracey MF

Fig. 5/6

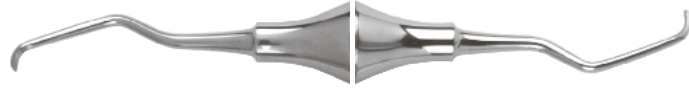
Ref. 26-38B MF



Gracey MF

Fig. 7/8

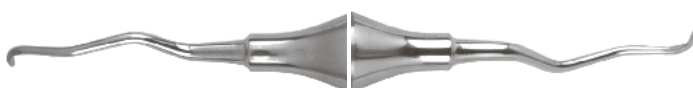
Ref. 26-39B MF



Gracey MF

Fig. 11/12

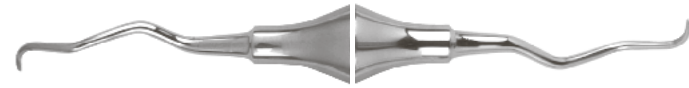Ref. 26-41B MF



Gracey MF

Fig. 13/14

Ref. 26-42B MF

Маркировочные кольца для кюрет



коричневые
50 штук

Ref. 26-001



черные
50 штук

Ref. 26-005



желтые
50 штук

Ref. 26-002



красные
50 штук

Ref. 26-006



зеленые
50 штук

Ref. 26-003



синие
50 штук

Ref. 26-007



серые
50 штук



Ref. 26-004



белые
50 штук

Ref. 26-008

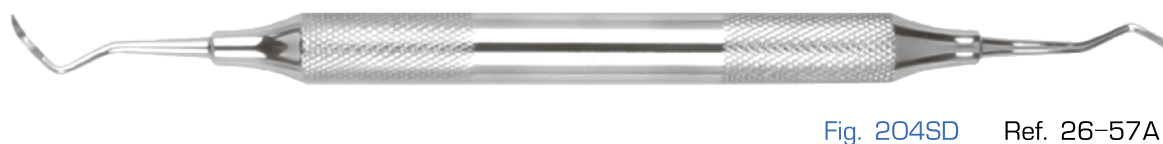
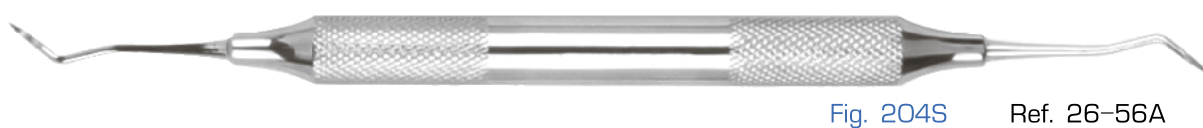
ручка "CLASSIC", экстра легкая Ø10 mm



ручка "DELUXE", экстра легкая Ø10 mm



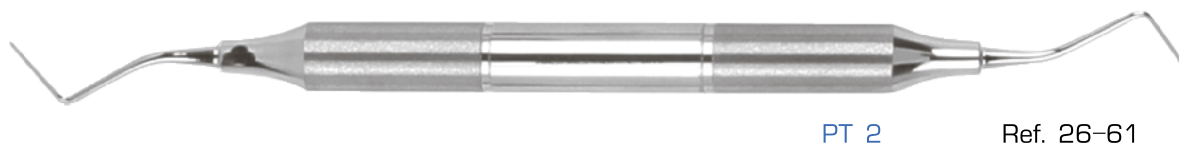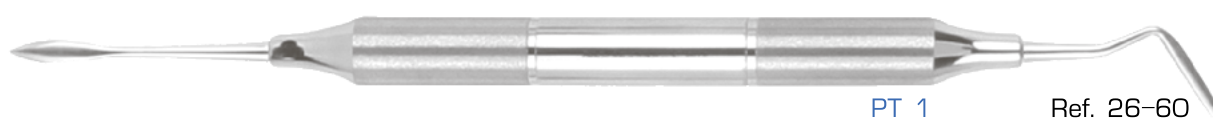Периотомы ручка полая, экстра легкая Ø 10 mm



Пародонтологические скейлеры и кюреты
ручка экстра легкая Ø10 mm





жесткий

Fig. 6

Артикул:

Ref. 27-1



жесткий

Fig. 8

Ref. 27-2



жесткий

Fig. 9

Ref. 27-3



жесткий

Fig. 18

Ref. 27-4



жесткий

Fig. 17

Ref. 27-5



жесткий

Fig. 23

Ref. 27-6



Fig. 32

Артикул:

Ref. 27-7



гибкий

Fig. 33

Ref. 27-8



гибкий

Fig. 65

Ref. 27-9



гибкий

Fig. 39

Ref. 27-10



гибкий

Fig. 30

Ref. 27-11



гибкий

Fig. 23

Ref. 27-12



гибкий

Fig. 17

Ref. 27-13



гибкий

Fig. 3A

Артикул:

Ref. 27-3A



гибкий

Fig. 6/23

Ref. 27-14



гибкий

Fig. 17/23

Ref. 27-15



цветокодировка
сферический кончик

гибкий

Fig. WHO/23

Ref. 27-15A



гибкий

Fig. 6/17

Ref. 27-16



гибкий

Fig. 6/1

Ref. 27-17



для зоны бифуркации

Ref. 27-24A



Goldman-Fox Ref. 27-19



Williams Ref. 27-20



цветокодировка
CP 12 Ref. 27-22



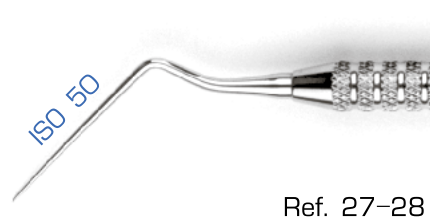
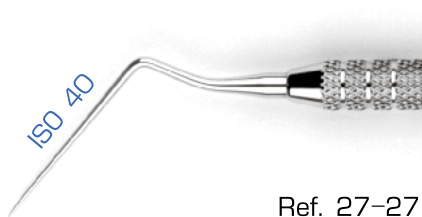
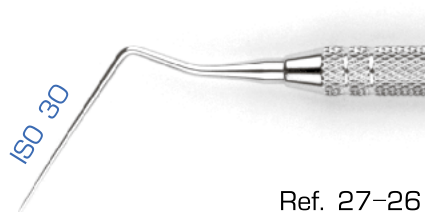
цветокодировка
PCPUNC15 Ref. 27-22A






цветокодировка Nabers Ref. 27-24



цветокодировка Nabers Ref. 27-24B



Зонды / плагеры

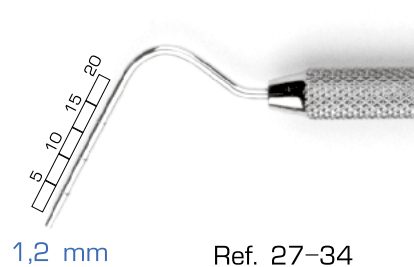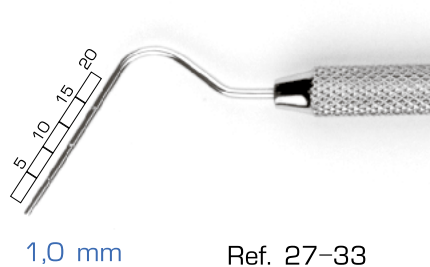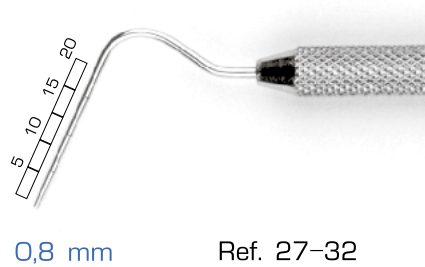

круглый

1,0 mm

Ref. 28-1

круглый

1,5 mm

Ref. 28-2

круглый

2,0 mm

Ref. 28-3

круглый

2,5 mm

Ref. 28-4

круглый

3,0 mm

Ref. 28-5

круглый

1,0 mm

Ref. 28-6

круглый

1,5 mm

Ref. 28-7

круглый

2,0 mm

Ref. 28-8

круглый

2,0 mm

Ref. 28-9

круглый

2,5 mm

Ref. 28-10

круглый

1,5 mm

Ref. 28-11

круглый

1,0 mm

Ref. 28-12

круглый

2,0 mm

Ref. 28-13

круглый

1,5 mm

Ref. 28-14

круглый

2,5 mm

Ref. 28-15

2,0 mm

овальный

Ref. 28-16

1,0 mm

овальный

Ref. 28-17

круглый

3,0 mm

Ref. 28-18


круглый

2,0 mm

Ref. 28-19

круглый

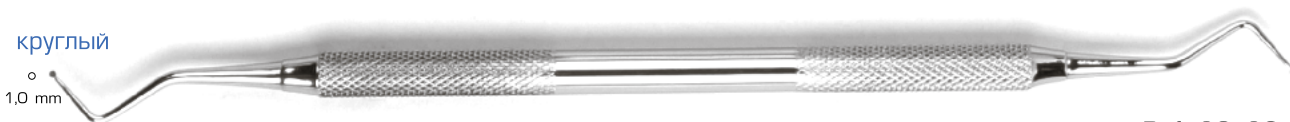1,0 mm



Ref. 28-20

овальный

1,0 mm



Ref. 28-21

овальный

1,0 mm



Ref. 28-22

овальный

1,5 mm



Ref. 28-23

овальный

1,5 mm



Ref. 28-24

овальный

2,0 mm



Ref. 28-25

овальный

2,5 mm



Ref. 28-26

овальный

2,5 mm



Ref. 28-27

овальный

3,0 mm



Ref. 28-28

овальный


1,0 mm



Ref. 28-29



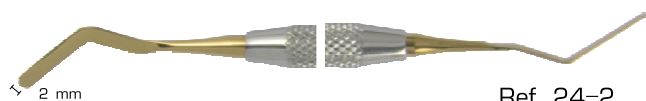Ref. 24-1



Ref. 24-2




Ref. 24-3



Ref. 24-4



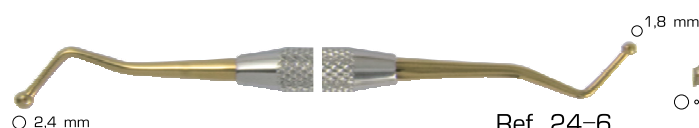Ref. 24-5



Ref. 24-6



Ref. 24-7



Ref. 24-8




Ref. 24-9




Ref. 24-10



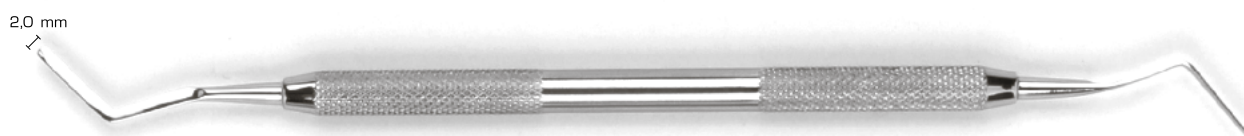
Ref. 24-11




Heidemann гибкая Ref. 29-1

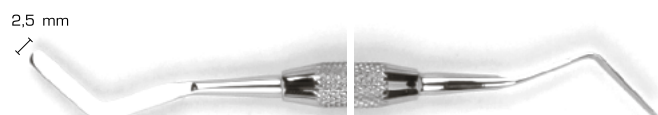


Heidemann гибкая Ref. 29-2

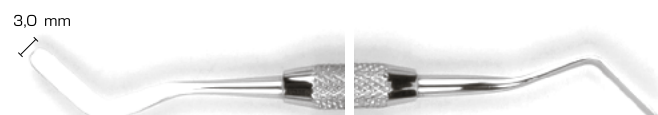


Heidemann гибкая Ref. 29-3

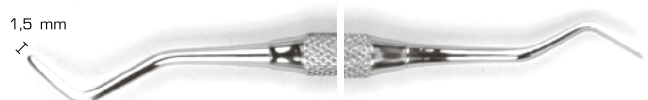


Heidemann жесткая Ref. 29-4

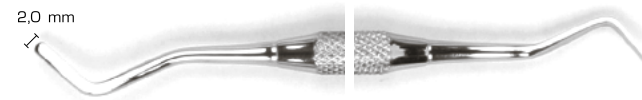


Heidemann жесткая Ref. 29-5

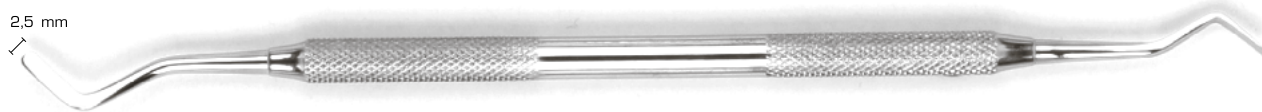


жесткая Ref. 29-6

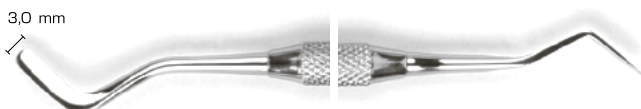


жесткая Ref. 29-7

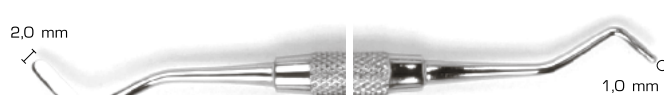


Ref. 29-8

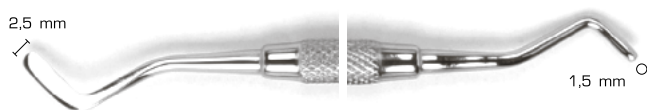


Ref. 29-9

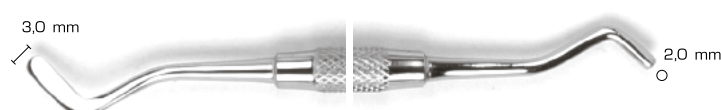


Ref. 29-10

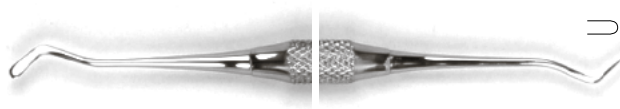


Ref. 29-11

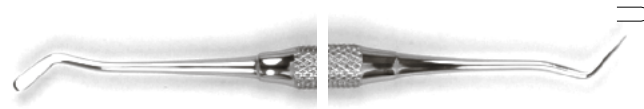


Ref. 29-12

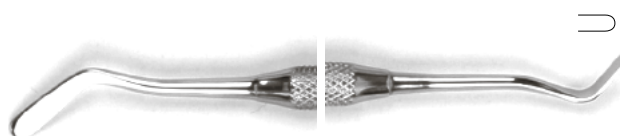

Ref. 29-13

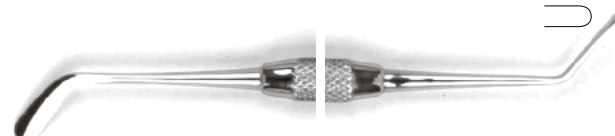


Ref. 29-14

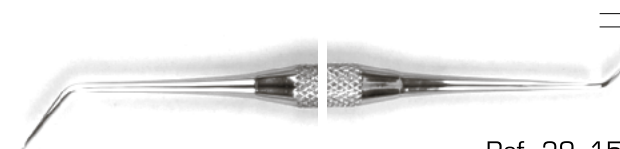


Ref. 29-15



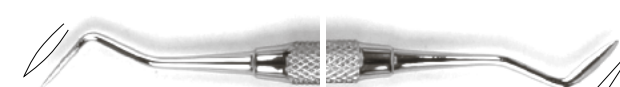
Ref. 29-16



Ref. 29-17

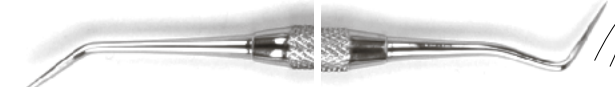

Ref. 29-18

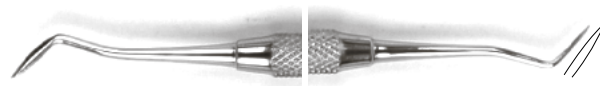


Ref. 29-19




VAJNA

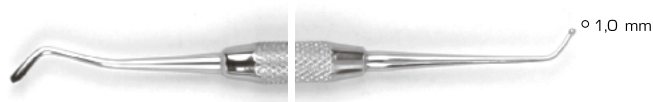
Ref. 29-21




Ref. 29-22

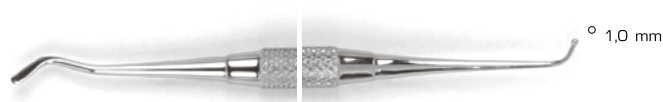


Ref. 29-23

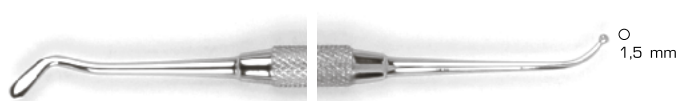


Ref. 29-24

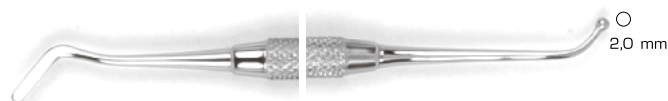


Ref. 29-25

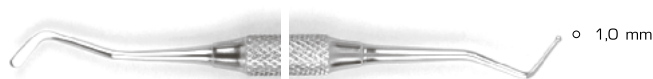


Ref. 29-26

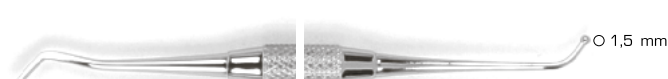


Ref. 29-27

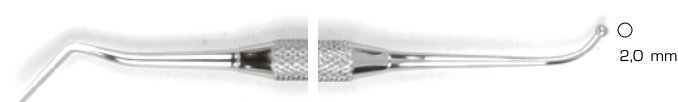


Ref. 29-28

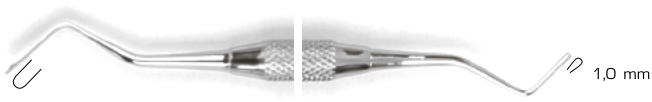


Ref. 29-29

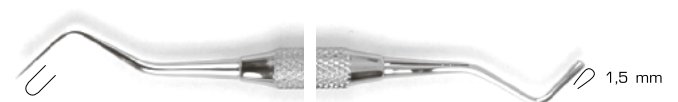

Ref. 29-30

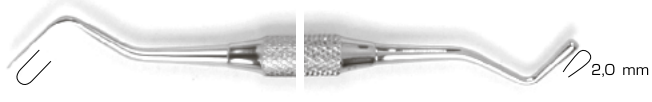

Ref. 29-31

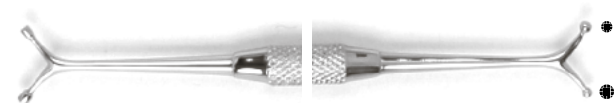


VAJNA


Ref. 29-32



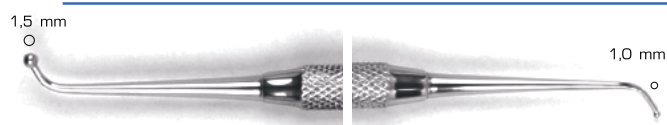
Ref. 29-33




Ref. 29-34

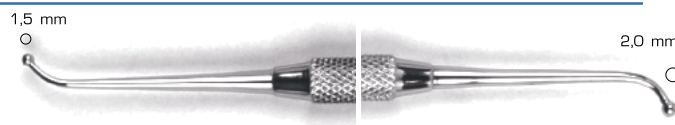


Ref. 29-35

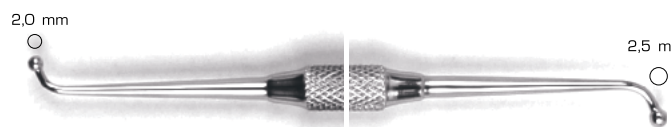


Ref. 29-36

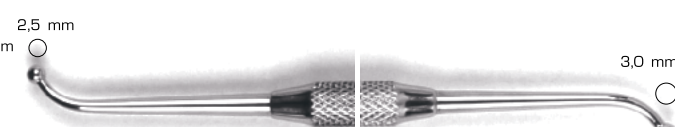


Ref. 29-37

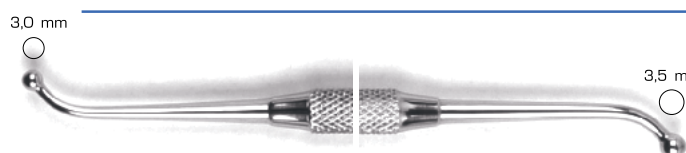


Ref. 29-38

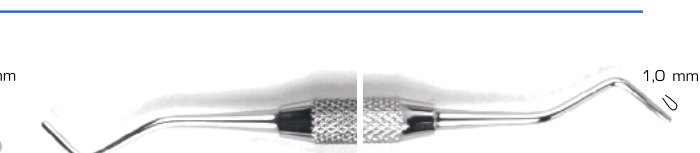

Ref. 29-40

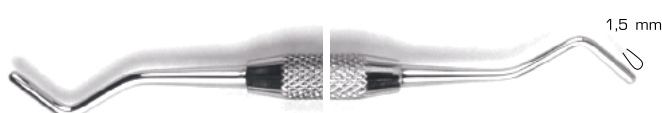

Ref. 29-41

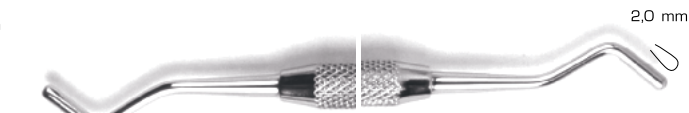

Ref. 29-42



Ref. 29-43



Ref. 29-44



Ref. 29-45




Ref. 29-46



Ref. 29-47



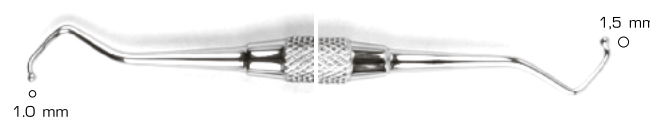
Ref. 29-48




Ref. 29-49



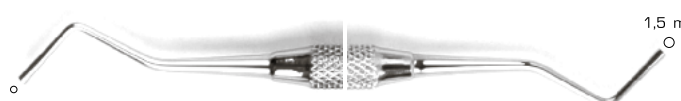Ref. 29-50




Ref. 29-51

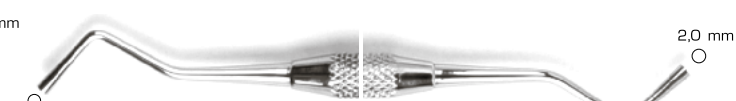


Ref. 29-52



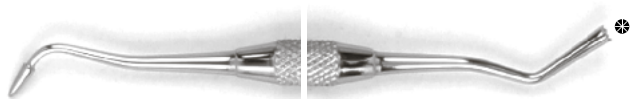
Ref. 29-53



Ref. 29-54

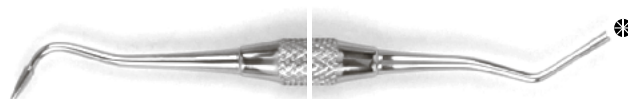


Ref. 29-55

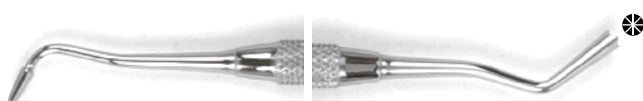


Ref. 29-56



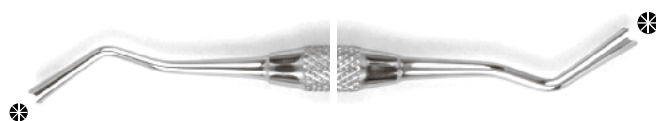Ref. 29-57




Ref. 29-58

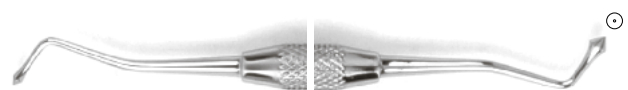


Для моделировки фиссур

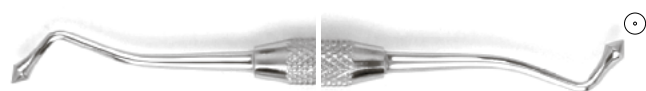Ref. 29-59




Для моделировки фиссур

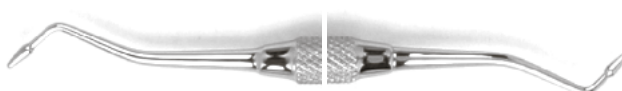Ref. 29-60




Hollenback

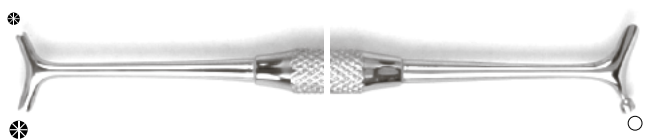Ref. 29-61




Bennet

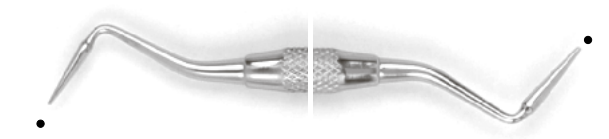Ref. 29-62




Mortonson

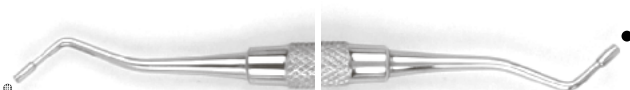Ref. 29-63



Hollenback

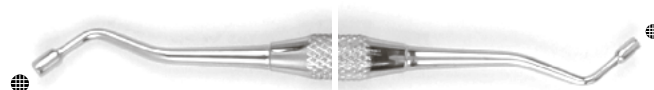Ref. 29-64




Hollenback

Ref. 29-65



Cleoid-Discoid

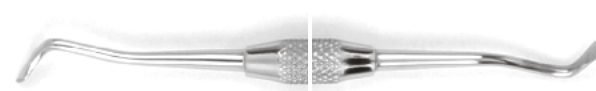Ref. 29-66




Frahm

Ref. 29-67




Beale

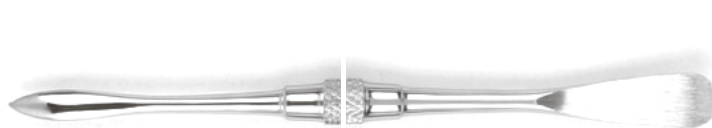Ref. 29-68



Beale

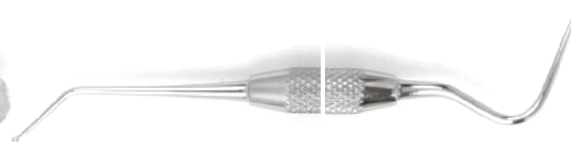Ref. 29-69



Placement

Ref. 29-70



Тампонадная

Ref. 29-71



Укладчик ретракционной нити / Пакер

Ref. 29-72



Уплотнитель

Ref. 29-73



Планатор

Ref. 29-74



Эмалевый нож мезиальный Ref. 29-75



Эмалевый нож дистальный Ref. 29-76



для полировки

Ref. 29-77



для замешивания

Ref. 31-9



12,5 cm

Williger

Артикул
Order-No.

Ref. 30-1



16 cm

Williger

Ref. 30-2



16 cm

Williger

Ref. 30-2A

Ref. 30-2B



17,5 cm

Molt


Ref. 30-3



17,5 cm

Molt

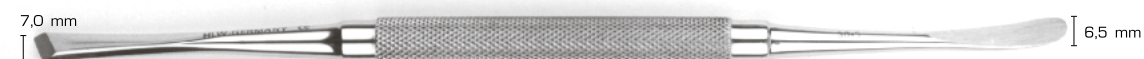Ref. 30-4



17,5 cm

Meat

Ref. 30-5



17,5 cm

Meat


Ref. 30-5A



17,5 cm

Meat

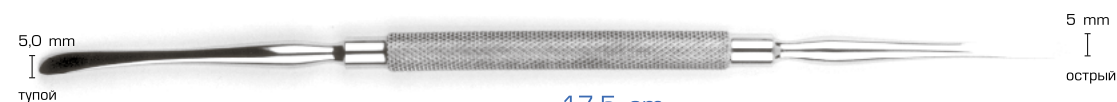Ref. 30-5B



17,5 cm


Freer

Ref. 30-6




17,5 cm

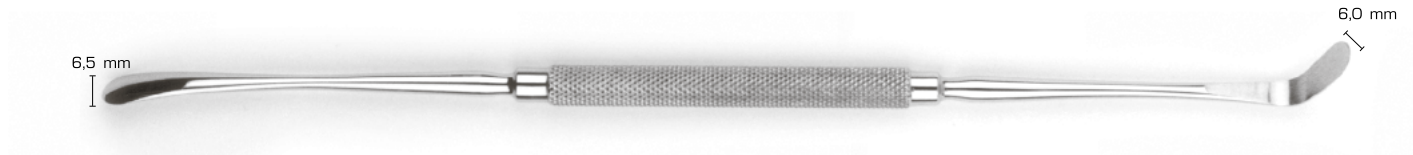Freer Ref. 30-6A



18,5 cm

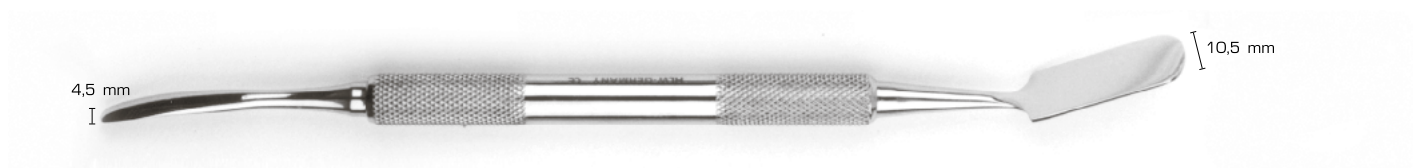Freer Ref. 30-7



17,5 cm

Prichard Ref. 30-15



20 cm

Seldin Ref. 30-16



20 cm

Seldin Ref. 30-17

Периотомы



PT01 Код. 26-60



PT02 Код. 26-61

Ручка для скальпеля с эргономичной рукояткой
Код. 40-27



Благодаря своей форме эта ручка удобно располагается в руке и предотвращает чувство усталости в пальцах во время длительной работы

Распатор
Код. 40-18



Окончание в виде стрелы служит для препарирования десневых сосочков и тонких структур при имплантации или в пародонтологии, сердцевидное окончание инструмента предназначено для атравматичного препарирования на гладких костных структурах, если окончание инструмента воткнуть в кость, получится хорошая, нескользящая опора во время операции.

Шабер для кости
Код. 40-21



Для оптимального сбора аутологичной кости при имплантации и пародонтологических операциях. Широкий конец идеально подходит для сглаживания гребня челюсти перед имплантацией, а также для дополнительного сбора костного материала в области операции. Хорошо срезает костную стружку без дополнительных усилий. Для обеспечения оптимальной остроты мы рекомендуем после каждого использования заточку камнем Арканзас.

Элеватор для десневых сосочков
Код. 40-19



Для атравматичного вскрытия сосочков и тонких структур в имплантации и эстетической пародонтологии.

Инструмент для фиксации мембран и пинов
Код. 40-41



Шпатель для смешивания
Код. 40-42



ручка "DELUXE", Ø10 мм, экстра легкая

2,5 mm

Код. 40-24

3,5 mm

Код. 40-23

Код. 40-22A

Рабочая поверхность служит для контроля оси в области моляров при хирургических операциях по установке имплантатов.



Prichard Код. 40-22

Распор и держатель в одном инструменте. Острая рабочая часть служит для рассечения надкостницы и других тканей. Тупая сторона для удержания лоскута, с лингвальной стороны – для защиты нерва при использовании вращающихся инструментов. Благодаря полировке можно использовать как зеркало.

2,8 mm



2,5 mm

Код. 40-20

Благодаря изгибу рабочих поверхностей инструмент легко адаптируется в лингвальной области.



Лингвальный

2,8 mm

3 mm



Код. 40-25

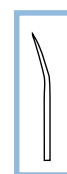
Для атравматичного препарирования при имплантации и пародонтологических операциях.



Molt

4 mm

5 mm



Код. 40-26

Острый край служит для препарирования, тупой – для элевации.



Freer острый/тупой

6 mm

ручка "DELUXE", Ø10 мм, экстра легкая

BO1 Код. 40-15



BO2 Код. 40-16



BO3 Код. 40-17



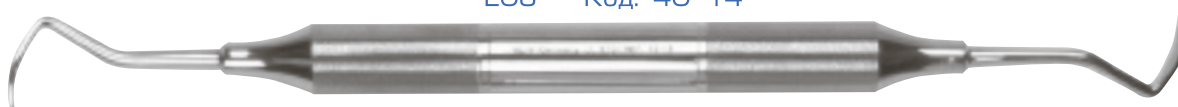
EO1 Код. 40-12



EO2 Код. 40-13



EO3 Код. 40-14


Долота



Код. 26-25

16,5 cm



Код. 26-26

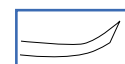16,5 cm



Код. 40-68

17,5 cm



Код. 40-69

17,5 cm

Ref. 40-S0001



Ref. 40-S0002



Ref. 40-S0003



Ref. 40-S0004



H01 Код. 40-06



H02 Код. 40-07



K03 Код. 40-08



K04 Код. 40-09



K78 Код. 40-10



K77 Код. 40-11

ручка "DELUXE", Ø10 мм, экстра легкая

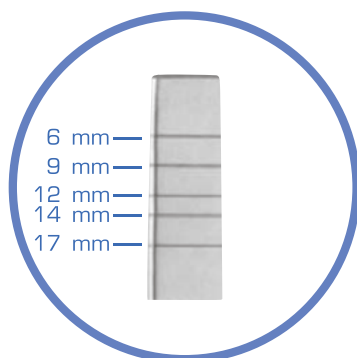


4 mm
Код. 40-30
прямое
17,5 cm

4 mm
Код. 40-31
изогнутое
17,5 cm

6 mm
Код. 40-32
прямое
17,5 cm

6 mm
Код. 40-33
изогнутое
17,5 cm



Остеотомы

Для конденсации мягкой костной ткани в месте внедрения имплантата и закрытого синус-лифтинга

Ø 2,8 mm

Код. 40-34



Ø 3,1 mm

Код. 40-35




Ø 3,5 mm

Код. 40-36



Ø 3,8 mm

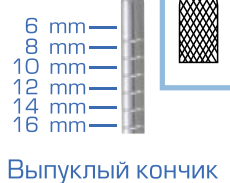Код. 40-37




Ø 2,8 mm

Код. 40-80



Ø 3,1 mm

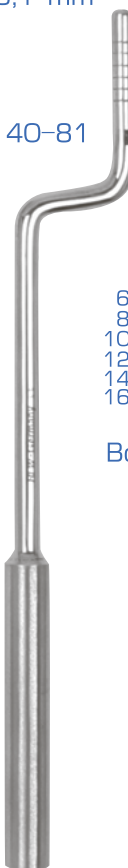Код. 40-81




Ø 3,5 mm

Код. 40-82




Ø 3,8 mm

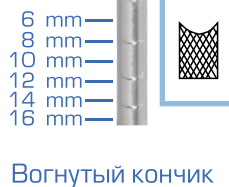
Код. 40-83



Костные рашпили

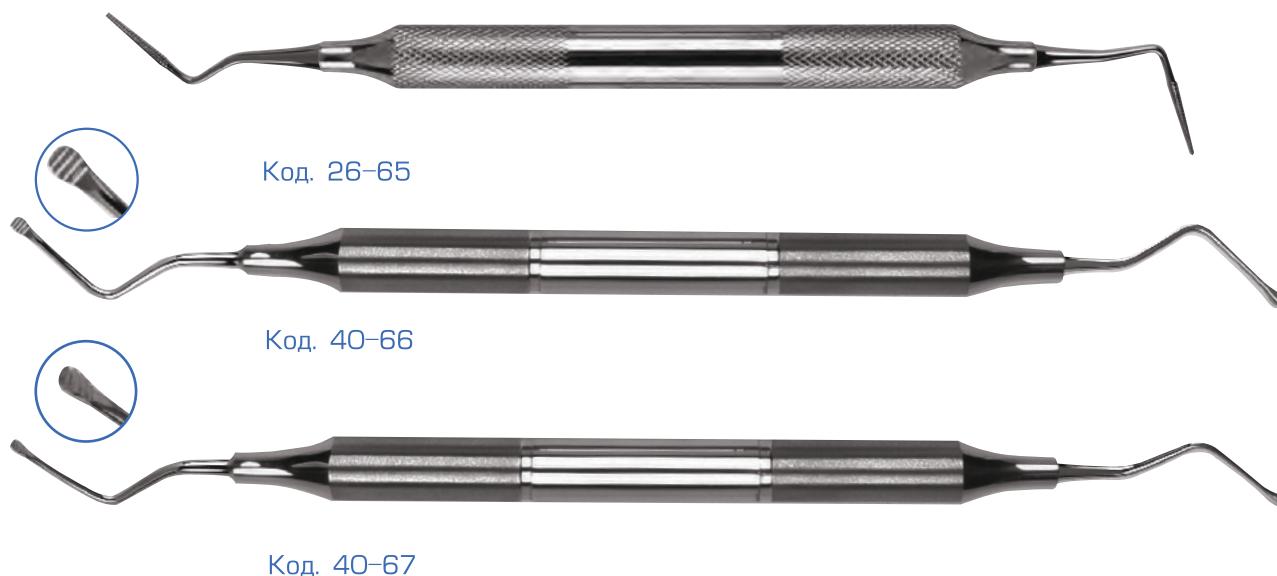

Пинцет для имплантатов
Код. 40-43

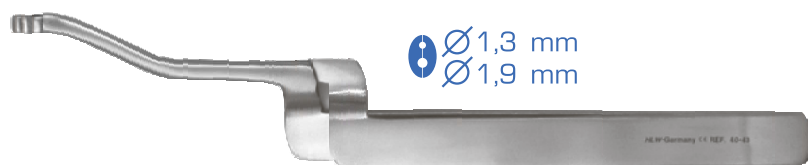

Подходит для всех систем имплантатов с микровинтами. Хорошие удерживающие свойства позволяют точно расположить винт даже в дальней области моляров.

Пинцет для абатментов
Код. 40-43А



Емкость для смешивания кости
Код. 40-03



Кронциркуль
Код. 40-05

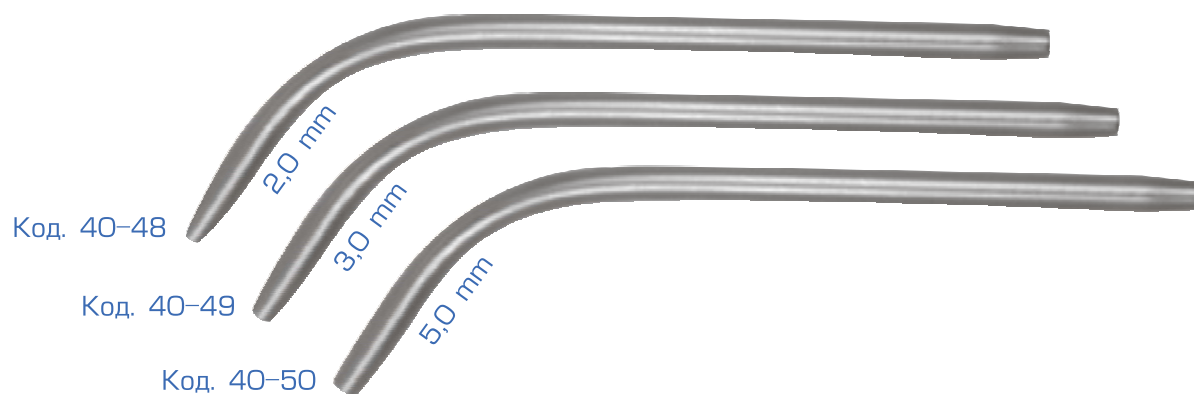


Используется для измерений при имплантации и планировании ортопедических конструкций. Благодаря углу 75° идеально подходит для применения в полости рта

Инструменты для внесения костного материала



Канюли для аспирационной системы многоцветные



Канюля с ловушкой



Код. 40-58

Фильтр для канюли с ловушкой в упаковке 10 штук



Код. 40-58A

Щетки для чистки канюль





Nr. 3

Артикул
Order-No.

Ref. 30-9



Nr. 3A

Ref. 30-9A



Nr. 4

Ref. 30-10

Рукоятка для микро лезвий и зеркал



10 см
13,5 см
15 см

Ref. AD 065/10
Ref. AD 065/13
Ref. AD 065/15

Лезвия для скальпеля

упаковка 100 шт.

№10



BB510

№11



BB511

№12



BB512

№13



BB513

№15



BB515

№15-1



BB515-1

№15-C



BB515-C

№12-D



BB542

* двухсторонняя заточка

Лезвия для микро-скальпеля

№361



упаковка 10 шт.

BB361R

№362



упаковка 10 шт.

BB362R

№363



упаковка 1 шт.

BB363R

№364



упаковка 10 шт.

BB364R

№365



упаковка 10 шт.

BB365R

№367



упаковка 10 шт.

BB367R

№368



упаковка 10 шт.

BB368R

№369





упаковка 1 шт.

BB369R

Измельчитель кости



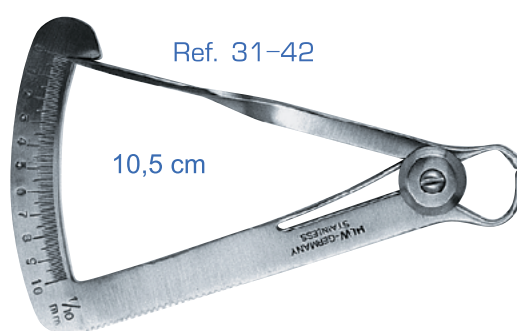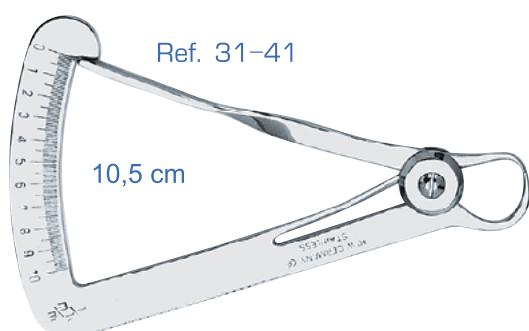Кронциркули



Микрометры



0-40 mm



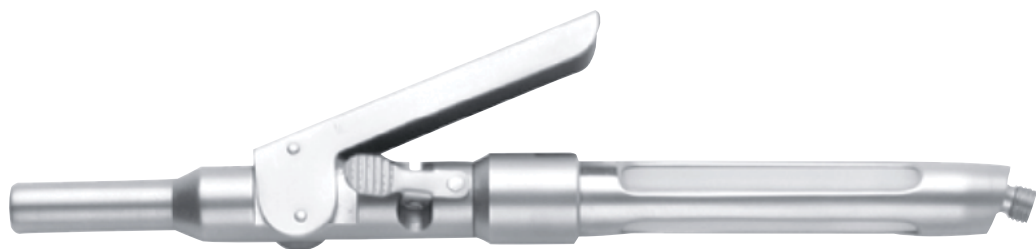
0-40 mm

Микрометр (Остеометр) Код. 40-75

Позволяет измерить
ширину альвеолярного
ребра, не разрезая
слизистую оболочку.



Артикул
Order-No.



изогнутый



прямой

Ref. 17-1

Для интралигаментарной анестезии



Ref. 17-2

Для интралигаментарной анестезии



Ref. 17-7

Термопласт – температура стерилизации до 200°C

Артикул
Order-No.



Ref. 17-3

С функцией аспирации



Ref. 17-4

С функцией аспирации



Ref. 17-4A


С функцией аспирации



по Мореллю

Артикул
Order-No.

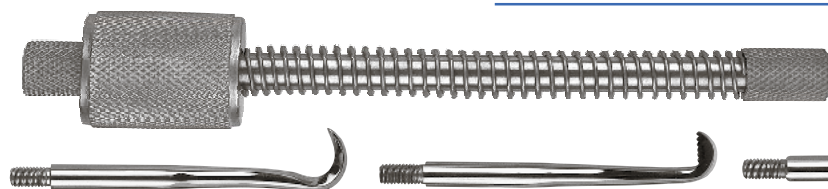Ref. 16-4




по Мореллю

Ref. 16-4A




по Мореллю

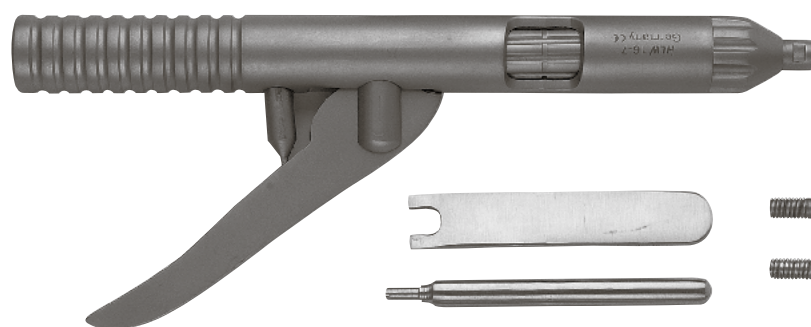Ref. 16-5



Коронкосниматель

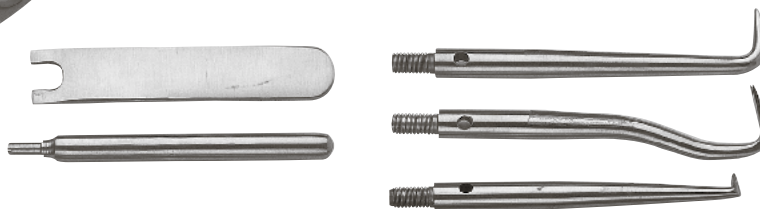Ref. 16-7



Насадки для снятия мостовидных конструкций




Ref. 16-10



тросик
9 cm

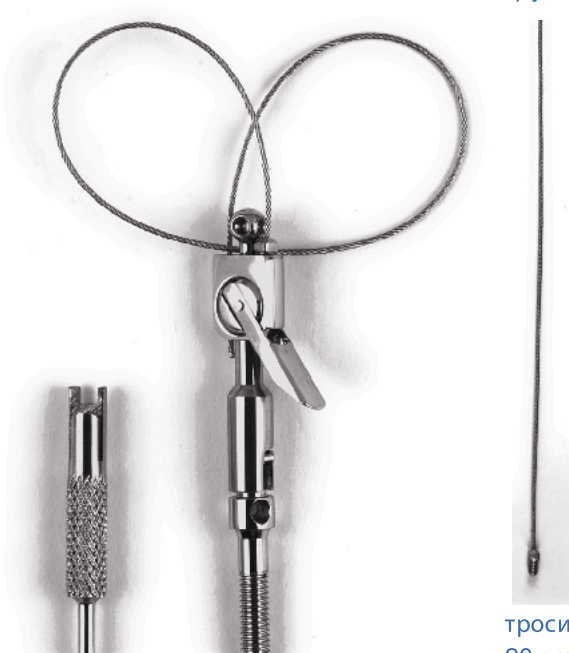Ref. 16-11



Ref. 16-12



тросик
20 cm

Ref. 16-13

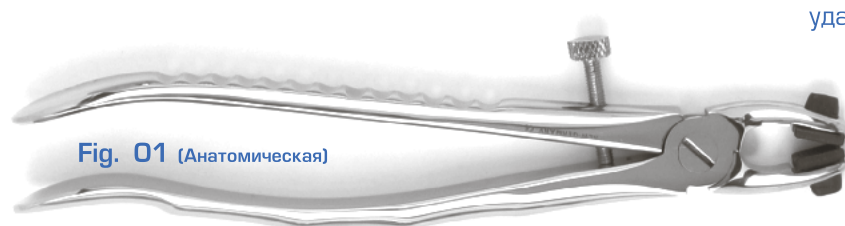


Fig. 01 (Анатомическая)

удаление верхних коронок

ручка:
Анатомическая

Артикул.
Order-No.

Ref. 12-101



Fig. 02 (Анатомическая)

удаление нижних коронок

ручка:
Анатомическая

Ref. 12-102



Fig. 03 (Анатомическая)

удаление верхних коронок

ручка:
Анатомическая

Ref. 12-103


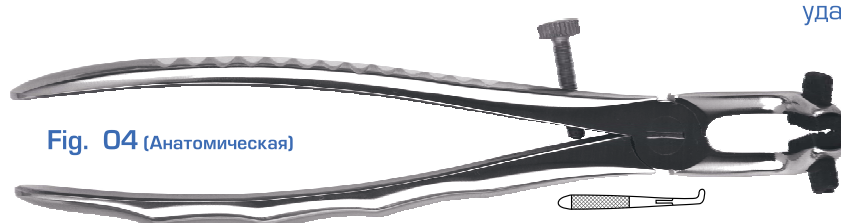


Fig. 04 (Анатомическая)

удаление нижних коронок

ручка:
Анатомическая

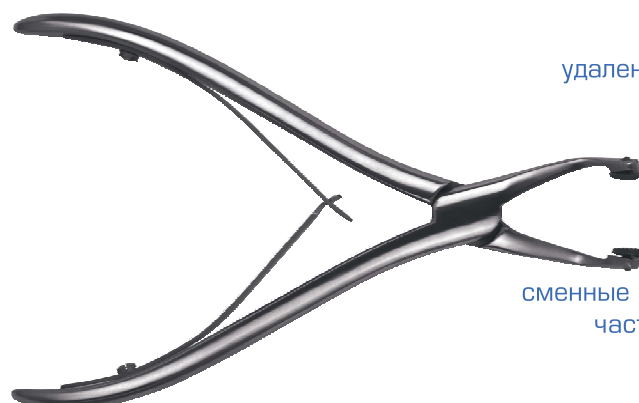Ref. 12-104



удаление коронок

ручка:
Анатомическая

Ref. 12-105

сменные рабочие
части

Артикул
Order-No.

Ref. 29-72

Укладчик ретракционной нити /Пакер

Ref. 29-75

Эмалевый нож мезиальный

Ref. 29-76

Эмалевый нож дистальный

Ref. 30-8

Ref. 30-8A

Ref. 30-8B

Ref. 30-8C

Ref. 30-8D

Инструмент для раздвигания краев коронок

Зеркала

Зеркало стоматологическое высокого качества из нержавеющей стали стерилизуется всеми известными методами до 240 град.



набор 12 шт.



зеркало стандарт

Nº 4	22 мм	Ref. 23-1
Nº 5	24 мм	Ref. 23-2

зеркало увеличивающее

Nº 4	22 мм	Ref. 23-3
Nº 5	24 мм	Ref. 23-4

зеркало Родийм

Nº 4	22 мм	Ref. 23-5
Nº 5	24 мм	Ref. 23-6



13,5 см

ручка для зеркала анатомическая полая

Ref. 23-7



12 см

ручка для зеркала восьмигранная рифленая цельная

Ref. 23-9



14 см

ручка для зеркала шестигранная полая сталь

Ref. 23-8A



12,5 см

ручка для зеркала круглая цельная

Ref. 23-10



12 см

ручка для зеркала шестигранная полая сталь

Ref. 23-8



13,5 см

ручка для зеркала круглая полая

Ref. 23-11


Лотки для хранения и стерилизации

Ref. 15-88



63 x 25 x 30 мм

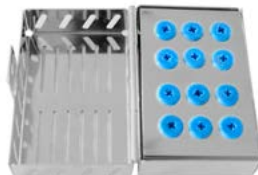Ref. 15-85




80 x 55 x 40 мм

Ref. 15-87




80 x 55 x 40 мм

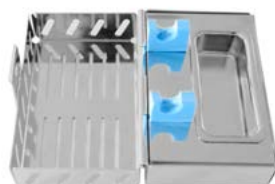Ref. 15-86



80 x 55 x 40 мм

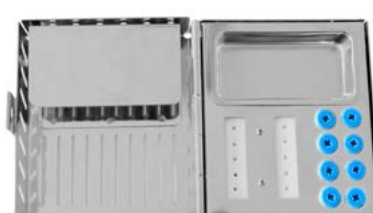Ref. 15-83



100 x 90 x 50 мм

Ref. 15-84



100 x 90 x 50 мм



**Перфорированный бокс
на 10 инструментов**

205 x 145 x 34 mm

Ref. 15-52



**Перфорированный бокс
на 16 инструментов
+ отдельный отсек**

280 x 183 x 32 mm

Ref. 15-53



**Перфорированный бокс
на 20 инструментов**

280 x 205 x 32 mm

Ref. 15-54



Ref. 40-51A

Ø 45 mm



Ref. 40-51

Ø 60 mm




Ref. 40-51C


Ø 80 mm



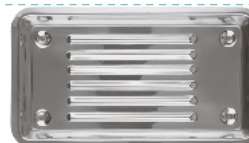Ref. 15-22A
размер
200x100 mm



Ref. 15-22B
размер
205x115 mm

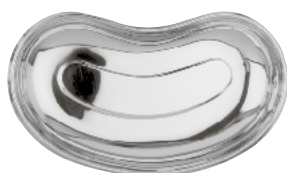


Ref. 15-21
размер
250x150 mm



Ref. 15-22
размер
190x100 mm

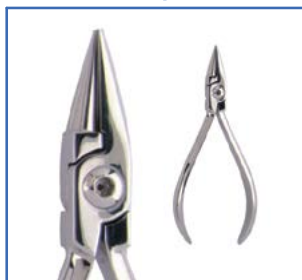Щипцы контурные для изгибания проволоки




Ref. H-138 13 см

Для коррекции формы
проволочных дуг
сечением до .028



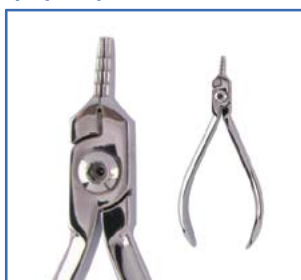Щипцы Нанса для формирования петель



Ref. H-108 12 см

Для точного изгибания
закрывающихся петель
диаметром до .028



Щипцы О'Брайана для формирования петель

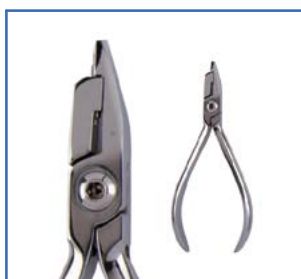


Ref. H-102 13 см

Для формирования
закрывающихся и
омега-петель



Щипцы Твида для формирования петель




Ref. H-105 12,5 см

Для изготовления петель
на прямоугольной дуге
до .022 x .028




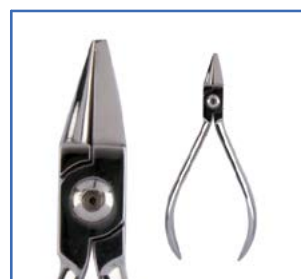Щипцы клювовидные




Ref. H-104 12,5 см

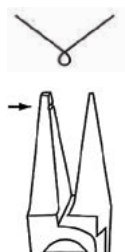Для нанесения изгибов
и формирования петель
на проволоке до .016



Щипцы Адера среднего размера

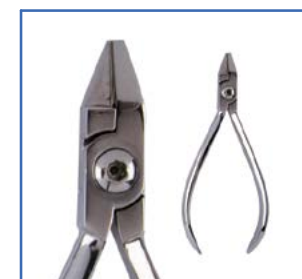


Ref. H-113 12 см

Предназначены для дуг
диаметром до .036



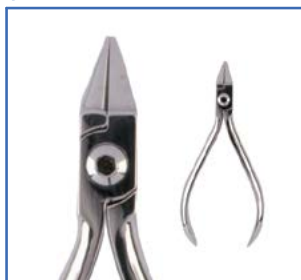Щипцы клювовидные универсальные




Ref. H-104A 12,5 см

Универсальные щипцы для
любого типа проволоки
диаметром до .028



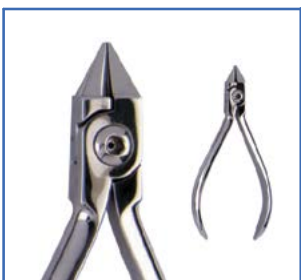Щипцы Энгеля клювовидные




Ref. H-101 12 см


Для любого типа проволоки
диаметром до .028



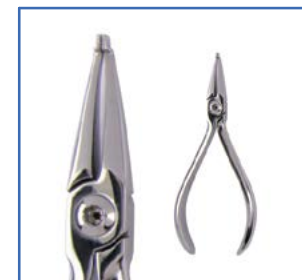
Щипцы Хау прямые



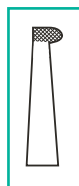Ref. H-205 13 см
Для проволоки до .022 x .028




Щипцы Хау с укороченными щеками

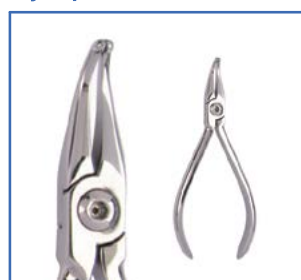


Ref. H-153 13 см

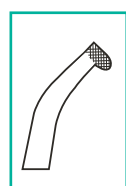Угол наклона щечек 45°



Щипцы Вайнгарт универсальные

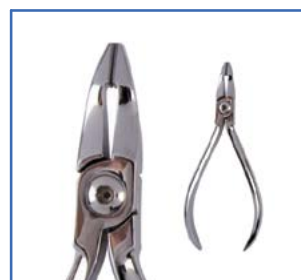

Ref. H-154

Для установки и снятия дуг

Щипцы Вайнгарт удлиненные

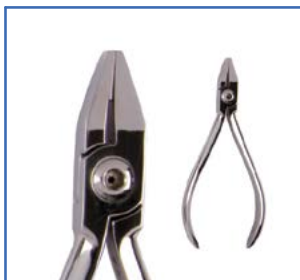


Ref. H-154A


Для проволоки до .022 x .028
Угол наклона щечек 45°

**Щипцы Джарабака
для изгибания проволоки**



Ref. H-129 12,5 см
Для проволоки сечением
до.020

**Щипцы для V-образных
стопоров**

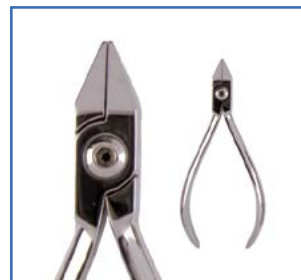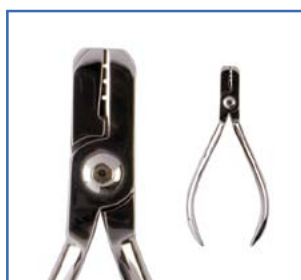
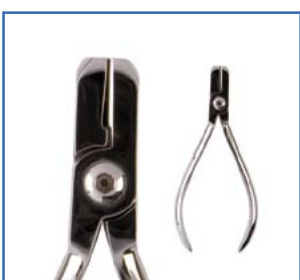
Ref. H-121 12 см
Для проволоки сечением
до.020


Щипцы Адамса


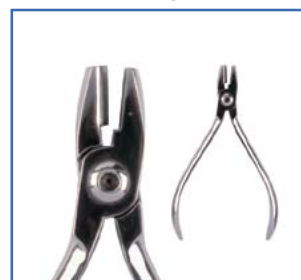
Ref. H-115 12,5 см
Для проволоки сечением
до.030

Щипцы Де Ла Роса


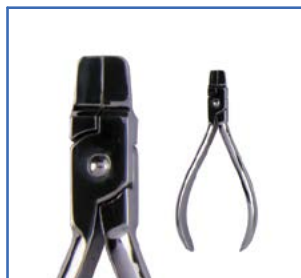
Ref. H-111 12 см
Для проволоки диаметром
.016 / .018 / .022


Щипцы Де Ла Роса


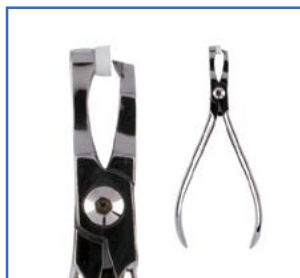
Ref. H-112 12 см
Формирует изгиб без торка.
Диаметр проволоки
до .022 x .025


**Щипцы для
изгибания проволоки**


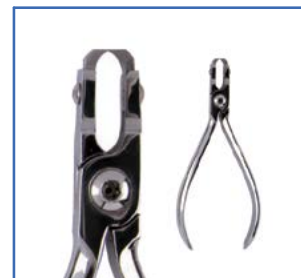
Ref. H-114 12 см
Для проволоки диаметром
до .022 x .025


Щипцы Твида


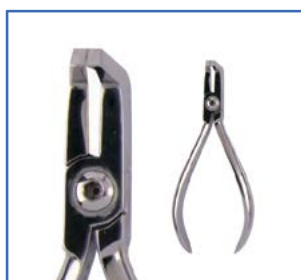
Ref. H-109 12 см
Диаметр проволоки
до .022 x .028.

**Щипцы для снятия
брекетов и клея**


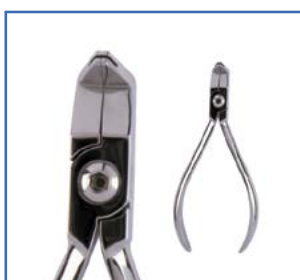
Ref. H-203 12,5 см
Ref. H-203A вставки
Для удаления брекетов
и остатков клея

**Щипцы для снятия
брекетов прямые**


Ref. H-201 12,5 см
Ref. H-201A вставки
Конструкция со сменными
щечками.

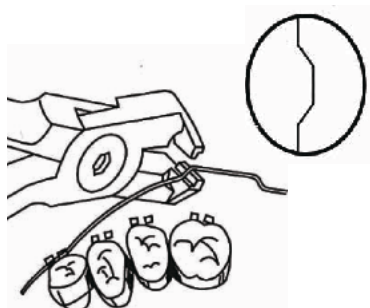
**Щипцы для снятия
брекетов**


Ref. H-206 12,5 см
Изогнуты под углом

Обжимные щипцы


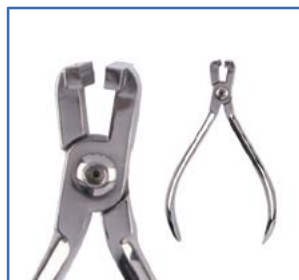
Ref. H-123 12,5 см
Для точного размещения
проволочных петель и дуг






Щипцы для формирования уступов позволяют наносить изгибы на дугу не вынимая ее из полости рта.

Щипцы для формирования уступов




Ref. H-126 12 см
Для проволоки сечением до.020

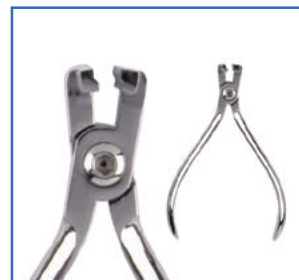Щипцы для формирования уступов




Ref. H-127 12 см
Для проволоки сечением до.030

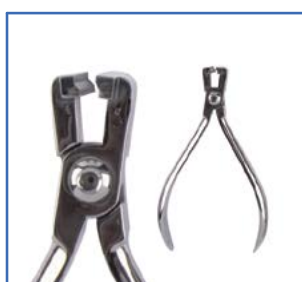Щипцы для формирования уступов




Ref. H-125 12 см
Для проволоки сечением до.040

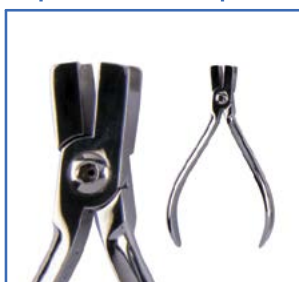Торк-щипцы широкие




Ref. H-134W 11,5 см
С широкими щечками
Торк-ключ в комплекте
Размер: .016 - .018

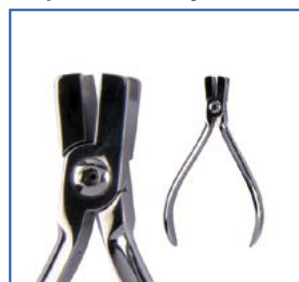Торк-щипцы узкие




Ref. H-134N 11,5 см
С узкими щечками
Торк-ключ в комплекте
Размер: .018 - .022

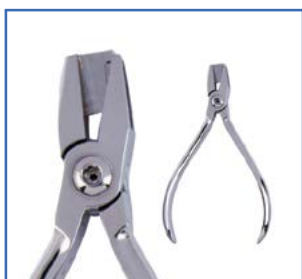Лигатурные щипцы




Ref. H-139 12 см
Для изгибания лигатур

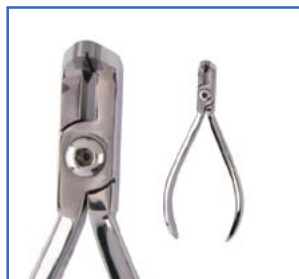Дистальные кусачки для толстой дуги




Ref. H-211 12 см
Для проволоки диаметром от .020 до .028

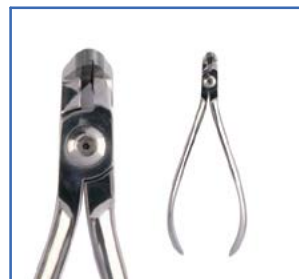Дистальные кусачки для тонкой дуги




Ref. H-220 13 см
Для проволоки диаметром от .012 до .020

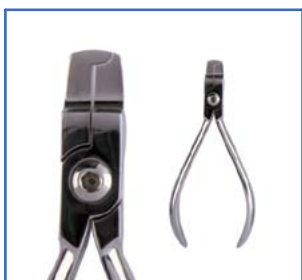Щипцы для зажимания ортодонтических колец




Ref. H-122 12 см

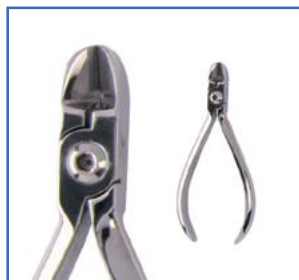Лигатурные кусачки для мягкой проволоки



Ref. H-217 12 см
Для проволоки диаметром до .020

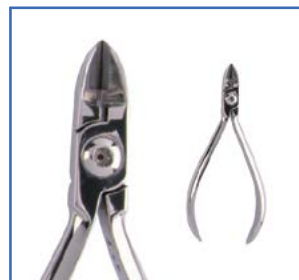Лигатурные кусачки для жесткой проволоки




Ref. H-219 12 см
Для проволоки диаметром до .028


**Кусачки
для проволоки**

Ref. H-31-44 13,5 см

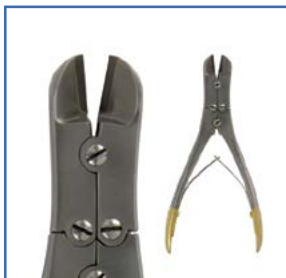
 Для проволоки диаметром
до 0,8 мм

**Кусачки
для проволоки**

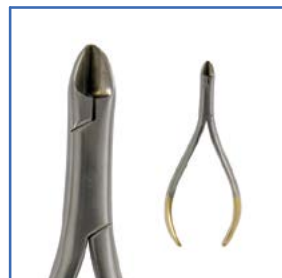Ref. H-31-48 17,5 см


 Для проволоки диаметром
до 1,2 мм

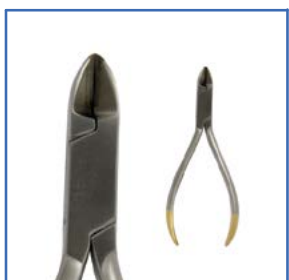**Кусачки
для проволоки (мини)**

Ref. H-31-43A 12,5 см


 Для проволоки диаметром
от 0,3 до 0,5 мм

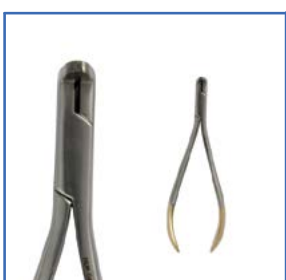**Кусачки
для проволоки**

Ref. H-31-43 13 см


 Для проволоки диаметром
0,5 мм

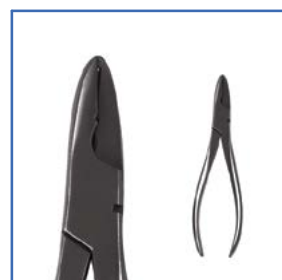**Кусачки
для проволоки**

Ref. H-31-45 15 см


 Для проволоки диаметром
0,5 мм

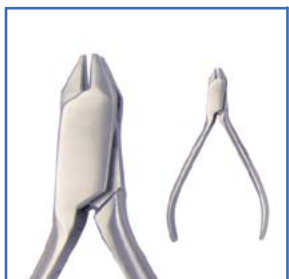**Щипцы для
изгибания проволоки**

Ref. H-32-33 15,5 см


 Для проволоки диаметром
от 0,7 до 1,0 мм

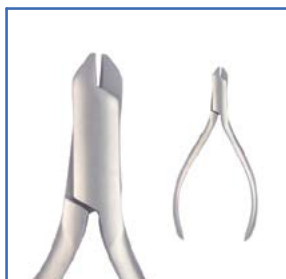Щипцы Адерера

Ref. H-32-19A 12,5 см


 Для жесткой проволоки
диаметром 0,9 мм

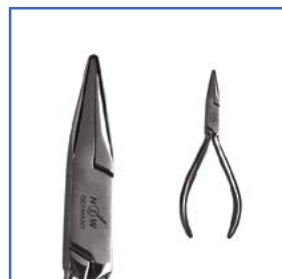**Щипцы Адерера
(мини)**

Ref. H-32-19B 12 см


 Для жесткой проволоки
диаметром 0,7 мм

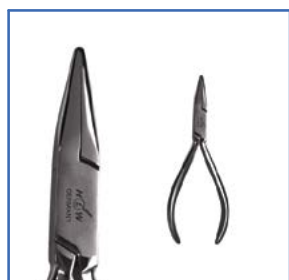
**Щипцы для
изгибания проволоки**

Ref. H-32-5 14,5 см

 Тонкий носик, зубчатая
поверхность

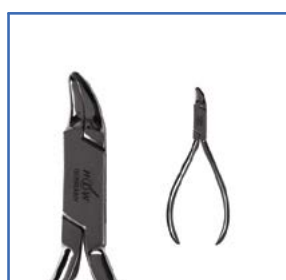**Щипцы для
изгибания проволоки**

Ref. H-32-6 14,5 см

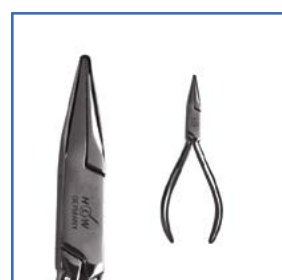 Тонкий носик, плоская
поверхность

**Щипцы Рейнгольда для
изгибания проволоки**

Ref. H-32-27 13 см

**Щипцы
с плоским носиком**

Ref. H-32-7 14,5 см

 Поверхность гладкая
и с бороздками


Щипцы ортодонтические Хоу (Хау)



32-34

для формирования петель

Щипцы ортодонтические Нансе (Нанса)



32-31

для формирования петель

Щипцы ортодонтические Фреверт



32-24

для формирования уступов

Щипцы ортодонтические Янга (Юнга)



32-22

для формирования петель

Щипцы ортодонтические Джарабака



32-17

для формирования петель

Щипцы ортодонтические Шварца



32-10

для формирования уступов

**Щипцы
с плоским носиком**



Ref. 32-1 14,5 см

**Щипцы
с плоским носиком**



Ref. 32-2 14,5 см

**Щипцы
с плоским носиком**




Ref. 32-3 14,5 см

**Щипцы
с плоским носиком**



Ref. 32-4 15 см

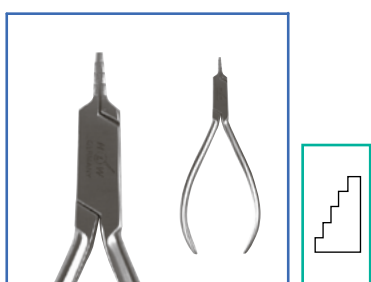Щипцы Нанса



Ref. 32-8 13 см
Для проволоки диаметром
до 0,5 мм

Щипцы Шварца




Ref. 32-9 13 см
Для проволоки диаметром
до 0,7 мм

Щипцы Шварца



Ref. 32-10 13 см
Для проволоки диаметром
до 0,7 мм

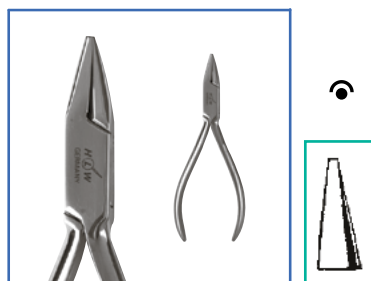Щипцы Шварца




Ref. 32-11 13 см
Для проволоки диаметром
до 0,8 мм

Щипцы Андерсена



Ref. 32-12 14 см

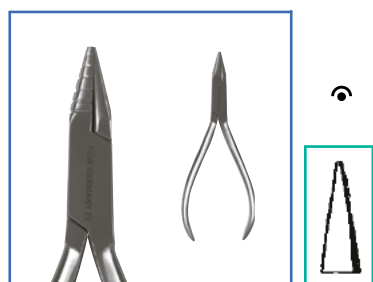Щипцы Шварца



Ref. 32-13 14 см
Для проволоки диаметром
от 0,7 до 1,0 мм

**Щипцы для
изгибания проволоки**



Ref. 32-14 14 см
Для проволоки диаметром
до 0,7 мм

**Щипцы для
изгибания проволоки**



Ref. 32-15 12 см
Для проволоки диаметром
до 0,75 мм

Щипцы для изгиба проволоки




Ref. 32-16 14 см
Изгиб до 0,5 мм

•


Щипцы Джарабака



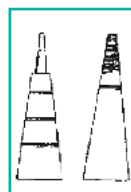Ref. 32-17 13 см



Щипцы Энгеля

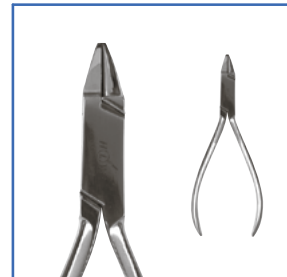

Ref. 32-18 12,5 см
Изгиб до 0,75 мм



Щипцы Адерера



Ref. 32-19 13 см
Изгиб до 0,7 мм

••

Щипцы для изгиба проволоки




Ref. 32-20 16 см
Изгиб до 0,8 мм

•

Щипцы Адерера



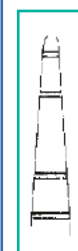Ref. 32-21 16 см



Щипцы Янга



Ref. 32-22 14 см
Изгиб до 0,7 мм



Щипцы для изгиба проволоки



Ref. 32-23 13 см



Щипцы Фреверта



Ref. 32-24 12 см



Щипцы Адамса



Ref. 32-25 14,5 см
Изгиб до 0,75 мм



Щипцы Адерера



Ref. 32-26 12,5 см
Для проволоки диаметром до 1,2 мм



Щипцы Рейнольда



Ref. 32-27 12,5 см



Щипцы Энгеля



Ref. 32-28 12 см


Щипцы Шварца


Ref. 32-30 11,5 см
Для проволоки диаметром до 0,7 мм


Щипцы Нанса


Ref. 32-31 12,5 см
Для проволоки диаметром до 0,7 мм

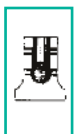
Щипцы для изгибания проволоки


Ref. 32-32 13 см
Для проволоки диаметром до 0,7 мм

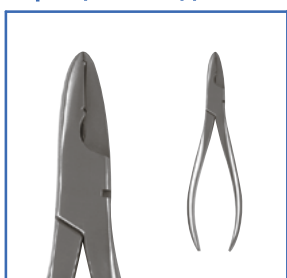Щипцы Вальдсаш


Ref. 32-33 15 см
Для проволоки диаметром до 1,0 мм

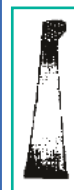Щипцы Хау



Ref. 32-34 14 см

Щипцы Вайнгарта



Ref. 32-35 13 см

Щипцы МакКелопса


Ref. 32-36 16 см
Для проволоки диаметром до 1,5 мм

Щипцы МакКелопса



Ref. 32-37 14,5 см
Для проволоки диаметром до 1,5 мм

Щипцы для снятия медных колец



Ref. 32-40 15 см

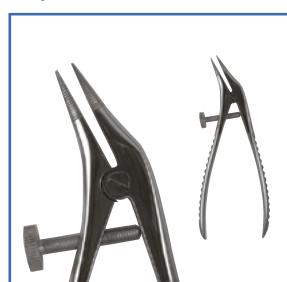Щипцы для телескопических коронок



Ref. 32-41 12,5 см

Обратный пинцет



14см

лингвальный изогнутый

Артикул
Order-No.

Ref. H-302

Обратный пинцет



13см

Ref. H-321

Обратный пинцет с позиционером



11,5см

для позиционирования щечных трубок

Ref. H-332

Обратный пинцет



13см

для позиционирования щечных трубок

Ref. H-332A

Обратный пинцет с позиционером



16см

для позиционирования щечных трубок

Ref. H-322C

Обратный пинцет



13,5см

Ref. H-301

Обратный пинцет



13,5см

Ref. H-301A

Обратный пинцет



13,5см

Ref. H-301C

Обратный пинцет с позиционером



14см

Ref. H-322

Обратный пинцет



12,5см

Ref. H-321A

Артикул
Order-No.

Позиционер для брекетов



Ref. H-316-018

Ref. H-316-022

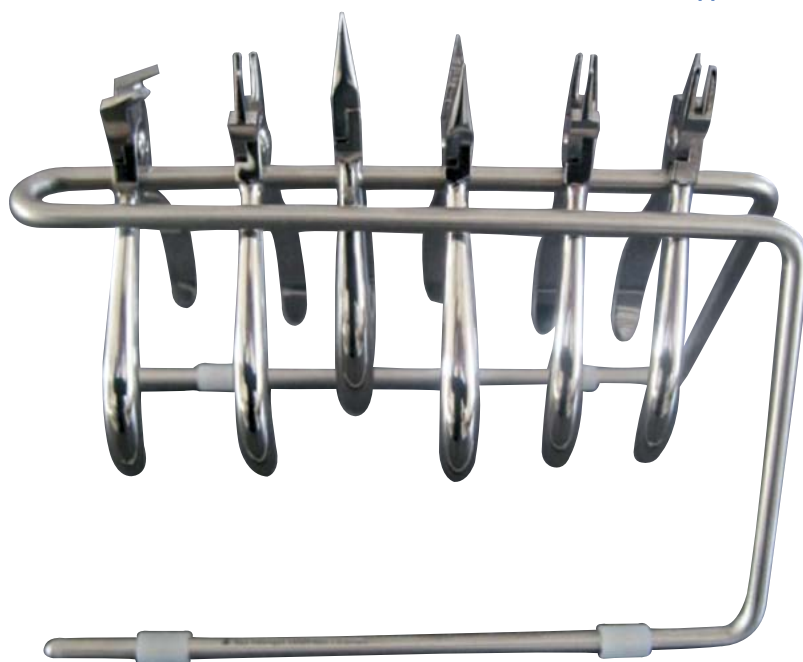
используется для измерения высоты от режцового края для облегчения расположения брекета

Скалер / пушер



Ref. H-314

Подставка для щипцов



Ref. H-100

Рекомендации по стерилизации стоматологических инструментов торговой марки HLW Dental instruments Germany

Дорогие покупатели!
Спасибо, что Вы приобрели наши инструменты.

Для увеличения срока службы и во избежание образования на инструментах коррозии, рекомендуем соблюдать основные пункты по уходу и обработке стоматологических инструментов:

1. Прежде чем отправить инструмент на стерилизацию, необходимо тщательно промыть и почистить его с помощью мягкой щетки и специального моющего средства. Просьба не применять при этом металлические щетки. Основательной и эффективной чистки Вы добьетесь при помощи устройства чистки ультразвуком (используйте при этом только специальные средства для чистки в ультразвуковом устройстве).
!!! Особенно важно, чтобы инструменты с подвижными ручками (такие как щипцы, иглодержатели и ножницы) были в открытом состоянии во время стерилизации и предстерилизационной обработки!!!
2. Сразу же после чистки и мойки, инструменты необходимо основательно прополоскать в горячей воде. Тщательное полоскание в горячей воде и предварительную чистку желательно также производить сразу же после использования инструментов, с целью скорейшего удаления крови, сукровицы и других агрессивных соединений: щелочи, кислоты, соли.
3. Прежде чем уложить инструмент в стерильную упаковку, убедитесь, чтобы он был в исключительно сухом состоянии. Это также важно при промежуточном, временном хранении. Остаточная влажность может вызывать коррозию или образование пятен на инструментах.
4. В процессе холодной стерилизации, во избежание образования коррозии, не оставляйте инструменты на длительный срок в растворе дезинфекции, более чем этого требует инструкция по используемому средству. После завершения, тщательно ополосните инструменты в дистиллированной воде и основательно высушите их.
5. Не используйте едкие очистители или любые другие чистящие средства, которые изначально не предназначены для стерилизации медицинских инструментов.
6. Проверьте используемую воду на наличие железа, натрия, кальция, магния и меди, содержание которых может вызвать образование пятен и коррозии металла. При использовании жесткой воды производите чистку автоклава и его паропроводов. По возможности используйте только дистиллированную воду или установите фильтры, которые предотвратят образование солей на инструментах и деталях оборудования.
7. Убедитесь, что Ваши салфетки и полотенца тщательно выстираны и прополосканы, так как остатки хлоридов и отбеливателя являются причиной образования пятен и коррозии.
8. Не рекомендуется стерилизовать инструменты из нержавеющей стали с инструментами из других материалов (например: хромированными), так как образуется разница потенциалов, которая способствует образованию пятен и коррозии.
9. Разогрейте инструменты в автоклаве, если это возможно, перед стерилизацией паром, чтобы предотвратить чрезмерное количество конденсата на поверхности инструментов. И не открывайте автоклав слишком скоро после стерилизации, желательно чтобы инструменты полностью остыли.
10. Ни на каком из этапов стерилизации инструменты не должны контактировать с ржавеющими инструментами или с инструментами с поврежденной поверхностью.
11. Настоятельно рекомендуется стерилизовать в разобранном виде инструменты, содержащие съемные тефлоновые детали, чтобы избежать залипания, и добиться полной отчистки и дезинфекции (Например: тефлоновые втулки от молотка ref.40-O1 рекомендуется выкручивать).
12. Рекомендуется избегать соприкосновений отражающей поверхности зеркал с другим инструментом во время стерилизации. Фото-зеркала лучше стерилизовать отдельно от других инструментов.

Если Вы будете следовать всем положениям по уходу и чистке инструментов, использовать специальное масло для винтовых соединений, срок службы инструментов заметно увеличится.